

持之一恒

■ 理想的实验室伙伴

■ 实验室仪器的升级换代产品

bluepard
instruments



实验仪器类

上海一恒科学仪器有限公司

苏州贝茵科技股份有限公司

地址:上海市共和新路966号共和大厦七楼 邮编:200070
制造中心:江苏省昆山市千灯镇龚巷路108号
销售热线:021-56904023 400-630-4023
欢迎访问:www.yihengchina.com

企业邮箱:yihengyq@163.com
企业QQ:800001686
微信号:yhyiqi

环境试验设备类

电话:400-630-4023
电子邮箱:yihengyq@163.com

进出口部

International Trade Dept.

Tel:+86-21-56633709/56904023-807
E-mail:export2@bluepard.com
欢迎访问:www.bluepard.com

服务热线:400-630-4023

售后咨询

售后服务咨询:0512-36906225 / 36906226

上海:400-630-4023
昆山:0512-36906226/36906225

公司维修分部

北京、广东、四川

一恒仪器

培养箱系列 二氧化碳培养箱系列 干燥箱系列 恒温槽系列 振荡器系列 药品稳定性试验箱系列 恒温恒湿箱系列
磁力搅拌器系列 箱式电阻炉系列 高低温试验箱系列 环境试验箱系列 洁净工作台系列 超低温冰箱 旋转蒸发仪 循环冷却器

YIHENG INSTRUMENT
www.yihengchina.com

bluepard
instruments



上海一恒科学仪器有限公司
苏州贝茵科技股份有限公司

2025-03月版



实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴

持之一恒

我们只制造放心

www.yihengchina.com

www.yihengyiqi.com



Contents

目录 为您提供各种非标产品的定制

我们的品牌: JH bluepard being

定位: 生命科学领域温湿度控制解决方案的专业供应商

经营理念: 精英治企、持之一恒

广告口号: 我们只制造放心! (每小时卖出12台)

价值观: 满意客户、满意员工、满意社会

质量方针: 提供客户期望的产品和服务

实验室通用仪器

培养箱系列 01

- 生化/霉菌培养箱 /01
- 大型生化培养箱 /02
- 智能型生化/霉菌培养箱 /04
- 低温培养箱/多箱体生化/霉菌培养箱 /05/06
- 生物安全低温培养箱 /07
- 半导体制冷低温培养箱 /08
- 生物安全培养箱/恒温培养箱 /09/10
- 精密恒温培养箱/电热恒温培养箱 /11/12
- 隔水式恒温培养箱/微生物培养箱 /13 /14

干燥箱系列 52

- 耐腐蚀干燥箱/多箱体干燥箱 /52
- 智能型鼓风干燥箱/自然对流干燥箱 /53
- 精密鼓风干燥箱 /54
- 高温鼓风干燥箱 /55
- 自然对流干燥箱 /55
- 鼓风干燥箱 /56
- 干燥/培养箱(两用) /57
- 大型鼓风干燥箱 /58

真空干燥箱系列 59

- 智能型台式真空干燥箱 /59
- 台式真空干燥箱 /立式真空干燥箱 /60/61
- 真空度数显并控制真空干燥箱 /62
- 电子半导体元件专用真空干燥箱 /63
- 耐腐蚀真空干燥箱 /药物真空干燥箱 /64
- 高温真空干燥箱 /65
- HDMS真空箱/高真空干燥箱 /66
- 多箱真空干燥箱 /67

水槽/水浴锅/恒温循环槽系列 68

- 加热循环槽 /68
- 制冷和加热循环槽 /69
- 恒温振荡水槽 /71
- 电热恒温水槽 /72
- 水浴锅/恒温磁力搅拌水/油浴锅 /73/74
- 精密恒温水槽 /75
- 恒温水槽与水浴锅(两用) /76

箱式电阻炉系列 93

- 专业型箱式电阻炉 /93
- 普及型箱式电阻炉 /94
- 可编程式箱式电阻炉 /95
- 可编程式箱式电阻炉(高温型) /96

化学前处理设备系列 97

- 旋转蒸发仪 /97
- 分液漏斗振荡器 /100
- 耐腐蚀隔膜泵 /101
- 循环冷却器 /102
- 干式冷阱 /103
- 磁力搅拌器 /104

生命科学仪器

二氧化碳培养箱 15

- 专业型CO₂培养箱 /15
- 普及型CO₂培养箱 /16
- 高档型CO₂培养箱 /17

振荡器/振荡培养箱系列 31

- 回旋振荡器 /31
- 恒温培养摇床 /33
- 恒温振荡器 /35
- 大型恒温振荡器 /36
- 落地振荡器 /37
- 摇瓶机 /38
- 叠加式-CO₂振荡培养箱 /39
- 叠加式-振荡培养箱 /41

低温冷藏/生物安全产品系列 43

- 超低温冰箱 /43
- 低温冷藏箱 /45
- 液相液氮罐 /46
- 干式运输液氮罐 /48
- 生物安全柜 /49
- 洁净工作台 /50

环境试验仪器

植物生长箱/光照培养箱/人工气候箱 19

- LED 植物生长箱 /19
- LED光照培养箱 /21
- LED人工气候箱 /21
- 专业型光照培养箱 /23
- 专业型人工气候箱 /23
- 普及型光照培养箱 /25
- 普及型人工气候箱 /25

恒温恒湿箱系列 26

- 专业型恒温恒湿箱 /26
- 简易型恒温恒湿箱 /27
- 普及型恒温恒湿箱 /27
- 高档型恒温恒湿箱 /28

药品稳定性试验箱系列 77

- 药品稳定性试验箱 /77
- 大型药品稳定性试验箱 /79
- 多箱药品稳定性试验箱 /80
- 紫外光监测与控制药品稳定性试验箱 /81
- 步入式药品稳定性试验室 /83

小型桌面仪器

试验箱系列 84

- 老化试验箱/热空气消毒箱 /84
- 高低温(交变)试验箱 /85
- 高低温(交变)湿热试验箱 /87
- 台式紫外光耐候试验箱 /89
- 紫外光耐候试验箱 /90
- 氙灯耐候试验箱 /91
- 盐雾腐蚀试验箱 /92

通用桌上仪器1 108

- 顶置电动搅拌机 /108
- 氮吹仪 /109
- 离心机 /110
- 漩涡混匀仪 /110
- 多管漩涡混匀仪 /111
- 微孔板孵育器/振荡恒温金属浴 /112
- 恒温金属浴 /113

通用桌上仪器2 114

- 微孔板迷你离心机 /114
- 微型高速离心机 /114
- 均质分散机 /115
- 手持式均质分散机 /116
- 粘度计(日本东机) /117



CE 证书 ISO 13485 ISO 9001 ISO 14001



客户为尊
质量为本

新浪微博
weibo.com

关注@一恒仪器



微信扫描二维码

关注一恒仪器 微信

Introduction 公司简介

公司创建于1997年,是**国家级专精特新“小巨人”**企业和高新技术企业,专注于科学实验仪器设备研发、生产、销售和服务。我们长期致力于温湿度控制领域的产品创新和技术应用,产品和服务覆盖实验室仪器、生命科学、环境试验等领域,为客户提供整体解决方案和专业化服务。至2024年已向客户提供各类科学仪器**82万台**,产品销售范围遍布全球70多个国家和地区。

公司一贯秉承“以科技保证品质,服务完善产品”的宗旨,引领行业潮流,成为世界众多跨国集团的ODM/OEM供应商。

我们一直将品质和服务摆在首位,关键零部件采用进口产品,先后通过了ISO9001、ISO13485、ISO14001和ISO45001多项体系认证,以及欧洲CE、美国ETL/UL认证。

公司目前拥有昆山和太仓生产基地,总建筑面积7万多平方米,太仓新工厂获得“**江苏省级示范智能车间**”称号。公司的售后服务网络覆盖华东、华南、华北、西南等地。

应用领域



基础研究



细胞生物学



生物技术



临床、大学、医院



制药工业



包装测试



药品和化妆品保存期测试



工矿企业



实验室仪器的升级换代产品
理想的实验室伙伴

持之一恒

我们只制造放心

www.yihengchina.com
www.yihengyiqi.com



NEW 新品专区

新品专区 NEW

半导体制冷低温培养箱
BEC-50/100/250/500



P8

气套式CO₂培养箱（三气）
BPN-40/80/150/190/240RHP



P17

水套式CO₂培养箱（三气）
BPN-60/170/240RWP



P18

耐腐蚀真空干燥箱
BPZ-6065/6095/6215



P64

HMDS真空箱（高真空干燥箱）
BPZ-6060MS/6090MS/6060HV/6090HV



P66

步入式药品稳定性试验箱
LHH-系列



P83

叠加式-CO₂振荡培养箱
BPNZ-101/111/121C（一层/两层/三层）



P39

生物安全柜
BBC-351/451/551/651(U)



P49

生化培养箱(触摸屏)/霉菌培养箱(触摸屏)
BPC-150/250/500T BPMJ-150/250/500T



P4

恒温恒湿箱
BH-60/120/250/500/800(CL/CA)



P29

植物生长箱
PGC-150/300/500/1000/500-2(H)



P19

多箱体生化/霉菌培养箱（两箱/四箱）
LRH-150-2B/ LRH-100-4B
MJ-150-2B/MJ-100-4B



P6

恒温培养箱（触摸屏）
DHP-9032/9052/9082/9162/9272T



P10

真空干燥箱（触摸屏/真空度控制）
DZF-6022/6032/6052/6092/6213T



P59

鼓风干燥箱（触摸屏）
DHG-9030/9050/9070/9140/9240T
DHG-9035/9055/9075/9145/9245T




P53

多箱体恒温培养箱（两箱/四箱）
DHP-150-2B/ DHP-100-4B



P14

多箱体干燥箱（两箱/四箱）
DHG-150-2B/ DHG-100-4B

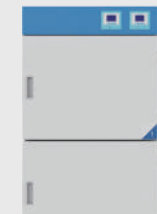

P52

生物安全（低温）培养箱
BISF-80/150/190/240
BISF-100C/300C



P7

自然对流干燥箱（触摸屏）
DHG-9031/9051/9091/9141/9201T



P53

大型鼓风干燥箱
BPG-2000L/3000L/4000L



P58

耐腐蚀干燥箱
BPG-9106/9156/9206 S



P52

超低温冰箱
BDW-86L390/86L490/86L650/86L770



P43

低温冷藏箱
BYC-5L310/5L656/5L1000



P45

液相液氮罐(方提桶/圆提桶)
BYDS系列



P46

四箱06



实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴

持之一恒

我们只制造放心

www.yihengchina.com

www.yihengyiqi.com



隔水式恒温培养箱—数字显示

隔水式恒温培养箱—多段程序控制

产品特点

人性化设计

- 拉丝不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板可以自由装卸，便于工作室清洁；
- 隔水式加热方式，保证工作室温度均匀，在断电状态，仍能保持较长时间恒温；
- 箱内有便于观察玻璃门，在工作状态，用户可以随时打开玻璃门，培养箱会自动暂停工作，并切断加热与循环风机；
- 微电脑控制器；自整定PID技术，不会形成温度过冲；具有温度、水位和开门报警等人性化设计功能，能避免温度突变对实验样品的破坏；

循环风扇速度自动控制



- 循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发；

多段可编程控制器（带“N”具有此功能）

- 多段可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行；
- 多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制,从箱内初始温度缓慢升温等功能,也可预设自动开机、待机与关机等功能；

安全功能

- 独立限温报警系统、能声光报警提示操作者，保证实验安全运行不发生意外；(选配)
- 具有温度偏高和超温和缺水等报警；
- 具有开门时间过长报警；

紫外杀菌系统（选配）

- 可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染；

技术参数

技术指标	型号	GHP-9050 GHP-9050N	GHP-9080 GHP-9080N	GHP-9160 GHP-9160N	GHP-9270 GHP-9270N
	电源电压	AC220V 50HZ			
加热方式	水套式				
控温范围	RT+5 ~ 65℃				
温度分辨率/波动度	0.1℃/±0.3℃				
温度均匀度	±0.5℃ (测试点为37℃)				
工作环境温度	+5 ~ 35℃				
输入功率	450W	650W	850W	1350W	
容积	50L	80L	160L	270L	
内胆尺寸(mm)W×D×H	350×350×410	400×400×500	500×500×650	600×600×750	
外形尺寸(mm)W×D×H	500×500×700	550×550×800	650×640×950	750×740×1050	
载物托架（标配）	2块				
定时范围	0 ~ 5999min				
价格	RMB5560 RMB6920	RMB6400 RMB8190	RMB8900 RMB10400	RMB12100 RMB14500	

注：带“N”为多段程序液晶控制器

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、多段可编程温度控制器 ￥1500元
 - 2、U盘数据储存 ￥1000元
 - 3、嵌入式打印机 ￥2500元
 - 4、独立限温控制器 ￥500元
 - 5、RS485接口和通讯软件 ￥600元
 - 6、紫外杀菌系统 ￥1000元
 - 7、可选配自动加水系统 ￥1500元
- 注：U盘、RS485/232、打印机三选一



GHP-9000系列



③嵌入式打印机



⑤RS485通讯接口



④独立限温控制器



⑥紫外杀菌系统

多箱体电热恒温培养箱

新产品

产品特点


- 具有两箱或者四箱培养箱可选，有效节省实验室空间；
- 每个培养箱箱体独立控制，互不干扰，温度控制精确稳定；
- 镜面不锈钢内胆，便于工作室的清洁工作；
- 模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为99小时59分；
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外；(选配)

安全功能

- 温度偏高和超温报警；

技术参数

型号\技术参数	电源电压	控温范围	温度分辨率/波动度	工作环境温度	输入功率	容积	内胆尺寸(mm) W×D×H	外形尺寸(mm) W×D×H	载物托架 (标配)	价格
DHP-150-2B(二箱)	AC220V 50HZ	RT+5 ~ 65℃	0.1℃/ ±0.5℃	+5~35℃	1200W	150L×2	560×530×600	705×740×1800	2块 (单箱)	RMB14300
DHP-100-4B(四箱)					1500W	100L×4	455×430×510	1220×616×1620		RMB28600

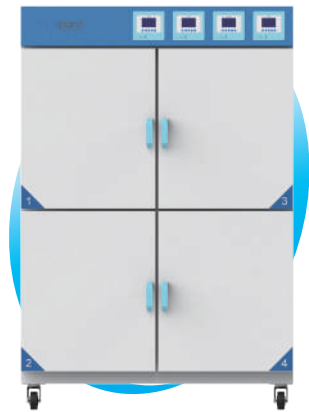

微生物培养箱—自然对流

产品特点

- 镜面不锈钢内胆，便于工作室的清洁工作；
- 采用自然对流循环方式，无噪音，避免试验过程中样品的挥发；
- 箱门上配有观察窗，便于观察箱内的实验过程；
- 模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为99小时59分；
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外；(选配)

多段可编程控制器（选配）

- 多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行；
- 多段温度、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能；

安全功能

- 温度偏高和超温报警；

紫外杀菌系统（选配）

- 可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染；

技术参数

注：带“B”为液晶控制器

技术指标	型号	DHP-9011 DHP-9011B	DHP-9031 DHP-9031B	DHP-9051 DHP-9051B	DHP-9121 DHP-9121B	DHP-9211 DHP-9211B
电源电压	AC220V 50HZ					
控温范围	RT+5 ~ 65℃					
温度分辨率/波动度	0.1℃/±0.5℃					
工作环境温度	+5 ~ 35℃					
输入功率	85W	125W	250W	550W	900W	
观察窗	有					
容积	16L	35L	50L	115L	220L	
内胆尺寸(mm)W×D×H	270×260×232	360×325×300	400×330×380	520×450×495	650×500×680	
外形尺寸(mm)W×D×H	507×397×347	597×464×417	665×667×600	785×587×715	915×657×870	
载物托架（标配）	2块	2块	2块	3块	3块	
价格	RMB3040 RMB3750	RMB3560 RMB4400	RMB4600 RMB5560	RMB5980 RMB6820	RMB7240 RMB8280	



微生物培养箱

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、多段可编程控制器 ￥1500元
- 2、U盘数据储存 ￥1000元
- 3、独立限温控制器 ￥500元
- 4、RS485接口和通讯软件 ￥600元

注1：U盘、RS485/232二选一

注2：DHP-9011/9011B,不能选配RS485接口和通讯软件

01 生化/霉菌培养箱

04

05 低温培养箱

06 多箱体生化/霉菌培养箱

07 生物安全低温培养箱

08 半导体制冷低温培养箱

09 生物安全培养箱

10 恒温培养箱

13 隔水式恒温培养箱

14 多箱体恒温/微生物培养箱

15 CO₂培养箱

18

19 光照培养箱/人工气候箱

26 恒温恒湿箱

31 回旋振荡器

33 恒温培养摇床

35 恒温振荡器

36 大型恒温振荡器

37 落地振荡器

38 摇瓶机

39 叠加式-振荡培养箱

42

43 超低温冰箱

45 低温冷藏箱

46 液相液氮罐

48 干式运输液氮罐

49 生物安全柜

50 洁净工作台

52 干燥箱

59 真空干燥箱

68 加热循环水槽

71 恒温振荡水槽

74 油浴锅

76 恒温水槽与水浴锅

77 药品稳定性试验箱

83 步入式药品试验室

84 老化试验箱

84 热空气消毒箱

85 高低温(交变)试验箱

87 高低温(交变)湿热试验箱

89 紫外耐候气候试验箱

90

91 氙灯耐候气候试验箱

92 盐雾腐蚀试验箱

93 电阻炉

96

97 旋转蒸发仪

100 分液漏斗振荡器

101 耐腐蚀隔膜泵

102 循环冷却器

103 干式冷阱

104 磁力搅拌器

108 顶置电动搅拌器

109 氨吹仪

110 离心机

110 漩涡混合仪

111 多管漩涡混匀仪

112 孵育器/金属浴

114 微孔板迷你离心机

115 均质分散机

117 粘度计

122

隔水式恒温培养箱

生化/霉菌培养箱

01

04

低温培养箱

05

多箱体生化/霉菌培养箱

06

生物安全低温培养箱

07

半导体制冷低温培养箱

08

生物安全培养箱

09

恒温培养箱

10

隔水式恒温培养箱

13

多箱体恒温/微生物培养箱

14

CO₂培养箱

15

光照培养箱/人工气候箱

19

恒温恒湿箱

26

回旋振荡器

31

恒温培养摇床

33

恒温振荡器

35

大型恒温振荡器

36

落地振荡器

37

摇瓶机

38

叠加式-振荡培养箱

39

42

超低温冰箱

43

低温冷藏箱

45

液相液氮罐

46

干式运输液氮罐

48

生物安全柜

49

洁净工作台

50

干燥箱

52

真空干燥箱

59

加热循环水槽

68

恒温振荡水槽

71

油浴锅

74

恒温水槽与水浴锅

76

药品稳定性试验箱

77

步入式药品试验室

83

老化试验箱

84

热空气消毒箱

84

高低温(交变)试验箱

85

高低温(交变)湿热试验箱

87

紫外耐候气候试验箱

89

90

氙灯耐候气候试验箱

91

盐雾腐蚀试验箱

92

电阻炉

93

96

旋转蒸发仪

97

分液漏斗振荡器

100

耐腐蚀隔膜泵

101

循环冷却器

102

干式冷阱

103

磁力搅拌器

104

顶置电动搅拌器

108

氨吹仪

109

离心机

110

漩涡混合仪

110

多管漩涡混匀仪

111

孵育器/金属浴



实验室仪器的升级换代产品
理想的实验室伙伴

持之一恒

我们只制造放心

www.yihengchina.com
www.yihengyiqi.com



- 01 生化/霉菌培养箱
- 04 低温培养箱
- 06 多箱体生化/霉菌培养箱
- 07 生物安全低温培养箱
- 08 半导体制冷低温培养箱
- 09 生物安全培养箱
- 10 恒温培养箱
- 13 隔水式恒温培养箱
- 14 多箱体恒温/微生物培养箱
- 15 CO₂培养箱
- 18 隔水式恒温培养箱
- 19 光照培养箱/人工气候箱
- 26 恒温恒湿箱
- 31 回旋振荡器
- 33 恒温培养摇床
- 35 恒温振荡器
- 36 大型恒温振荡器
- 37 落地振荡器
- 38 摇瓶机
- 39 叠加式-振荡培养箱
- 43 超低温冰箱
- 45 低温冷藏箱
- 46 液相液氮罐
- 48 干式运输液氮罐
- 49 生物安全柜
- 50 洁净工作台
- 52 干燥箱
- 59 真空干燥箱
- 68 加热循环水槽
- 71 恒温振荡水槽
- 74 油浴锅
- 76 恒温水槽与水浴锅
- 77 药品稳定性试验箱
- 83 步入式药品试验室
- 84 老化试验箱
- 84 热空气消毒箱
- 85 高低温(交变)试验箱
- 87 高低温(交变)湿热试验箱
- 89 紫外耐候试验箱
- 91 氙灯耐候试验箱
- 92 盐雾腐蚀试验箱
- 93 电阻炉
- 96 电阻炉
- 97 旋转蒸发仪
- 100 分液漏斗振荡器
- 101 耐腐蚀隔膜泵
- 102 循环冷却器
- 103 干式冷阱
- 104 磁力搅拌器
- 108 顶置电动搅拌器
- 109 氮吹仪
- 110 离心机
- 110 漩涡混匀仪
- 111 多管漩涡混匀仪
- 112 孵育器/金属浴
- 114 微孔板迷你离心机
- 115 均质分散机
- 117 粘度计
- 122 粘度计

- 15 CO₂培养箱
- 18 隔水式恒温培养箱
- 19 光照培养箱/人工气候箱
- 26 恒温恒湿箱
- 31 回旋振荡器
- 33 恒温培养摇床
- 35 恒温振荡器
- 36 大型恒温振荡器
- 37 落地振荡器
- 38 摇瓶机
- 39 叠加式-振荡培养箱
- 43 超低温冰箱
- 45 低温冷藏箱
- 46 液相液氮罐
- 48 干式运输液氮罐
- 49 生物安全柜
- 50 洁净工作台
- 52 干燥箱
- 59 真空干燥箱
- 68 加热循环水槽
- 71 恒温振荡水槽
- 74 油浴锅
- 76 恒温水槽与水浴锅
- 77 药品稳定性试验箱
- 83 步入式药品试验室
- 84 老化试验箱
- 84 热空气消毒箱
- 85 高低温(交变)试验箱
- 87 高低温(交变)湿热试验箱
- 89 紫外耐候试验箱
- 91 氙灯耐候试验箱
- 92 盐雾腐蚀试验箱
- 93 电阻炉
- 96 电阻炉
- 97 旋转蒸发仪
- 100 分液漏斗振荡器
- 101 耐腐蚀隔膜泵
- 102 循环冷却器
- 103 干式冷阱
- 104 磁力搅拌器
- 108 顶置电动搅拌器
- 109 氮吹仪
- 110 离心机
- 110 漩涡混匀仪
- 111 多管漩涡混匀仪
- 112 孵育器/金属浴
- 114 微孔板迷你离心机
- 115 均质分散机
- 117 粘度计
- 122 粘度计

- 31 回旋振荡器
- 33 恒温培养摇床
- 35 恒温振荡器
- 36 大型恒温振荡器
- 37 落地振荡器
- 38 摇瓶机
- 39 叠加式-振荡培养箱
- 43 超低温冰箱
- 45 低温冷藏箱
- 46 液相液氮罐
- 48 干式运输液氮罐
- 49 生物安全柜
- 50 洁净工作台
- 52 干燥箱
- 59 真空干燥箱
- 68 加热循环水槽
- 71 恒温振荡水槽
- 74 油浴锅
- 76 恒温水槽与水浴锅
- 77 药品稳定性试验箱
- 83 步入式药品试验室
- 84 老化试验箱
- 84 热空气消毒箱
- 85 高低温(交变)试验箱
- 87 高低温(交变)湿热试验箱
- 89 紫外耐候试验箱
- 91 氙灯耐候试验箱
- 92 盐雾腐蚀试验箱
- 93 电阻炉
- 96 电阻炉
- 97 旋转蒸发仪
- 100 分液漏斗振荡器
- 101 耐腐蚀隔膜泵
- 102 循环冷却器
- 103 干式冷阱
- 104 磁力搅拌器
- 108 顶置电动搅拌器
- 109 氮吹仪
- 110 离心机
- 110 漩涡混匀仪
- 111 多管漩涡混匀仪
- 112 孵育器/金属浴
- 114 微孔板迷你离心机
- 115 均质分散机
- 117 粘度计
- 122 粘度计

- 46 液相液氮罐
- 48 干式运输液氮罐
- 49 生物安全柜
- 50 洁净工作台
- 52 干燥箱
- 59 真空干燥箱
- 68 加热循环水槽
- 71 恒温振荡水槽
- 74 油浴锅
- 76 恒温水槽与水浴锅
- 77 药品稳定性试验箱
- 83 步入式药品试验室
- 84 老化试验箱
- 84 热空气消毒箱
- 85 高低温(交变)试验箱
- 87 高低温(交变)湿热试验箱
- 89 紫外耐候试验箱
- 91 氙灯耐候试验箱
- 92 盐雾腐蚀试验箱
- 93 电阻炉
- 96 电阻炉
- 97 旋转蒸发仪
- 100 分液漏斗振荡器
- 101 耐腐蚀隔膜泵
- 102 循环冷却器
- 103 干式冷阱
- 104 磁力搅拌器
- 108 顶置电动搅拌器
- 109 氮吹仪
- 110 离心机
- 110 漩涡混匀仪
- 111 多管漩涡混匀仪
- 112 孵育器/金属浴
- 114 微孔板迷你离心机
- 115 均质分散机
- 117 粘度计
- 122 粘度计

- 52 干燥箱
- 59 真空干燥箱
- 68 加热循环水槽
- 71 恒温振荡水槽
- 74 油浴锅
- 76 恒温水槽与水浴锅
- 77 药品稳定性试验箱
- 83 步入式药品试验室
- 84 老化试验箱
- 84 热空气消毒箱
- 85 高低温(交变)试验箱
- 87 高低温(交变)湿热试验箱
- 89 紫外耐候试验箱
- 91 氙灯耐候试验箱
- 92 盐雾腐蚀试验箱
- 93 电阻炉
- 96 电阻炉
- 97 旋转蒸发仪
- 100 分液漏斗振荡器
- 101 耐腐蚀隔膜泵
- 102 循环冷却器
- 103 干式冷阱
- 104 磁力搅拌器
- 108 顶置电动搅拌器
- 109 氮吹仪
- 110 离心机
- 110 漩涡混匀仪
- 111 多管漩涡混匀仪
- 112 孵育器/金属浴
- 114 微孔板迷你离心机
- 115 均质分散机
- 117 粘度计
- 122 粘度计

- 74 油浴锅
- 76 恒温水槽与水浴锅
- 77 药品稳定性试验箱
- 83 步入式药品试验室
- 84 老化试验箱
- 84 热空气消毒箱
- 85 高低温(交变)试验箱
- 87 高低温(交变)湿热试验箱
- 89 紫外耐候试验箱
- 91 氙灯耐候试验箱
- 92 盐雾腐蚀试验箱
- 93 电阻炉
- 96 电阻炉
- 97 旋转蒸发仪
- 100 分液漏斗振荡器
- 101 耐腐蚀隔膜泵
- 102 循环冷却器
- 103 干式冷阱
- 104 磁力搅拌器
- 108 顶置电动搅拌器
- 109 氮吹仪
- 110 离心机
- 110 漩涡混匀仪
- 111 多管漩涡混匀仪
- 112 孵育器/金属浴
- 114 微孔板迷你离心机
- 115 均质分散机
- 117 粘度计
- 122 粘度计

- 85 高低温(交变)试验箱
- 87 高低温(交变)湿热试验箱
- 89 紫外耐候试验箱
- 91 氙灯耐候试验箱
- 92 盐雾腐蚀试验箱
- 93 电阻炉
- 96 电阻炉
- 97 旋转蒸发仪
- 100 分液漏斗振荡器
- 101 耐腐蚀隔膜泵
- 102 循环冷却器
- 103 干式冷阱
- 104 磁力搅拌器
- 108 顶置电动搅拌器
- 109 氮吹仪
- 110 离心机
- 110 漩涡混匀仪
- 111 多管漩涡混匀仪
- 112 孵育器/金属浴
- 114 微孔板迷你离心机
- 115 均质分散机
- 117 粘度计
- 122 粘度计

- 91 氙灯耐候试验箱
- 92 盐雾腐蚀试验箱
- 93 电阻炉
- 96 电阻炉
- 97 旋转蒸发仪
- 100 分液漏斗振荡器
- 101 耐腐蚀隔膜泵
- 102 循环冷却器
- 103 干式冷阱
- 104 磁力搅拌器
- 108 顶置电动搅拌器
- 109 氮吹仪
- 110 离心机
- 110 漩涡混匀仪
- 111 多管漩涡混匀仪
- 112 孵育器/金属浴
- 114 微孔板迷你离心机
- 115 均质分散机
- 117 粘度计
- 122 粘度计

- 103 干式冷阱
- 104 磁力搅拌器
- 108 顶置电动搅拌器
- 109 氮吹仪
- 110 离心机
- 110 漩涡混匀仪
- 111 多管漩涡混匀仪
- 112 孵育器/金属浴
- 114 微孔板迷你离心机
- 115 均质分散机
- 117 粘度计
- 122 粘度计

- 111 多管漩涡混匀仪
- 112 孵育器/金属浴
- 114 微孔板迷你离心机
- 115 均质分散机
- 117 粘度计
- 122 粘度计

- 114 微孔板迷你离心机
- 115 均质分散机
- 117 粘度计
- 122 粘度计

- 117 粘度计
- 122 粘度计

LED光源光照培养箱—智能化可编程 LED光源人工气候箱

用途概述

LED光照培养箱/人工气候箱适用于植物的生长和组织培养，种子发芽、育苗、微生物的培养试验；昆虫小动物的饲养；水质监测的BOD测定；药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等，以及其他用途的光照，恒温、恒湿的专用试验设备。

产品特点

人性化设计

- 全新无氟设计，绿色环保使你始终走在健康生活的前沿；
- 人性化触摸按键，菜单式操作，直观明了，多个参数可同屏显示；
- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，无需工具可拆卸箱体内部隔板或隔条，便于工作室消毒与清洗；
- 风道设计，可避免试验过程中由于循环风速过快而吹倒植物幼苗，影响植物生长；
- 大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作；
- 可设定30组程序，每组设置时间范围1~99小时59分（标配）；
- 可增配：带CO₂进气口（促进植物生长）及CO₂控制器；（红外线CO₂传感器）

LED光源有什么优点？

- 无热干扰：LED光束不产生热量，并且提取了有利于植物生长的有用光；
- 节能环保：LED光源能耗极低，比普通光源低80%左右，因此耗电量极低；
- 体积小：LED光源具有小型化、平面化、可设计性强等特点；
- 稳定、寿命长：提供精确、稳定的光照，使用寿命可达30,000小时以上,光电转换效率高；
- 响应速度快：可选配顶置式平面光照,确保培养物能充分平均的吸收光源,保持实验结果的一致性；

智能化控制技术

- 可模拟大自然白天及黑夜的温度变化，也可模拟大自然多方向性光源；
- 用户设定的参数可以在停电的情况下自动储存，并在通电后运行原定程序；
- LED光照培养箱/人工气候箱配备各种适合植物生长的LED光源，光谱结构与已有文献数据相符；

智能化多段可编程控制

- 程序控制温度、湿度、光照度、时间，使复杂的试验过程简化，真正实现自动控制和运行；

连续运行技术

- 两套进口品牌压缩机自动轮流切换，确保植物培育长时间运行不发生故障，突破现有光照培养箱/人工气候箱无法长时间运行的缺陷；

安全功能

- 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外；（标配）
- 当光照箱或人工气候箱发生故障时，液晶显示屏出现故障信息，运行故障一目了然；
- 温度偏高和超温报警。

CO₂浓度监测与控制（选配）（CO₂控制范围：I：0-5000ppm，II：0-20%，二选一）


- 对于植物光照培养，红外传感器是个理想的选择，因为红外传感器的CO₂浓度的恢复是不受温度和湿度的影响，对CO₂浓度的变化，红外传感器几秒内就可做出响应，控制精度准确可靠；



此图为300L和450L的结构
其余型号为隔板式光照结构

高品质LED植物生长灯珠

LED光谱图

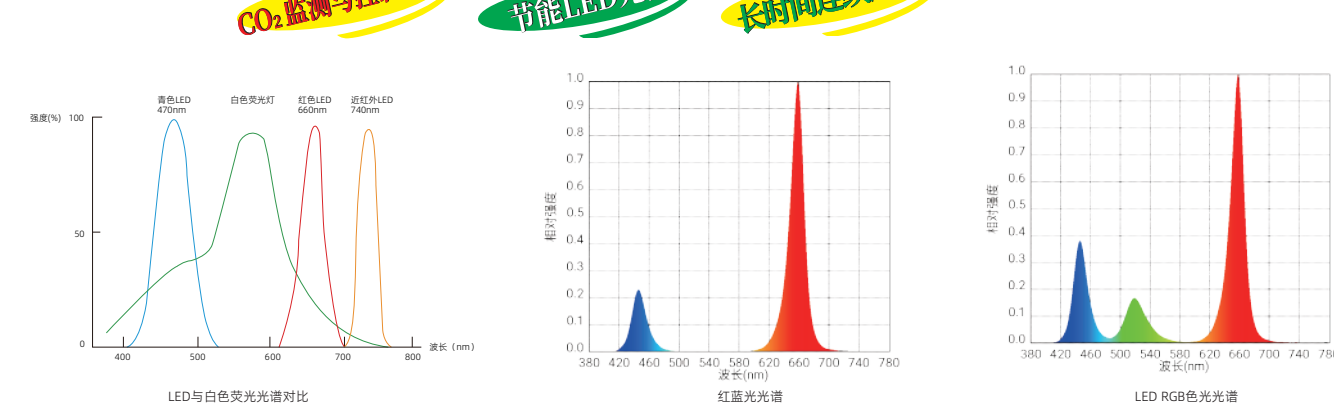

技术参数

型号	MGC-100BP-2L MGC-250BP-2L	MGC-100HP-2L MGC-250HP-2L	MGC-350BP-2L MGC-450BP-2L	MGC-350HP-2L MGC-450HP-2L	MGC-800BP-2L MGC-1000BP-2L	MGC-800HP-2L MGC-1000HP-2L	MGC-1500BP-2L	MGC-1500HP-2L
技术指标								
容积	150L 250L		300L 450L		800L 1000L		1500L	
控温范围	有光照 10~50℃ 无光照 0~50℃							
温度分辨率	0.1℃							
温度波动度	±1℃							
控湿范围	—	50~90%RH	—	50~90%RH	—	50~90%RH	—	50~90%RH
湿度偏差	—	±5~7%RH	—	±5~7%RH	—	±5~7%RH	—	±5~7%RH
光照强度	0~18000LX 六级可调		0~28000LX 0~35000LX 六级可调		0~42000LX 0~50000LX 六级可调		0~55000LX 六级可调	
光源 / 光照方式	LED 门上光照		LED/ 三面光照		日光灯隔板式光照			
程控功能	温度、湿度、光照度单独设定，可设定 30 段程序每段设置时间范围 1~99 小时 59 分							
输入功率	1500W 1750W		1700W 2000W	1700W 2050W	2700W 2800W	2800W 2900W	4300W	4500W
电源	AC220V 50HZ							
工作环境温度	+5~30℃							
连续运转时间	可长时间连续运转（两套进口原装全封闭压缩机自动轮流切换）							
内胆尺寸（mm） W×D×H	550×400×670 600×610×830		520×550×1140 700×550×1140		800×590×1650 1050×590×1650		1550×590×1650	
外形尺寸（mm） W×D×H	690×800×1410 760×815×1550		830×850×1850 950×850×1850		1475×890×1780 1410×890×1950		1570×1475×2050	
载物托架（标配）	3 块							
价格	RMB22900 RMB27900	RMB24900 RMB31900	RMB37900 RMB43900	RMB40900 RMB46900	RMB76900 RMB103000	RMB88900 RMB139000	RMB165000	RMB185000

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、RS485/232接口和通讯软件..... ¥ 600元
- 2、嵌入式打印机..... ¥ 2500元
- 3、U盘数据存储..... ¥ 1000元
- 4、无线报警系统（短信报警系统）..... ¥ 2500元
- 5、CO₂进气口（促进植物生长）..... ¥ 2000元
- 6、CO₂控制器（红外线CO₂传感器）..... ¥ 15000元
- 7、光照控制系统..... ¥ 9000元

注：U盘、RS485/232、打印机三选一

数据控制系统（选配）

- RS485或USB接口及软件。
- 实现数据记录、数据通讯、图形动态显示、故障分析。
- 选配打印机系统进行数据记录，符合GMP标准。

注：1、800L/1000L/1500L光照箱和气候箱，接到订单后，交货期为30天
2、无线报警系统和光照控制系统，接到订单后，交货期为30天
3、选配CO₂控制器，交货期为30天

- 01 生化/霉菌培养箱
- 04 低温培养箱
- 06 多箱体生化/霉菌培养箱
- 07 生物安全低温培养箱
- 08 半导体制冷低温培养箱
- 09 生物安全培养箱
- 10 恒温培养箱
- 13 隔水式恒温培养箱
- 14 多箱体恒温/微生物培养箱
- 15 CO₂培养箱
- 18 隔水式恒温培养箱
- 19 光照培养箱/人工气候箱
- 26 恒温恒湿箱
- 31 回旋振荡器
- 33 恒温培养摇床
- 35 恒温振荡器
- 36 大型恒温振荡器
- 37 落地振荡器
- 38 摇瓶机
- 39 叠加式-振荡培养箱
- 42 超低温冰箱
- 43 低温冷藏箱
- 46 液相液氮罐
- 48 干式运输液氮罐
- 49 生物安全柜
- 50 洁净工作台
- 52 干燥箱
- 59 真空干燥箱
- 68 加热循环水槽
- 71 恒温振荡水槽
- 74 油浴锅
- 76 恒温水槽与水浴锅
- 77 药品稳定性试验箱
- 83 步入式药品试验室
- 84 老化试验箱
- 84 热空气消毒箱
- 85 高低温(交变)试验箱
- 87 高低温(交变)湿热试验箱
- 89 紫外耐候试验箱
- 90 紫外耐候试验箱
- 91 氙灯耐候试验箱
- 92 盐雾腐蚀试验箱
- 93 电阻炉
- 96 电阻炉
- 97 旋转蒸发仪
- 100 分液漏斗振荡器
- 101 耐腐蚀隔膜泵
- 102 循环冷却器
- 103 干式冷阱
- 104 磁力搅拌器
- 108 顶置电动搅拌器
- 109 氮吹仪
- 110 离心机
- 110 漩涡混匀仪
- 111 多管漩涡混匀仪
- 112 孵育器/金属浴
- 114 微孔板迷你离心机
- 115 均质分散机
- 117 粘度计
- 122 粘度计

- 15 CO₂培养箱
- 18 隔水式恒温培养箱
- 19 光照培养箱/人工气候箱
- 26 恒温恒湿箱
- 31 回旋振荡器
- 33 恒温培养摇床
- 35 恒温振荡器
- 36 大型恒温振荡器
- 37 落地振荡器
- 38 摇瓶机
- 39 叠加式-振荡培养箱
- 42 超低温冰箱
- 43 低温冷藏箱
- 46 液相液氮罐
- 48 干式运输液氮罐
- 49 生物安全柜
- 50 洁净工作台
- 52 干燥箱
- 59 真空干燥箱
- 68 加热循环水槽
- 71 恒温振荡水槽
- 74 油浴锅
- 76 恒温水槽与水浴锅
- 77 药品稳定性试验箱
- 83 步入式药品试验室
- 84 老化试验箱
- 84 热空气消毒箱
- 85 高低温(交变)试验箱
- 87 高低温(交变)湿热试验箱
- 89 紫外耐候试验箱
- 90 紫外耐候试验箱
- 91 氙灯耐候试验箱
- 92 盐雾腐蚀试验箱
- 93 电阻炉
- 96 电阻炉
- 97 旋转蒸发仪
- 100 分液漏斗振荡器
- 101 耐腐蚀隔膜泵
- 102 循环冷却器
- 103 干式冷阱
- 104 磁力搅拌器
- 108 顶置电动搅拌器
- 109 氮吹仪
- 110 离心机
- 110 漩涡混匀仪
- 111 多管漩涡混匀仪
- 112 孵育器/金属浴
- 114 微孔板迷你离心机
- 115 均质分散机
- 117 粘度计
- 122 粘度计

- 31 回旋振荡器
- 33 恒温培养摇床
- 35 恒温振荡器
- 36 大型恒温振荡器
- 37 落地振荡器
- 38 摇瓶机
- 39 叠加式-振荡培养箱
- 42 超低温冰箱
- 43 低温冷藏箱
- 46 液相液氮罐
- 48 干式运输液氮罐
- 49 生物安全柜
- 50 洁净工作台
- 52 干燥箱
- 59 真空干燥箱
- 68 加热循环水槽
- 71 恒温振荡水槽
- 74 油浴锅
- 76 恒温水槽与水浴锅
- 77 药品稳定性试验箱
- 83 步入式药品试验室
- 84 老化试验箱
- 84 热空气消毒箱
- 85 高低温(交变)试验箱
- 87 高低温(交变)湿热试验箱
- 89 紫外耐候试验箱
- 90 紫外耐候试验箱
- 91 氙灯耐候试验箱
- 92 盐雾腐蚀试验箱
- 93 电阻炉
- 96 电阻炉
- 97 旋转蒸发仪
- 100 分液漏斗振荡器
- 101 耐腐蚀隔膜泵
- 102 循环冷却器
- 103 干式冷阱
- 104 磁力搅拌器
- 108 顶置电动搅拌器
- 109 氮吹仪
- 110 离心机
- 110 漩涡混匀仪
- 111 多管漩涡混匀仪
- 112 孵育器/金属浴
- 114 微孔板迷你离心机
- 115 均质分散机
- 117 粘度计
- 122 粘度计

- 46 液相液氮罐
- 48 干式运输液氮罐
- 49 生物安全柜
- 50 洁净工作台
- 52 干燥箱
- 59 真空干燥箱
- 68 加热循环水槽
- 71 恒温振荡水槽
- 74 油浴锅
- 76 恒温水槽与水浴锅
- 77 药品稳定性试验箱
- 83 步入式药品试验室
- 84 老化试验箱
- 84 热空气消毒箱
- 85 高低温(交变)试验箱
- 87 高低温(交变)湿热试验箱
- 89 紫外耐候试验箱
- 90 紫外耐候试验箱
- 91 氙灯耐候试验箱
- 92 盐雾腐蚀试验箱
- 93 电阻炉
- 96 电阻炉
- 97 旋转蒸发仪
- 100 分液漏斗振荡器
- 101 耐腐蚀隔膜泵
- 102 循环冷却器
- 103 干式冷阱
- 104 磁力搅拌器
- 108 顶置电动搅拌器
- 109 氮吹仪
- 110 离心机
- 110 漩涡混匀仪
- 111 多管漩涡混匀仪
- 112 孵育器/金属浴
- 114 微孔板迷你离心机
- 115 均质分散机
- 117 粘度计
- 122 粘度计

- 52 干燥箱
- 59 真空干燥箱
- 68 加热循环水槽
- 71 恒温振荡水槽
- 74 油浴锅
- 76 恒温水槽与水浴锅
- 77 药品稳定性试验箱
- 83 步入式药品试验室
- 84 老化试验箱
- 84 热空气消毒箱
- 85 高低温(交变)试验箱
- 87 高低温(交变)湿热试验箱
- 89 紫外耐候试验箱
- 90 紫外耐候试验箱
- 91 氙灯耐候试验箱
- 92 盐雾腐蚀试验箱
- 93 电阻炉
- 96 电阻炉
- 97 旋转蒸发仪
- 100 分液漏斗振荡器
- 101 耐腐蚀隔膜泵
- 102 循环冷却器
- 103 干式冷阱
- 104 磁力搅拌器
- 108 顶置电动搅拌器
- 109 氮吹仪
- 110 离心机
- 110 漩涡混匀仪
- 111 多管漩涡混匀仪
- 112 孵育器/金属浴
- 114 微孔板迷你离心机
- 115 均质分散机
- 117 粘度计
- 122 粘度计

- 74 油浴锅
- 76 恒温水槽与水浴锅
- 77 药品稳定性试验箱
- 83 步入式药品试验室
- 84 老化试验箱
- 84 热空气消毒箱
- 85 高低温(交变)试验箱
- 87 高低温(交变)湿热试验箱
- 89 紫外耐候试验箱
- 90 紫外耐候试验箱
- 91 氙灯耐候试验箱
- 92 盐雾腐蚀试验箱</



24

光照培养箱 ◆ 人工气候箱(强光)

顺应世界环保潮流，进口品牌压缩机和循环风机，效率高、能耗低，不仅促进节能，而且使用寿命长，可将噪音降至更低限度，与传统低温设备相比，降温时间节省40%以上。

用途概述

广泛应用于微生物组织细胞培养，种子发芽，育苗试验，植物栽培以及昆虫、小动物饲养等，能准确模拟不同环境气候条件。

产品特点

- 微电脑程序控制温度、湿度、光照度，可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化，也可选择生长环境充足稳定的光源；
- 大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作；
- 进口品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行，环保型制冷剂，效率高，低能耗，促进节能；
- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧型过渡，隔板支配可以自由装卸，便于箱内清洗工作；
- 可设定30组程序，每组设置时间范围1-99小时（选配）；
- 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外；（标配）
- 可配RS485接口和电脑连接，通过电脑实时监控实验过程或记录实验数据；（选配）
- 可增配：带CO₂进气口（促进植物生长）及CO₂控制器；（红外线CO₂传感器）

选构件:(增加选构件交货期7天)

- | | |
|---|----------|
| 1、RS485/232接口和通讯软件 | ¥ 600元 |
| 2、嵌入式打印机 | ¥ 2500元 |
| 3、U盘数据储存 | ¥ 1000元 |
| 4、无线报警系统（短信报警系统） | ¥ 2500元 |
| 5、CO ₂ 进气口（促进植物生长） | ¥ 2000元 |
| 6、CO ₂ 控制器（红外线CO ₂ 传感器） | ¥ 15000元 |
| 7、光照度检测控制系统 | ¥ 9000元 |

注：U盘、RS485/232、打印机三选一

注：1、选配RS485接口和通讯软件，交货期为7天

- 2、选配CO₂进气口，交货期为7天
- 3、选配CO₂控制器，交货期为30天
- 4、CO₂控制范围： I：0-5000ppm，II：0-20%(二选一)

技术参数

技术指标\型号	光照培养箱						人工气候箱		
	MGC-100 MGC-100P	MGC-250 MGC-250P	MGC-300A	MGC-300B MGC-350BP	MGC-400B MGC-450BP	MGC-800B MGC-850BP	MGC-300H MGC-350HP	MGC-400H MGC-450HP	MGC-800H MGC-850HP
容积	150L	250L	300L	300L	450L	800L	300L	450L	800L
控温范围	无光照：4～50℃ 有光照：10～50℃								
温度分辨率	0.1℃								
温度波动度	±1℃								
控湿范围	—						50~90%RH		
湿度偏差	—						±5～7%RH		
光照强度	0-12000LX 六级可调		0-15000LX 六级可调	0-20000LX 六级可调	0-25000LX 六级可调	0-30000LX 六级可调	0-20000LX 六级可调	0-25000LX 六级可调	0-30000LX 六级可调
光照方式	单面光照		两面光照	三面光照		隔板式光照 (两层)	三面光照		隔板式光照 (两层)
输入功率	1500W	1750W	1200W	1450W	2000W	2700W	1500W	2050W	2800W
电源	AC220V 50HZ								
工作环境温度	+5～30℃								
连续工作时间	不低于180h								
内胆尺寸(mm) W×D×H	550×400×670	600×610×830	520×550×1140		700×550×1140	800×590×1650	520×550×1140	700×550×1140	965×580×1430
外形尺寸(mm) W×D×H	690×800×1410	760×815×1550	830×850×1850		950×850×1850	1475×890×1780	830×850×1850	950×850×1850	1475×890×1780
载物托架 (标配)	3块								
价格	RMB17800 RMB19800	RMB19900 RMB21900	RMB21700	RMB24900 RMB27900	RMB29900 RMB31900	RMB61900 RMB67900	RMB28600 RMB30600	RMB33900 RMB35900	RMB71900 RMB78900

液晶屏



MGC-100
MGC-250



人工气候箱
MGC-300H
MGC-350HP
MGC-400H
光照培养箱
MGC-300A
MGC-300B
MGC-400B

普及型



恒温恒湿箱 专业型

用途概述

恒温恒湿箱有着精确的温度和湿度控制系统，它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种模拟环境条件，可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。

产品特点

- 全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前面；
- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调；
- 微电脑温度湿度控制器，采用TMHM平衡式调温调湿方法，运行稳定，控温控湿精确并安全可靠；
- 压缩机等关键零部件均采用进口产品；
- 选用进口湿度传感器；
- 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外；
- 可配打印机，能记录温湿度参数的变化状况；（Ⅰ型选配）
- 可配RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温湿度参数的变化状况；（选配）
- 箱体左侧有一直径25mm或50mm的测试孔，便于实验操作与测试；

技术参数

技术指标	型号	恒温恒湿箱（专业型）				
	LHS-80HC- I LHS-80HC- II	LHS-150HC- I LHS-150HC- II	LHS-250HC- I LHS-250HC- II	LHS-500HC- I LHS-500HC- II	LHS-800HC- I LHS-800HC- II	
控温范围	I: -5 ~ 80℃ II: -10 ~ 70℃					
温度分辨率	0.1℃					
温度波动度	高温：±0.5℃ 低温：±1℃					
控湿范围	I: 40 ~ 85%RH II: 40 ~ 95%RH					
湿度偏差	±3%RH					
输入功率	2000W	2100W	2300W	3850W	8050W	
工作环境温度	+5 ~ 35℃					
电源电压	AC220V 50HZ				AC380V 50HZ	
工作室尺寸(mm) W×D×H	400×400×500	550×405×670	600×500×830	670×720×1020	700×860×1250	
外形尺寸(mm) W×D×H	550×790×1080	690×800×1430	740×900×1580	850×1100×1930	860×1340×1995	
载物托架(标配)	2块	3块		4块	4块	
价格	RMB23900 RMB28900	RMB30900 RMB34900	RMB34900 RMB40900	RMB50900 RMB57900	RMB67900 RMB75900	
备注	I型打印机选配 / II型已配备打印机					

注1: 80/150/250I 型恒温恒湿箱, 采用干湿球;
注2: 500/800I 型恒温恒湿箱, 采用进口传感器;
注3: II 型 恒温恒湿箱, 采用进口传感器;

选购件:(增加选购件交货期7天)

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1、RS232/485接口及通讯软件 | ¥ 600元 |
| 2、液晶程序控制器 | ¥ 4500元 |
| 3、无线报警系统（短信报警系统） | ¥ 2500元 |
| 4、嵌入式打印机..... | ¥ 2500元 |

注：RS485/232、打印机二选一



①RS232/485通讯接口



④嵌入式打印机



生产/霉菌培养基	0
低温培养基	0
多相体生产/霉菌培养基	0
生物安全低温培养基	0
半自动制备低温培养基	0
生物安全培养基	0
恒温培养基	1
隔水式恒温培养基	1
多相体恒温/慢速培养基	1
CO ₂ 培养基	1
光照培养基/人工气候箱	1
恒温恒湿箱	2
回旋振荡器	3
恒温培养摇床	3
恒温振荡器	3
大型恒温振荡器	3
落地振荡器	3
摇瓶机	3
叠加式—振荡器培养箱	3
超低温冰箱	4
低温冷藏箱	4
液相液氮罐	4
干式液氮挥发罐	4
生物安全柜	4
洁净工作台	4
干燥箱	5
真空干燥箱	5
加热循环水	6
恒温振荡水浴	7
油浴锅	7
恒温水槽与水浴锅	7
药品稳定性试验箱	7
步入式药品试验箱	8
老化试验箱	8
热空气消毒箱	8
高低温(交变)试验箱	8
高低温(交变)湿热试验箱	8
紫外耐候气候试验箱	8
氙灯耐候气候试验箱	9
盐雾腐蚀性试验箱	9
电阻炉	9
旋转蒸发器	9
分液漏斗—振荡器	9
耐腐蚀隔膜泵	9
循环冷却器	10
干式冷阱	10
磁力搅拌器	10
顶置电动搅拌器	10
氮吹仪	10
离心机	11
漩清混匀仪	11
多管滴漏混匀仪	11
多管滴漏/金属浴	11

恒温恒湿箱



实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴

持之一恒

我们只制造放心

www.yihengchina.com

www.yihengyiqi.com



恒温恒湿箱


简易型

产品特点

- 全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前沿；
- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调；
- 选用湿度传感器，微电脑温度湿度控制器，控温控湿精确可靠；
- 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外；（选配）
- 可配RS485接口，用于连接计算机，能记录温湿度参数的变化状况，但不能连接打印机；（选配）
- 箱体左侧有一直径25mm的测试孔，便于实验操作与测试；

技术参数

技术指标	型号	恒温恒湿箱（简易型）	
		LHS-150SC	LHS-250SC
控温范围		有加湿15~45℃，无加湿10~45℃	
温度分辨率		0.1℃	
温度波动度		高温：±1℃ 低温：±2℃	
控湿范围		60~85%RH	
湿度偏差		±5~8%RH	
输入功率		550W	700W
工作环境温度		+5~35℃	
连续工作时间		不低于180小时	
电源电压		AC220V 50HZ	
工作室尺寸(mm) W×D×H		550×400×670	600×500×830
外形尺寸(mm) W×D×H		690×800×1410	750×900×1580
载物托架(标配)		3块	
价格		RMB18900	RMB22900
备注		此型号为简易型，湿度波动大，无法长时间运行	

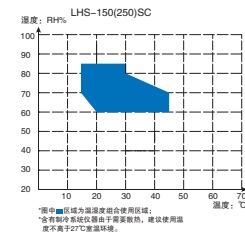

恒温恒湿箱

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、独立限温控制器..... ¥ 500元
- 2、嵌入式打印机..... ¥ 2500元
- 3、无线报警系统（短信报警系统）..... ¥ 2500元
- 4、RS232/485接口及通讯软件..... ¥ 600元

恒温恒湿箱

普及型

无氟环保

用途概述

恒温恒湿箱有着精确的温度和湿度控制系统，它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种模拟环境条件。可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。

产品特点

- 全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前面；
- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调；
- 微电脑温湿度控制器，采用TMHM平衡式调温调湿方法，运行稳定，控温控湿精确并安全可靠。控制器、压缩机等关键零部件均采用进口产品；
- 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外；
- 箱体左侧有一直径25mm测试孔，便于实验操作与测量温度；

技术参数



型号	控温范围	温度 分辨率	温度 波动度	控湿范围	湿度 偏差	输入 功率	工作环境 温度	电源 电压	工作室尺寸 W×D×H(mm)	外形尺寸 W×D×H(mm)	载物 托架 (标配)	价格
LHS-50CH LHS-100CH	RT+10~85℃	0.1℃	±1.0℃	80~95%RH	±3%RH	1450W 1650W	+5 ~ 30℃	AC220V 50HZ	350×300×500 500×400×550	720×620×725 650×800×1310	2块	RMB15600 RMB18900
LHS-50CL	L: -10~85℃ A: -20~85℃ B: -40~85℃			45~95%RH		1700W 1900W 2300W 7050W		AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ	350×300×500 500×400×550 500×400×600	720×620×725 650×800×1310 700×1040×1750		RMB22900 RMB25900 RMB36500 RMB48200
LHS-100CL												
LHS-100CA												
LHS-100CB												

注：LHS-100CB 接到订单后，交货期为7天。LHS-50CH、LHS-100CH无制冷功能。

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、RS485接口及通讯软件..... ¥ 600元
- 2、液晶程序控制器..... ¥ 4500元
- 3、无线报警系统（短信报警系统）..... ¥ 2500元
- 4、嵌入式打印机..... ¥ 2500元

注：RS485/232、打印机二选一

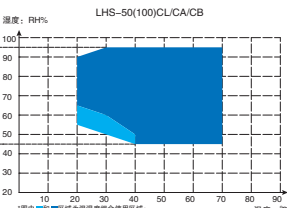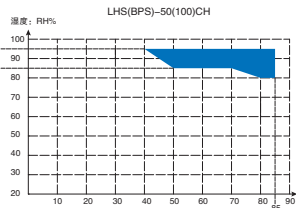

恒温恒湿箱

恒温恒湿箱

可程式彩色触摸屏

高档型

新一代恒温恒湿箱，集公司多年在箱体设计方面成功经验，本着人性化设计理念，从客户的实际需求出发，在每一细节上尽力满足客户要求，为客户提供高品质的恒温恒湿系列产品。

产品特点

人性化设计

- 全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前面；
- 多段可编程PID控制器，采用TMHM平衡式调温调湿方法，控温控湿精确波动小；
- 采用进口304镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，便于箱内的清洗工作；

品质保证

- 用户设定的参数可以在突然停电的情况下自动储存，并在通电后运行原设定程序；
- 进口品牌压缩机和循环风机，环保制冷剂效率高，能耗低，促进节能；
- 风道循环系统，保证工作室温湿度均匀，直径Φ25mm测试孔，便于操作与测试；

安全功能

- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断运行，并声光报警提示操作者保证实验安全运行不发生意外；
- 温度偏高、偏低和超温报警，压缩机过热、过流、过载保护，风机过热保护，缺水保护等；

方便的数据处理（选配）

- 可连接打印机或485通讯接口，用电脑显示，并打印温湿度和时间曲线，为试验过程数据储存与回放提供有力保证；

可程式触摸屏控制器

- 采用大屏幕触摸式荧幕画面，荧幕操作简单，程式编辑容易；
- 控制器操作界面设中英文可供选择，即时运转曲线图可由屏幕显示；
- 具有100组程式1000段999循环步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分；
- 资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机；
- 具有P.I.D自动演算功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定；
- 具有RS-232或RS-485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行开关机等功能；（选配）

技术参数

型号	控温范围	温度分辨率	温度波动度	控湿范围	湿度偏差	输入功率	工作环境温度	电源电压	工作室尺寸 W×D×H(mm)	外形尺寸 W×D×H(mm)	载物托架 (标配)	价格
BPS-50CH BPS-100CH BPS-250CH	RT+10～85℃	0.1℃	±1.0℃	80～95%RH	±3%RH	1450W 1650W 2050W	+5～30℃	AC220V 50HZ	350×300×500 500×400×550 600×500×820	720×620×725 650×800×1310 750×900×1580	2块	RMB21900 RMB27900 RMB39500
BPS-50CL	L: -10～100℃ A: -20～100℃ B: -40～100℃		高温: ±0.5℃ 低温: ±1.0℃	35～95%RH		1700W		AC220V 50HZ	350×300×500	720×620×725		RMB30300
BPS-50CA						2250W			400×380×450	650×1040×1650		RMB35500
BPS-50CB						2650W		AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ		500×400×550		650×800×1310
BPS-100CL						1900W		500×400×600	700×1040×1750	RMB35900		
BPS-100CA						2300W					600×500×820	750×900×1580
BPS-100CB						7050W		AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ	600×500×600	700×1040×1750		
BPS-250CL						2300W		AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ	600×500×820	750×900×1580	3块	RMB53900 RMB61900 RMB73900
BPS-250CA						2700W						
BPS-250CB						7100W						
BPS-500CL						3850W		AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ	670×720×1020	850×1100×1930		RMB57900 RMB79900 RMB90900
BPS-500CA						4150W						
BPS-500CB						7850W						
BPS-800CL						8050W		AC380V 50HZ	700×860×1250	860×1340×1995		RMB78900 RMB94900
BPS-800CA						8050W						
BPS-1000CL						8050W						
BPS-1000CA						8050W						

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、嵌入式打印机..... ¥ 2500元
- 2、RS485接口及通讯软件..... ¥ 600元
- 3、无线报警系统（短信报警系统）..... ¥ 2500元

注：RS485/232、打印机二选一





①嵌入式打印机




②RS485通讯接口

- 注：1、BPS-50CH、BPS-100CH、BPS-250CH无制冷功能。
- 2、BPS-100CB、BPS-250CB 接到订单后，交货期为15天。
- 3、BPS-500/800/1000系列，接到订单后，交货期为30天。

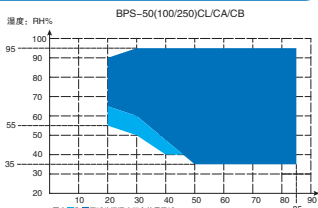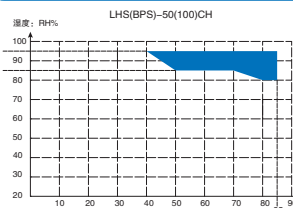

恒温恒湿箱

恒温恒湿箱

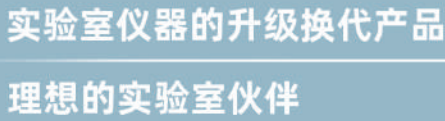

我们只制造放心

www.yihengyiqi.com



生化/霉菌培养箱	01
低温培养箱	05
多通道生化/霉菌培养箱	06
生物安全低温培养箱	07
半导体制冷低温培养箱	08
生物安全培养箱	09
恒温培养箱	10
隔水式恒温培养箱	13
多通道培养/微生物培养箱	14
CO ₂ 培养箱	15
	18
光照培养箱/人工气候箱	19
恒温恒湿培养箱	26
回旋振荡器	31
恒温培养摇床	33
恒温振荡器	35
大型恒温振荡器	36
落地振荡器	37
摇瓶机	38
叠式振荡培养箱	39
	42
超低温冰箱	43
低温冷藏箱	45
液相液氮罐	46
气相液氮罐	48
生物安全柜	49
洁净工作台	50
干燥箱	52
真空干燥箱	59
加热振荡环境	66
恒温振荡水浴	71
油浴锅	74
恒温水槽与水浴锅	76
药品稳定性试验箱	77
步入式试验箱	83
老化试验箱	84
热冲击消毒箱	84
高低温交变试验箱	85
高低温交变湿热试验箱	87
紫外气候试验箱	89
	90
氙灯气候试验箱	91
盐雾腐蚀性试验箱	92
电阻炉	93
	96
旋转蒸发器	97
分液漏斗振荡器	100
耐腐蚀腐蚀架	101
循环冷却器	101
干式冷却器	103
磁力搅拌器	104
顶置电动搅拌机	108
氮仪	109
离心机	110
漩涡混合仪	110
多管漩涡混匀仪	111
育卵器/金属浴	112
微孔板迷你离心机	114
均质分散机	115
粘度计	117
	122

高速回旋振荡器 新产品



新款高速回旋振荡器具有承载力强、转速高等性能，这些性能加之令人满意的表现和长时间的可靠运行，使高速回旋振荡器成为您可靠的选择。

用途概述

广泛应用于振荡频率有较高要求的细菌培养、发酵、杂交、生物化学反应及酶和组织研究等。

产品特点

- 采用微电脑控制频率和时间，内置断电保护功能，可在电源正常供电后自动恢复运转。大屏液晶显示屏，可同时频率和时间，菜单式操作界面，简单易懂。锁定式操作模式，防止误操作；
- 无刷直流电机起动力矩大，宽调速、恒力矩和免保养；
- 用户可自行调节电机起动力矩，避免由于负载过大造成仪器无法运转。当振荡过于剧烈时，仪器会自动停止运行，启动和减速平稳；
- 多种专有摇架和夹具可供选择，摇架和夹具更换非常简便，大大提高了工作效率；
- 多段编程功能，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制和运行；（选配）

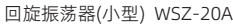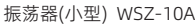

◆ 托盘标配

标配烧瓶固定夹，采用优质不锈钢制作，方便拆卸、固定，可放置各种烧瓶。
(可选配万能弹簧夹或托盘)

技术参数


选购件:(增加选购件交货期7天)

1、多段可编程控制器.....	¥ 1500元
2、RS485接口和通讯软件.....	¥ 600元

技术参数

型号 技术参数	WSZ-15A		WSZ-25A	WSZ-35A
控制器	液晶控制器			
振荡频率	40~500rpm			
振荡精度	±1			
振幅	4mm	5mm	5mm	
允许承重(含夹具)	2Kg	4Kg	10Kg	
托盘尺寸 W×D (mm)	250×250	350×350	450×450	
出厂配置 (烧瓶固定夹数量)	250mL×5只	250mL×13只	250mL×18只	
定时范围	0~99小时59分			
外部尺寸W×D×H (mm)	290×375×110	390×495×125	490×605×137	
输入功率	25W	60W		
电源	100-240VAC 50/60Hz			
价格	RMB5870	RMB6710	RMB7979	

- 1、多段可编程控制器..... ¥1500元
- 2、RS485接口和通讯软件..... ¥600元

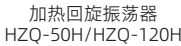

高速回旋振荡器

恒温培养摇床

恒温培养摇床，集公司十多年设计和制造经验，引进消化国外技术，以用户的需求为导向，不断技术创新，广泛应用于对温度和振荡频率有较高要求的细胞培养、发酵、杂交、生物化学和细胞组织的研究等，可对微生物细胞与各类菌种运动、静态的培养。

产品特点

人性化设计

- 集培养箱、振荡器于一体，占地小；
- 大屏幕液晶显示屏，能连续、精确、实时显示温度以及转速和工作时间，并且菜单式操作界面，简单易懂；
- 顺应世界环保潮流，全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前沿；
- 大观察视窗，箱体内胆及振动台面均采用不锈钢材料，便于清洗；

品质保证

- 采用微电脑控制温度和振荡频率，带有定时功能；内置断电保护功能，可在电源正常供电后自动恢复运转；
- 压缩机和循环风扇等关键零部件均采用品牌产品，环保无氟制冷剂；

连续运行保证

- 低散热无刷直流电机，启动转矩大，调速宽、免保养、突破现有国产摇床无法长时间连续运行的缺陷；

安全功能

- 设有门开关，箱门开启时，微风循环、加热和摇床自动停止，无温度过冲之弊；
- 控制转速电路，确保摇床平稳启动，并能防止液体溅出而造成仪器损坏；
- 独立限温报警系统，超过限制温度后自动切断加热，保证安全运行不发生意外；
- 循环风扇速度大小自动控制，可避免试验过程中，由于循环风扇过快而造成的样品挥发；
- 可配RS-485接口和USB数据转移接口（U盘），通过连接电脑监测温度、转速、时间和报警；（选配）

技术参数

技术指标\型号	THZ-103B	THZ-100	THZ-100B	THZ-300	THZ-300C
电源	AC220V 50HZ				
振荡频率	40~250 rpm	40~300 rpm			
振幅	20mm				
控制器	液晶控制器				
控温范围	RT+5 ~ 65℃				4 ~ 65℃ (环境温度降20℃)
温度分辨率	0.1℃				
输入功率	450W	650W	650W	1000W	1300W
标准配置	万能弹簧夹				
托盘尺寸W×D(mm)	280×270	350×350	370×340	450×450	
外形尺寸W×D×H(mm)	390×590×370	490×690×450		590×825×550	590×975×550
内部高度	195	265	265	330	330
定时范围	0 ~ 5999min				
价格	RMB9990	RMB11900	RMB15500	RMB18900	RMB22900

最多可放置三角烧瓶夹数量：(单层)

器皿规格		型号	WSZ-10A WSZ-20A	WSZ-50A HZQ-50H	WSZ-100A	WSZ-100B	WSZ-200A	THZ-103B	THZ-100 THZ-100B	THZ-300 THZ-300C
三角烧瓶 (只)	50(ml)	16	16	29	36	49	16	36	49	
	100(ml)	9	12	18	23	36	9	23	36	
	250(ml)	8	8	11	13	18	8	13	18	
	500(ml)	4	4	7	8	16	4	8	16	
	1000(ml)	-	2	4	4	9	-	4	9	
	2000(ml)	-	-	3	1	4	-	-	4	

注：可选配：通用夹具、培养瓶/皿（细胞）培养弹簧架、平盘（带胶垫）、烧瓶固定夹、试管架、粘垫。

高速恒温培养摇床

高速恒温培养摇床，集公司十多年设计和制造经验，引进消化国外技术，以用户的需求为导向，不断技术创新，广泛应用于对温度和振荡频率有较高要求的细胞培养、发酵、杂交、生物化学和细胞组织的研究等，可对微生物细胞与各类菌种运动、静态的培养。

产品特点

人性化设计

- 集培养箱、振荡器于一体，占地小；
- 大屏幕液晶显示屏，能连续、精确、实时显示温度以及转速和工作时间，并且菜单式操作界面，简单易懂；
- 顺应世界环保潮流，全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前沿；
- 大观察视窗，箱体内胆采用304不锈钢、振动台面采用铝材表面抑菌涂层处理，便于清洗；

品质保证

- 采用微电脑控制温度和振荡频率，带有定时功能；内置断电保护功能，可在电源正常供电后自动恢复运转；
- 压缩机和循环风扇等关键零部件均采用品牌产品，环保无氟制冷剂；

连续运行保证

- 低散热无刷直流电机，启动转矩大，调速宽、免保养、突破现有国产摇床无法长时间连续运行的缺陷；

安全功能

- 设有门开关，箱门开启时，微风循环、加热和摇床自动停止，无温度过冲之弊；
- 控制转速电路，确保摇床平稳启动，并能防止液体溅出而造成仪器损坏；
- 独立限温报警系统，超过限制温度后自动切断加热，保证安全运行不发生意外；
- 循环风扇速度大小自动控制，可避免试验过程中，由于循环风扇过快而造成的样品挥发；
- 可配RS-485接口和USB数据转移接口（U盘），通过连接电脑监测温度、转速、时间和报警；(选配)

技术参数

技术指标	型号	THZ-15	THZ-25	THZ-35	THZ-35C
	控制器	液晶控制器			
	振荡频率	40~500rpm			
	振荡精度	±1			
	振幅	4mm	5mm	5mm	
	允许承重(含夹具)	2Kg	4Kg	10Kg	
	控温范围	RT+5~65℃			4~65℃（环境温度降20℃）
	温度分辨率	0.1℃			
	定时范围	0~99小时59分			
	内部高度(mm)	195	265	330	
托盘尺寸W×D(mm)	250×250	350×350	450×450		
外部尺寸W×D×H(mm)	390×590×370	490×590×450	590×825×550	590×975×550	
输入功率	450W	650W	1000W	1300W	
电源	220V 50Hz				
出厂配置 (烧瓶固定夹数量)	250mL×5 只	250mL×13 只	250mL×18 只		
价格	RMB12200	RMB14400	RMB21900	RMB26200	



恒温培养摇床

选购件:(增加选购件交货期7天)

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1、多段可编程控制器..... | ¥ 1500元 |
| 2、嵌入式打印机..... | ¥ 2500元 |
| 3、RS485/232接口和通讯软件..... | ¥ 600元 |
| 4、U盘数据储存..... | ¥ 1000元 |

注：U盘、RS485/232、打印机三选一



恒温培养摇床

选购件:(增加选购件交货期7天)

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1、多段可编程控制器..... | ¥ 1500元 |
| 2、嵌入式打印机..... | ¥ 2500元 |
| 3、RS485/232接口和通讯软件..... | ¥ 600元 |
| 4、U盘数据储存..... | ¥ 1000元 |

注：U盘、RS485/232、打印机三选一

叠加式-CO₂振荡培养箱-细胞摇床 (90℃高温高湿灭菌)

叠加式-CO₂振荡培养箱，集公司十多年设计和制造经验，结合CO₂培养箱技术及振荡技术，引进消化国外技术，以用户的需求为导向，不断技术创新，广泛应用于对温度、CO₂浓度及振荡频率有较高要求的细胞培养、发酵、杂交、生物化学和细胞组织的研究等，可对微生物细胞与各类菌种动态、静态的培养。

产品特点

人性化设计

- 集培养箱、振荡器于一体，其可叠加的特点，具有占地面积小、使用率高；
- 运行安静，为您创造好的工作环境，全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前沿；
- 采用彩色大触摸屏，多组数据一屏显示，能连续、精确、实时显示温度以及转速和工作时间，并且菜单式操作界面，简单易懂；
- 大观察视窗，箱体内胆采用304不锈钢、振动台面采用铝材表面抑菌涂层处理，便于清洗；
- 上下开式箱门，振荡台面可抽出，方便用户取放物品；

品质保证

- 采用微电脑控制温度和振荡频率，带有定时功能；内置断电保护功能，可在电源正常供电后自动恢复运转；
- 压缩机和循环风扇等关键零部件均采用一线品牌产品，免维护；

连续运行保证

- 低散热无刷直流电机，启动转矩大，调速宽、免保养、突破现有国产摇床无法长时间连续运行的缺陷；

温度控制系统

- Pt100 温度传感器，确保箱内温度精准；
- 箱体六面加热，可防止内胆产生冷凝水，避免滋生细菌造成培养环境污染；
- 环境温度监测系统，独立的环境温度检测器，可根据环境温度变化自动调节加热系统，防止箱内温度过冲；

湿度控制系统(选配)

- 可选配湿度控制系统，对箱体提供精确的湿度控制；

CO₂监测与控制系统

- 采用进口红外传感器，具有监测CO₂气体速度快、精度高，并不受外界温湿度波动的影响等特点，即使多人使用，需频繁开门、关门等情况，仍能保持箱内CO₂浓度的稳定和均匀；
- CO₂进气口配备微生物过滤器，针对直径≥0.3μm的颗粒，过滤效率高达99.99%，可有效过滤CO₂气体中细菌、微尘颗粒及微生物污染源；

三偏心轴平衡驱动

- 三偏心轴平衡驱动工艺，确保在振荡托盘上的样品都以同样的转速振荡。承重耐用的结构设计保证了我们的振荡器甚至在满载，高速的状态下也能表现出强劲的实力；

安全功能

- 设有门开关，箱门开启时，微风循环、加热和摇床自动停止，无温度过冲之弊；
- 控制转速电路，确保摇床平稳启动，并能防止液体溅出而造成仪器损坏；
- 独立限温报警系统，超过限制温度后自动切断加热，保证安全运行不发生意外；
- 循环风速速度大小自动控制，可避免试验过程中，由于循环风扇过快而造成的样品挥发；
- 标配USB数据转移接口（U盘）或选配RS-485接口（二选一），通过连接电脑监测温度、转速、时间和报警。同时可选嵌入式打印机（选配）

分级权限管理（选配）

- 具有多个可分配多个账户，可根据设备管理需要，将设备控制器操作权限分配为管理员，操作员，访客三个权限等级账户；

安全冲水功能

- 箱体内能够用水进行全方位冲洗，保证箱体内洁净环境；



技术参数				
参数	型号	叠加式--CO ₂ 振荡培养箱		叠加式--CO ₂ 振荡培养箱（大型）
		BPNZ -101C BPNZ -102C BPNZ -103C	BPNZ -111C BPNZ -112C BPNZ -113C	BPNZ -121C BPNZ -122C BPNZ -123C
控制器	彩色触摸屏控制器（7 寸）			
工作室（个）	1-3（可叠加）			
振荡频率	40~300rpm			
振荡精度	±1rpm			
振幅	50mm / 26mm（选配）			
允许震荡承重（单层）	15kg	20kg	30kg	
控温范围	4~65℃			
温度分辨率	0.1℃			
温度均匀度	±0.4（在 37℃时）			
加热方式	六面加热			
CO ₂ 控制范围	0~20%			
CO ₂ 控制精度	±0.1%			
CO ₂ 稳定性	±0.1%（在 5% 时）			
CO ₂ 传感器	IR 红外线传感器			
消毒方式	90℃高温高湿消毒 + 紫外灭菌			
定时范围	0~99 小时 59 分			
内部容积（单层）	190L	252L	335L	
内部高度（单层）	350mm			325mm
托盘尺寸单层（mm）	500×460	760×460	980×560	
外形尺寸 W×H×D(mm)	1000×670×920 1000×1270×920 1000×1870×920	1200×670×920 1200×1270×920 1200×1870×920	1450×670×920 1450×1270×920 1450×1870×920	
额定功率（单层）	950W	1250W	1550W	
电源	220V 50Hz			
价格	RMB110000 RMB223900 RMB337000	RMB115000 RMB233900 RMB352900	RMB128000 RMB259900 RMB391900	

注 1: 三台叠加时, 下面两层为下开门、最上面一层为上开门;

注 2: 三层叠加, 最上层最高转速为 250rpm;

注 3: 以上数据均在环境温度 25℃, 湿度 50%RH 环境下测得;

可选夹具配置表：（单层）

型号	10 型	11 型	12 型
锥形烧瓶夹数量	250ml×27 只 1000ml×9 只	500ml×16 只 2000ml×5 只	250ml×41 只 1000ml×15 只
粘垫 W×D (140mm×140mm)	500ml×25 只 2000ml×8 只	250ml×67 只 1000ml×27 只	500ml×38 只 2000ml×15 只
9 只	15 只	24 只	
万能弹簧夹	450×450 1 只 (最多)	350×350 2 只 (最多) 400×340 2 只 (最多) 450×450 1 只 (最多)	350×350 2 只 (最多) 400×340 2 只 (最多) 450×450 2 只 (最多)
	注：选择小尺寸或少数量时，其他区域可选配锥形烧瓶夹或粘垫		
其他夹具	可根据订单特制各种夹具		

选购件:(增加选购件交货期14天)

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1、RS485/232接口及通讯软件 | ¥ 600元 |
| 2、无线报警系统（短信报警系统） | ¥ 2500元 |
| 3、嵌入式打印机 | ¥ 2500元 |
| 4、分级权限功能 | ¥ 3000元 |

注1: RS485/232、打印机二选一

注2: 提供3Q验证和校准服务(选配)




托盘



烧瓶夹



粘墊

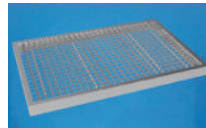

万能夹具

叠加式-振荡培养箱-生物摇床

新产品

叠加式-振荡培养箱, 集公司十多年设计和制造经验, 引进消化国外技术, 以用户的需求为导向, 不断技术创新, 广泛应用于对温度和振荡频率有较高要求的细胞培养、发酵、杂交、生物化学和细胞组织的研究等, 可对微生物细胞与各类菌种动态、静态的培养。

产品特点

人性化设计

- 集培养箱、振荡器于一体，其可叠加的特点，具有占地面积小、使用率高；
- 运行安静，为您创造好的工作环境，全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前沿；
- 采用彩色大触摸屏，多组数据一屏显示，能连续、精确、实时显示温度以及转速和工作时间，并且菜单式操作界面，简单易懂；
- 大观察视窗，箱体内胆采用304不锈钢、振动台面采用铝材表面抑菌涂层处理，便于清洗；
- 上下开式箱门，振荡台面可抽出，方便用户取放物品；

品质保证

- 采用微电脑控制温度和振荡频率，带有定时功能；内置断电保护功能，可在电源正常供电后自动恢复运转；
- 压缩机和循环风扇等关键零部件均采用一线品牌产品，免维护；

连续运行保证

- 低散热无刷直流电机，启动转矩大，调速宽、免保养、突破现有国产摇床无法长时间连续运行的缺陷；

环境温度监测系统

- 独立的环境温度检测器，可根据实验中的环境温度的变化进行自动调节振荡培养箱加热系统，以避免箱内温度过冲情况发生；

三偏心轴平衡驱动

- 三偏心轴平衡驱动工艺，确保在振荡托盘上的样品都以同样的转速振荡。承重耐用的结构设计保证了我们的振荡器甚至在满载，高速的状态下也能表现出强劲的实力；

安全功能

- 设有门开关，箱门开启时，微风循环、加热和摇床自动停止，无温度过冲之弊；
- 控制转速电路，确保摇床平稳启动，并能防止液体溅出而造成仪器损坏；
- 独立限温报警系统，超过限制温度后自动切断加热，保证安全运行不发生意外；
- 循环风扇速度大小自动控制，可避免试验过程中，由于循环风扇过快而造成的样品挥发；
- 标配USB数据转移接口（U盘）或选配RS-485接口（二选一），通过连接电脑监测温度、转速、时间和报警。同时可选嵌入式打印机（选配）

分级权限管理（选配）

- 具有多个可分配多个账户，可根据设备管理需要，将设备控制器操作权限分配为管理员，操作员，访客三个权限等级账户；

功能扩展（选配）

- 光照控制；（模拟自然生长环境）
- 湿度监测与控制；

安全冲水功能（选配）

- 箱体内部能够用水进行全方位冲洗，保证箱体内部洁净环境；

技术参数

参数	型号	叠加式 - 振荡培养箱				叠加式 - 振荡培养箱（大型）	
		HZQ -101 HZQ -102 HZQ -103	HZQ -101C HZQ -102C HZQ -103C	HZQ -111 HZQ -112 HZQ -113	HZQ -111C HZQ -112C HZQ -113C	HZQ -121 HZQ -122 HZQ -123	HZQ -121C HZQ -122C HZQ -123C
控制器	彩色触摸屏控制器（7 寸）						
工作室（个）	1-3（可叠加）						
振荡频率	40~300rpm						
振荡精度	±1						
振幅	26mm						
允许震荡承重（单层）	15kg		20kg		30kg		
控温范围	RT+5~65℃	4~65℃	RT+5~65℃	4~65℃	RT+5~65℃	4~65℃	
温度分辨率	0.1℃						
温度均匀度	±0.3（37℃ 时）						
加热方式	内置加热循环系统						
消毒方式	紫外线杀菌系统						
定时范围	0~99 小时 59 分						
内部容积（单层）	190L		252L		335L		
内部高度（mm）	350mm		350mm		325mm		
托盘尺寸单层（mm）	500×460		760×460		980×560		
外形尺寸 W×H×D(mm)	1000×670×920 1000×1270×920 1000×1870×920		1200×670×920 1200×1270×920 1200×1870×920		1450×670×920 1450×1270×920 1450×1870×920		
额定功率（单层）	950W		1250W		1550W		
电源	220V 50Hz						
价格	RMB36500 RMB76500 RMB119000	RMB40500 RMB83500 RMB128000	RMB41700 RMB87500 RMB133000	RMB46200 RMB94500 RMB142000	RMB55900 RMB114500 RMB175000	RMB61500 RMB125000 RMB188000	

注 1: 三台叠加时, 下面两层为下开门、最上面一层为上开门;

注 2: 三层叠加, 最上层最高转速为 250rpm;

注 3: 以上数据均在环境温度 25℃, 湿度 50%RH 环境下测得;

可选夹具配置表：（单层）

型号	10 型	11 型	12 型
锥形烧瓶夹数量	250ml×27 只 500ml×16 只 1000ml×9 只 2000ml×5 只	250ml×41 只 500ml×25 只 1000ml×15 只 2000ml×8 只	250ml×67 只 500ml×38 只 1000ml×28 只 2000ml×15 只
粘垫 W×D (140mm×140mm)	9 只	15 只	24 只
万能弹簧夹	450×450 1 只 (最多)	350×350 2 只 (最多)	350×350 2 只 (最多)
		400×340 2 只 (最多)	400×340 2 只 (最多)
		450×450 1 只 (最多)	450×450 2 只 (最多)
注：选择小尺寸或少数量时，其他区域可选配锥形烧瓶夹或粘垫			
其他夹具	可根据订单定制各种夹具		

注：选择小尺寸或少数量时，其他区域可选配锥形烧瓶夹或粘垫

选购件:(增加选购件交货期14天)

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1、RS485/232接口及通讯软件 | ¥ 600元 |
| 2、无线报警系统（短信报警系统） | ¥ 2500元 |
| 3、嵌入式打印机..... | ¥ 2500元 |
| 4、分级权限功能..... | ¥ 3000元 |

注1: RS485/232、打印机二选一

注2: 提供3Q验证和校准服务(选配)




托盘



烧瓶:



粘墊

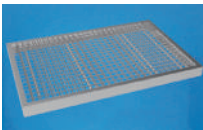

万能夹具

低温冷藏箱

应用范围

冷藏药品的专用设备，也可用于储存生物制品、试剂、疫苗等；适用于药房、制药厂、医院、卫生所以及疾病预防控制中心、电子行业、化工行业、科研领域、高校实验、食品加工行业。

产品特点

制冷系统

- 温度范围：2~8℃；
- 强制风冷循环能够维持箱体内部温度的稳定和统一，并且可以在开门之后使得温度能够快速恢复；
- 智能除霜功能，从而能够在更大程度上保证箱体内部温度的恒定；
- 开门时，蒸发风机停止运转以减少冷量损失；
- 50~60mm 厚聚氨酯发泡绝缘层；
- 翅片式蒸发器回路经特别设计，效率高、尺寸小；

安全保障

- 磁性密封门可以自动闭合，确保冰箱有更好的制冷性能和运行可靠性；
- 使用密码保护控制器设置，以免运行参数被更改；
- 整体框架结构，坚固耐用；
- 制冷系统使用高效环保的无氟制冷剂；
- 控制器配有备用电池，在主电源断电时能够显示报警、箱体内部温度等主要信息；
- 内置机械锁以确保存储物品的安全；
- 配备两个可移动和锁定的万向脚轮；
- 安全模式可在温度传感器故障的情况下自动运行，确保箱内物品存储安全；

温度控制和安全监控

- 报警方式：蜂鸣和灯光闪烁；
 - 数码管显示温度；
 - 高低温报警；
 - 开门时间过长报警；
 - 断电报警；
 - 记录显示日期、时间、最高和最低温度；
 - 微处理控制器内置温度报警和监控；
 - 控制器显示实时温度和报警代码，方便使用；
- ### 操作便利
- 每一层都配备标识卡；
 - 双层玻璃门便于观察；
 - 在控制面板上设置有箱体内部 LED 灯的开关；
 - 箱体右侧设置有标准测试孔，方便使用外部测试工具；
 - 脚轮可移动；
 - 搁架高度可调节；
 - 经过浸塑处理的搁架能够有效防止生锈和被腐蚀；
 - 蜂鸣报警可以设置为静音；
 - 监控冰箱的运行状态并存储和实时显示相应数据在控制器的大屏幕上，方便用户读取；

技术参数

参数	型号	BYC-5L310	BYC-5L656	BYC-5L1000
温度范围 (°C)		2 ~ 8		
控制精度 (°C)		0.1		
温度均匀性 (°C)		≤ 2		
降温时间 (h)		≤ 0.8		
容积 (L)		310	656	1000
保温厚度 (mm)		50	60	60
搁板数量		5	10	10
分层数		5	10	10
电压 / 频率 (V / Hz)		AC220V/50HZ		
外部尺寸 (mm) W x D x H		640 x 553 x 1880	1220 x 642 x 1885	1220 x 872 x 1885
内部尺寸 (mm) W x D x H		540 x 425 x 1380	1100 x 454 x 1325	1100 x 684 x 1325
认证		CE、RoHS		
价格		RMB9800	RMB19800	RMB23800

液相液氮罐（方提桶系列）

用途概述

方提桶系列液相液氮罐采用大口径设计，具有低液氮消耗设计优势，满足中等容量生物样本长期存储或者需要频繁提取样本的存储需求，具有重量轻、占地小、放置灵活等优势，广泛应用于小型样本库或样本库建设初期的生物样本存储。


产品特点

- 大口径设计，方便样本存取；
- 低液氮消耗，静态液氮保存期长，无需经常补充液氮，样本存储稳定安全；
- 罐体采用高强度轻质铝材料，强度大，不易破损，经久耐用；
- 高强度颈管设计，进一步减少了液氮损失，有效延长了静态液氮保存期；
- 配有铰链式提手，移动更加方便；
- 采用多层绝热真空设计，真空度稳定，热辐射少，液氮损耗小；
- 可选配锁盖，以确保存储物品的安全；
- 可选配智能监控系统，实现远程监控；



技术参数

型号 技术参数	BYDS-35-125	BYDS-47-127	BYDS-50-125	BYDS-65-216	BYDS-65-216L	BYDS-95-216	BYDS-115-216	BYDS-145-216	BYDS-175-216
容 积 (L)	35	47	50	65	65	95	115	145	175
静态蒸发率 (L/day)	0.36	0.37	0.43	0.78	0.78	0.81	0.85	0.85	0.87
静态液氮保存 天数	97	130	115	83	83	117	135	171	202
方提桶数量 (单层)	6	6	6	4	6	6	6	6	6
冻存管数量 (100 格 方提桶,1.2 & 2.0 ml)	--	--	--	2000	2400	3000	3600	4800	6000
冻存管数量 (25 格 方提桶, 1.2& 2.0 ml)	600	750	900	--	--	--	--	--	--
层数	4	5	6	5	4	5	6	8	10
口径 (mm)	125	127	125	216	216	216	216	216	216
总高 (mm)	747	716	771	715	700	950	860	1020	1130
外径 (mm)	451	508	508	575	678	678	678	678	678
净重 (kg)	17	21	22.5	28.5	32	38	45	48	56
价 格	RMB5980	RMB7990	RMB8150	RMB15500	RMB15800	RMB19500	RMB22000	RMB25500	RMB29000

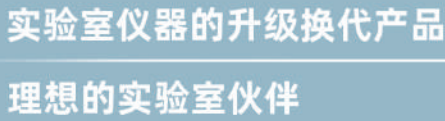

我们只制造放心

www.yihengchina.com

www.yihengyiqi.com



用途概述

本产品提供无尘无菌的局部空气净化工作环境,广泛用于对电子技术、航空航天、精密仪器、仪表、精细化工、食品等研究。

本产品采用了可调风量的风机系统,通过调节风机的工况,使工作区中的平均风速保持在额定的范围内,有效的延长了过滤器的使用寿命。

产品特点

人性化设计

- 柜体侧面透明钢化玻璃窗，增加采光性能；
 - 自平衡上下滑动钢化玻璃窗，可任意定位；
 - 304 不锈钢工作台面，易于清洁；
- ### 品质保证
- 可调风量的风机系统；
 - 小风量、大风压、低噪声风机；
 - 使用 HEPA 过滤器，对于 0.3 μ m 的颗粒高达 99.99% 的截流效率；
 - 配置预过滤器，延长过滤器的使用寿命；
 - 工作区配置照明灯及紫外灭菌灯；
 - 配置 1KW 备用插座，为操作者提供便利；

技术参数

The image displays three different models of biosafety cabinets. On the left is the BCH series, which features a large, angled front glass shield and a stainless steel work surface. In the middle is the BCF-2F model, which has a more traditional rectangular design with a stainless steel work surface and a control panel on the right side. On the right is the BCF-1F model, which is similar to the BCF-2F but has a slightly different front panel design. All three units are mounted on casters for mobility.

BCH系列

BCF-2F

BCF-1F

普及型



耐腐蚀干燥箱 (内胆316不锈钢+不锈钢外壳)

新产品

外壳不锈钢



用途概述

耐腐蚀干燥箱内胆和外壳全部采用不锈钢，耐酸碱腐蚀，专门为一些有酸碱腐蚀实验项目而准备，可以对一些有腐蚀性物质的材料、设备进行干燥。

产品特点

- 内胆采用 316 不锈钢，更好地耐酸碱腐蚀，更加容易清洁维护；
- 外壳采用不锈钢材料，耐酸碱腐蚀；
- 箱体内部核心零部件采用特定的材料，能够更好地耐酸碱腐蚀；
- 门封条采用硅橡胶圈材料，更加耐酸碱腐蚀；
- 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑PID温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠；
- 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，提高工作室温度均匀；
- 采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换；
- 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小；
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外；(选配)
- 可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况；(选配)

技术参数

型号	指标	电源电压	输入功率	控温范围	温度分辨率	恒温波动度	温度均匀度	搁板	内胆尺寸 (mm)W×D×H	外形尺寸 (mm)W×D×H	容积	定时范围	价格
BPG-9106S		AC220V 50HZ	1300W	RT+10 ~ 200℃	0.1℃	±1℃ (测试点为 100℃)	2块	455×430×510	600×642×837	100L	0 ~ 5999min	RMB11900	
BPG-9156S	1650W		3块				560×530×595	705×742×927	175L	RMB15900			
BPG-9206S	2000W		3块				610×570×650	755×782×977	220L	RMB19000			

多箱体干燥箱

新产品

用途概述

多箱体干燥箱是对传统的单箱体设备的升级，可两箱或四箱组合，能够提升空间利用效率，节省实验室宝贵空间。广泛应用于工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。

产品特点

- 具有两箱或者四箱干燥箱可选，有效节省实验室空间；
- 每个干燥箱箱体独立控制，互不干扰，温度控制精确稳定；
- 箱体内部均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用钢板，造型美观、新颖；
- 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑PID温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠；
- 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，提高工作室室内温度均匀；
- 采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换；
- 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小；
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外；(选配)
- 可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况；(选配)

技术参数

指标 型号	电源电压	输入功率	控制范围	温度 分辨率	温度 均匀度	恒温波动度	搁板	内胆尺寸 (mm)W×D×H	外形尺寸 (mm)W×D×H	定时范围	价格
DHG-150-2B(二箱)	AC220V 50HZ	3300W	RT+10 ~ 200℃ RT+10 ~ 250℃	0.1℃	±2.5℃ (测试点为 100℃)	±1℃	2块 (单箱)	560×530×600	705×740×1800	0 ~ 9999min	RMB13360
DHG-100-4B(四箱)		5200W						455×430×510	1220×616×1620		RMB23600

加热循环槽	6
恒温振荡水槽	7
油浴锅	7
恒温水槽与水浴锅	7
药品稳定性试验箱	7
步入式药品试验室	8
老化试验箱	8
热空气消毒箱	8
高低温(交变)试验箱	8
高低温(交变)湿热试验箱	8

紫外耐气候试验箱	9
氙灯耐气候试验箱	9
盐雾腐蚀试验箱	9
电阻炉	9
旋转蒸发器	9
分液漏斗振荡器	10
耐腐蚀隔膜泵	10
循环冷却器	10
干式冷阱	10
磁力搅拌器	10
顶置电动搅拌器	10
氮吹仪	10
离心机	11
漩涡混匀仪	11
多通道涡混匀仪	11
孵育器/金属浴	11
微孔板逐孔离心机	11
均质分散机	11
粘度计	11

多箱体干燥箱
耐腐蚀干燥箱

52

洁净工作台

51



实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴

持之一恒

我们只制造放心

www.yihengchina.com

www.yihengyiqi.com



鼓风干燥箱—升级换代产品

普及型

用途概述

采用先进的激光、数控加工设备生产的产品；供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。

产品特点

- 箱体内部采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外部采用钢板，造型美观、新颖；
- 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑PID温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠；
- 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，提高工作室内部温度均匀；
- 采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换；
- 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小；
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外；(选配)
- 可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况；(选配)

技术参数

※注：根据用户需要可定控温范围为RT+10~250℃产品，RT指环境温度。

指标	电源电压	输入功率	控制范围	温度分辨率	温度均匀度	恒温波动度	搁板	内胆尺寸(mm)W×D×H	外形尺寸(mm)W×D×H	定时范围	价格
型号											
DHG-9013A	AC220V 50HZ	850W	RT+10~200℃ RT+10~250℃	0.1℃	±3% (测试点为100℃)	±1℃	2块	250×260×250	530×370×420	0~9999min	RMB3080
DHG-9023A		850W						340×325×320	620×440×490		RMB3540
DHG-9053A		1100W						420×395×350	720×530×520		RMB4090
DHG-9123A		2050W						550×450×550	840×580×730		RMB6110
DHG-9203A		2450W						600×550×600	880×765×780		RMB8080

选购件:(增加选购件交货期7天)

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1、多段可编程液晶温度控制器..... ¥ 1500元 | 5、直径Φ25mm测试孔..... ¥ 500元 |
| 2、独立限温控制器..... ¥ 500元 | 6、U盘数据储存..... ¥ 1000元 |
| 3、RS485接口及通讯软件..... ¥ 600元 | 7、无线报警系统（短信报警系统）..... ¥ 2500元 |
| 4、嵌入式打印机..... ¥ 2500元 | |
- 注1：U盘、RS485/232、打印机三选一 注2：DHG-9013A、PH-010(A)不能选配嵌入式打印机、RS485接口及通讯软件

干燥箱/培养箱(两用)

用途概述

新一代PH系列干燥/培养两用箱，集公司多年生产经验，引进消化国外技术，具有高质、可靠、安全等特点，强迫对流的新型干燥/培养两用箱，对大专院校，科研和生产都有直接的帮助，并提供了可靠的保证。

产品特点

- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调；
- 微电脑液晶显示控制器，控温精确可靠；
- 强迫式暖风循环设计，确保工作室温度均匀；
- 采用硅橡胶密封条及双层玻璃门观察窗，观察方便明了；
- 箱门打开时，微循环和加热自动停止，无温度过冲之弊；

技术参数

技术指标	型号	PH-010 (A)	PH-030 (A)	PH-050 (A)	PH-070 (A)	PH-140 (A)	PH-240 (A)
电源电压		AC220V 50HZ					
控温范围		为培养箱时：RT+5~80℃ / 为干燥箱时：80~220℃					
温度分辨率		0.1℃					
温度波动度		为培养箱时：±0.5℃ / 为干燥箱时：±1℃					
温度均匀度		±3% (测试点为100℃)					
工作环境温度		+5~35℃					
输入功率		850W	850W	1100W	1550W	2050W	2450W
内胆尺寸(mm)W×D×H		250×260×250	340×325×320	420×395×350	450×400×450	550×450×550	600×500×750
外形尺寸(mm)W×D×H		530×480×420	620×490×490	720×590×520	740×590×630	840×570×730	880×630×930
载物托架（标配）		2块					
定时范围		0~5999min					
价格		RMB3730(A)	RMB4700(A)	RMB5570(A)	RMB6290(A)	RMB7760(A)	RMB10500(A)



9003系列鼓风干燥箱



干燥箱 / 培养箱(两用)

大型鼓风干燥箱—标准型

触摸屏

智能型

大型鼓风干燥箱—定制式

用途概述

箱体通过独特的风道设计，提供更加精确温度控制，保证温度控制精度和箱体内温度均匀性。大箱体结构设计，满足需要更大空间的干燥实验，应用于生物制药企业、食品企业、化妆品、化工材料等领域。

产品特点

- 采用智能触摸屏控制，菜单式操作，可快速进行温度、时间参数设定；
- 箱体内部均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外部采用钢板，造型美观、新颖；
- 采用微电脑PID温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠；
- 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内部温度均匀度；
- 采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换；
- 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小；
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外；(选配)
- 可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况；(选配)
- 采用双门结构设计，可以满足大件样品进去，使用更加方便；
- 标配万象脚轮，移动更加灵活方便；
- 可选配加厚搁板，可满足样品更高的承重要求(选配)

技术参数

型号	BPG-2000L	BPG-3000L	BPG-4000L
容积	2m³	3m³	4m³
温度范围	RT+10~220℃		
温度控制	PID控制		
温度控制精度	±0.5℃		
温度均匀度	±1.5℃(@100℃)		
操作界面	7寸彩色触摸屏		
电源	380V/50Hz		
机器功率	8.5KW	10KW	11.5KW
定时功能	标配		
通讯功能	RS-485通讯接口		
报警系统	具有高温、低温报警		
门结构	双门结构设计		
内部尺寸(mm)(W×D×H)	1400×1120×1350	1880×1120×1350	2250×1120×1350
外部尺寸(mm)(W×D×H)	1750×1350×2060	2230×1350×2060	2600×1350×2060

独立限温控制器 ¥ 500元

超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外



RS485通讯接口 ¥ 600元

通过连接电脑，显示、监控实验各项数据



多段可编程控制器 ¥ 1500元



生化/霉菌培养箱 01
04

低温培养箱 05
多箱体生化/霉菌培养箱 06

生物安全低温培养箱 07
半导体制冷低温培养箱 08

生物安全培养箱 09
恒温培养箱 10

隔水式恒温培养箱 13
多箱体恒温/微生物培养箱 14

CO₂培养箱 15
18

光照培养箱/人工气候箱 19
恒温恒湿箱 26

回旋振荡器 31
恒温培养摇床 33

恒温振荡器 35
大型恒温振荡器 36

落地振荡器 37
摇瓶机 38

叠加式-振荡培养箱 39
42

超低温冰箱 43
低温冷藏箱 45

液相液氮罐 46
干式运输液氮罐 48

生物安全柜 49
洁净工作台 50

干燥箱 52
真空干燥箱 59

加热循环槽 68
恒温振荡水槽 71

油浴锅 74
恒温水槽与水浴锅 76

药品稳定性试验箱 77
步入式药品试验室 83

老化试验箱 84
热空气消毒箱 84

高低温(交变)试验箱 85
高低温(交变)湿热试验箱 87

紫外耐候气候试验箱 89
90

氙灯耐候气候试验箱 91
盐雾腐蚀试验箱 92

电阻炉 93
96

旋转蒸发器 97
分液漏斗振荡器 100

耐腐蚀隔膜泵 101
循环冷却器 102

干式冷阱 103
磁力搅拌器 104

顶置电动搅拌器 108
氮吹仪 109

离心机 110
漩涡混合仪 110


多管漩涡混匀仪 111
孵育器/金属浴 112

微孔板迷你离心机 114
均质分散机 115

粘度计 117
122

大型鼓风干燥箱

鼓风干燥箱
两用箱

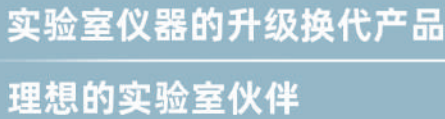

我们只制造放心

www.yihengchina.com

www.yihengyiqi.com



台式真空干燥箱

智能型

触摸屏

新一代真空干燥箱，集公司多年在箱体加热方面的成功经验，通过不断潜心研究，突破传统技术创造性解决了在热传导过程中的“瓶颈”——寻找到好的热传导方式。

用途概述

真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。

产品特点

- 采用4.3寸智能触摸屏，温度、时间等参数实时显示和设定，操作简单方便；
- 长方体工作室，使有效容积达到最大，微电脑温度控制器，控温精确可靠，与传统真空箱相比，干燥时间减少40%以上；
- 钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内部物体，一目了然，能够向内部充入惰性气体；
- 箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅门密封圈，确保箱内保持高真空度；
- 工作室采用不锈钢板材料制成，确保产品经久耐用,便于清洁；
- 储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，不会导致氧化；
- 采用电子式真空显示，可实现真空度精确控制(VT系列)；

选构件:(增加选构件交货期7天)

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1、惰性气体进气阀 | ¥ 500元 |
| 2、进口真空表 | ¥ 800元 |
| 3、下箱体柜6050系列以下 | ¥ 1000元 |
| 6050系列 | ¥ 2000元 |
| 6050系列以上 | ¥ 2500元 |
| 4、液态水过滤器(按规格型号定价, 适用高湿干燥用) | ¥ 700元 |
| 5、干燥罐 | ¥ 550元 |
| 6、可选配排气油污过滤装置(建议6个月更换一次) | ¥ 2500元 |
| 7、可选配搁板 | 每块 ¥ 500~2000元 |
| 8、电子安全门锁 | ¥ 2500元 |



真空干燥箱型号	选配隔膜泵型号
DZF-6022T/VT	VB-40
DZF-6032T/VT	VB-40
DZF-6052T/VT	VB-40
DZF-6092T/VT	VB-65
DZF-6213T/VT	VB-130

技术参数

注：此系列产品销售需报备

技术指标	型号	DZF-6022T DZF-6022VT	DZF-6032T DZF-6032VT	DZF-6052T DZF-6052VT	DZF-6092T DZF-6092VT	DZF-6123T DZF-6123VT	DZF-6213T DZF-6213VT
	电源电压	AC220V 50HZ					
输入功率	700W	850W	1450W	1950W	1500W	2850W	
控温范围	RT+10 ~ 200℃						
温度分辨率/波动度	0.1℃ /±1℃						
达到真空度	133Pa						
真空显示	机械指针式/电子式显示						
工作环境温度	+ 5 ~ 40℃						
加热方式	捆绑式加热			搁板加热			
内胆尺寸(mm)W×D×H	300×300×275	320×320×300	415×370×345	450×450×450	500×500×500	600×600×600	
外形尺寸(mm)W×D×H	605×490×450	630×510×490	730×560×550	740×610×591	790×660×641	890×760×741	
搁板	2块	2块	2块	2块	3块	3块	

注:1、台式系列带进气阀门控制（不标配真空泵）

注:2、可定制250℃真空干燥箱, 交货期20天, 加收市场价10%费用

台式真空干燥箱-微电脑控制

普及型

新一代真空干燥箱，集公司多年在箱体加热方面的成功经验，通过不断潜心研究，突破传统技术创造性解决了在热传导过程中的“瓶颈”——寻找到好的热传导方式。

用途概述

真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。

产品特点

- 长方体工作室，使有效容积达到最大，微电脑温度控制器，控温精确可靠，与传统真空箱相比，干燥时间减少40%以上；
- 钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内部物体，一目了然，能够向内部充入惰性气体；
- 箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅门密封圈，确保箱内保持高真空度；
- 工作室采用不锈钢板材料制成，确保产品经久耐用,便于清洁；
- 储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，不会导致氧化；

选购件:(增加选购件交货期7天)

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1、智能型程序液晶温度控制器 | ¥ 1500元 |
| 2、惰性气体进气阀 | ¥ 500元 |
| 3、进口真空表 | ¥ 800元 |
| 4、下箱体柜6050系列以下 | ¥ 1000元 |
| 6050系列 | ¥ 2000元 |
| 6050系列以上 | ¥ 2500元 |
| 5、液态水过滤器(按规格型号定价, 适用高湿干燥用) | ¥ 700元 |
| 6、干燥罐 | ¥ 550元 |
| 7、可选配排气油污过滤装置(建议6个月更换一次) | ¥ 2500元 |
| 8、可选配搁板 | 每块 ¥ 500~2000元 |
| 9、国产真空泵2XZ-2 | ¥ 1990元 |
| 10、国产真空泵2XZ-4 | ¥ 2390元 |

技术参数


技术指标	型号	DZF-6050 DZF-6053 DZF-6055 DZF-6056	DZF-6012 DZF-6020 DZF-6022 DZF-6024	DZF-6021 DZF-6051	化学专用 DZF-6030A DZF-6032 DZF-6034	生物专用 DZF-6030B DZF-6050B DZF-6055B	DZF-6213 DZF-6216	DZF-6123 DZF-6126	DZF-6092 DZF-6094 DZF-6096
	电源电压	AC220V 50HZ							
	输入功率	1450W	400W/400W/700W/700W	400W/1450W	850W	300W/650W/650W	1550W/2850W	1500W/2300W	870W/1950W/1950W
	控温范围	RT+10 ~ 200℃				RT+10 ~ 65℃	RT+10 ~ 200℃		
温度分辨率/ 波动度	0.1℃ /±1℃								
达到真空度	133Pa								
真空表	机械指针式					机械指针式			
工作环境温度	+ 5 ~ 40℃								
内胆尺寸(mm) WxDxH	415×370×345	220×210×220 300×300×275	300×300×275 415×370×345	320×320×300	320×320×300 415×370×345	600×600×600	500×500×500	450×450×450	
外形尺寸(mm) WxDxH	730×560×550	500×375×410 605×490×450	605×490×450 730×560×550	630×510×490	610×510×490 730×560×550	890×760×741	790×660×641	740×610×591	
搁板	2块/3块/5块/6块	2块/1块/2块/4块	1块/2块	1块/2块/4块	1块/2块/5块	3块(独立控温) /6块	3块(独立控温) /6块	2块(独立控温) /4块/6块	
工作室材料	不锈钢304 (1Cr ~ 18Ni9Ti)		冷轧板(08F)	不锈钢316 (0Cr17Ni12Mo2)	不锈钢304 (1Cr ~ 18Ni9Ti)				
价格	RMB6790 RMB7570 RMB8290 RMB8990	RMB4290 RMB4990 RMB5870 RMB6500	RMB4490 RMB6490	RMB7370 RMB8080 RMB9230	RMB6400 RMB7630 RMB8990	RMB38600 RMB44900	RMB29900 RMB36600	RMB19900 RMB22900 RMB27200	

注:1、台式系列带进气阀门控制（不标配真空泵）

2、6020、6021、6030B、6213、6123、6092的加热方式为搁板式加热方式，其余产品采用内胆四周捆绑式加热

3、采用四周捆绑式加热，能定制250℃真空干燥箱，交货期20天，加收市场价10%费用

4、6092、6123、6213采用隔板式加热，能定制300℃真空干燥箱，交货期20天，加收市场价30%费用

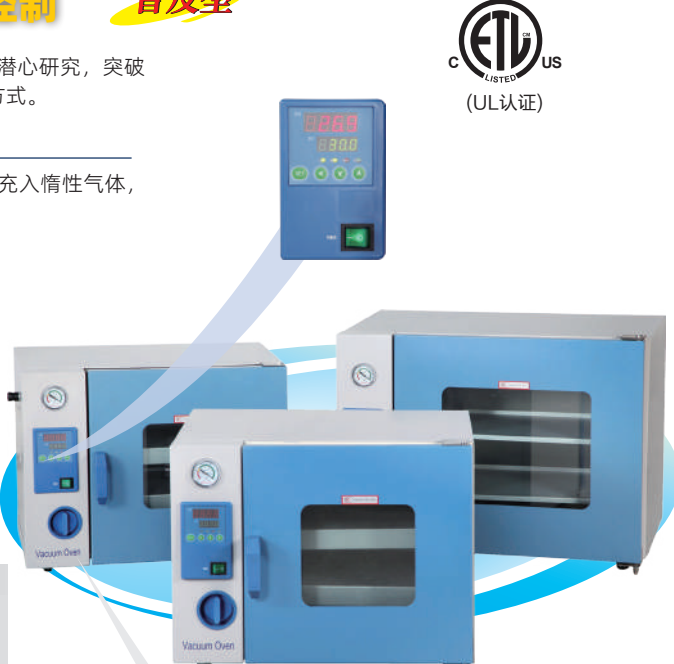

DZF台式系列

※ 最少的能量损失(零热能损失)
6020、6021、6213、6123、6092加热器都位于箱体内部搁板上, 很好的减少热量损失。

※化学专用的真空干燥箱（6030A、6032、6034）
箱体工作室内胆材料为防腐蚀的不锈钢材料
（316:0Cr17Ni12Mo2）

台式直

50

台式真空干燥箱

59

高 高
細 細

光 子



实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴

持之一恒

我们只制造放心

www.yihengchina.com

www.yihengyiqi.com



真空干燥箱-多箱真空干燥试验箱

多箱真空干燥箱

程序液晶控制

电子

电池

半导体

用途概述

本产品适用于电子产品生产过程的脱泡，脱水，硬化和洗净处理后的干燥等真空状态下的热处理，广泛用于锂离子电池、LED光电元件、晶振等电子产品生产工艺的真空干燥处理，可同时满足不同试验条件下的实验对比，为用户节省试验时间提高效率。

产品特点

- 工作室采用不锈钢板制成，确保产品经久耐用，外箱体可选配全不锈钢SUS304材料，便于清洁；
- 长方形真空室，使有效容积大，能充分利用空间；
- 弹性双层钢化玻璃门观察工作室内部物体，一目了然；
- 箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅橡胶门密封圈，确保箱内高真空度；
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外；(选配)
- 每层箱体可独立加热、独立抽真空、独立注氮气，互不干扰；
- 低噪声专业品牌真空泵，真空控制稳定可靠；（B系列）
- 可增配置多层隔板、LED照明（选配）

隔板直接加热和控制

- 每一块隔板都有单独的温度传感器，单独的控制回路对不同的装载物干燥有着精确的响应，每一块使用的搁板在设定、监测温度和定时都能独立显示和控制；加热元件直接安放在搁板的下面，因此不会造成温度的偏差，测量更精确，控温更稳定；加热和操作时间比内胆四周捆绑加热式加热时间缩短50%以上；

程序控制(选配)

- 程序控制操作，可根据工艺需求设定加热、真空保持和氮气保持时间，确保每批次烘烤一致性，降低产品的烘烤差异性；

技术参数

技术指标	型号	多箱真空干燥箱 多箱真空干燥试验箱			
		BPZ-6090-2 BPZ-6090-2B (二箱)	BPZ-6120-2 BPZ-6120-2B (二箱)	BPZ-6210-2 BPZ-6210-2B (二箱)	BPZ-6140-3 BPZ-6140-3B (三箱)
电源电压		AC220V 50HZ			
输入功率		2200W	3350W	3550W	3100W
控温范围		RT+10 ~ 200℃（可定制到250℃）			
温度分辨率/波动度		0.1℃ /±1℃			
达到真空度		133Pa			
真空表		机械指针式			
工作环境温度		+ 5 ~ 40℃			
内胆尺寸(mm)W×D×H		450×450×450（单层）	500×500×500（单层）	600×600×600（单层）	380×600×620（单层）
外形尺寸(mm)W×D×H		740×810×1470	790×860×1570	880×960×1770	880×980×1910
搁板		2块(独立控温)×2	3块(独立控温)×2	3块(独立控温)×2	2块(独立控温)×3
工作室/外箱材料		不锈钢304 (1Cr ~ 18Ni9Ti) / 静电喷塑工艺			
真空表		进口真空表			
价格		RMB47900 RMB59900	RMB63500 RMB70900	RMB79000 RMB87000	RMB103000 RMB115000

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

注：1、BPZ系列真空干燥（试验）箱配真空泵
2、(二箱)真空干燥（试验）箱接到订单后,交货期为25天
3、(三箱)真空干燥（试验）箱接到订单后,交货期为30天
4、带“B”为优质品牌真空泵
5、可定制到250℃真空干燥箱，按市场价加收15%费用

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、惰性气体进气阀 ￥500元
- 2、液态水过滤器(按规格型号定价，适用高湿干燥用) ￥700元
- 3、干燥罐 ￥550元
- 4、可选配排气油污过滤装置(建议6个月更换一次) ￥2500元



多箱真空干燥箱系列

加热循环槽 透明循环水浴槽 ◆ 恒温循环槽

用途概述

新一代恒温水浴系统，集公司多年设计和生产经验，引进消化德国技术，主要零部件均采用进口产品，具有高质、可靠、稳定等特点，广泛地适用于石油、化工、医药、生命科学、计量、轻工和科研等领域。

产品特点

- ◆ 微电脑PID温度液晶控制器，控温精确可靠，带定时，加热器和循环泵等关键零部件均采用进口产品；
- ◆ 超温、低温声光跟踪报警和液位保护功能，使样品得到可靠保护，不发生意外；
- ◆ 配有压力吸入泵，为外设槽提供恒温源；
- ◆ 配有外置浴槽相连接的连接口；
- ◆ 多段可编程液晶控制器；（选配）
- 微电脑程序控制温度、时间及升温速率，以极快的速度进行恒温试验；
- 可预设7组63步可编程序，每组9步，每组设置时间1~99小时59分。可预置开机和关机时间，循环泵转速可调；
- 多段可编程控制，菜单式操作界面，可以简化复杂的实验过程，真正实现自动控制和运行；

技术参数

技术指标 型号	温度范围	精度	外壳W×D×H	内胆W×D×H	浴槽开口/深度 W×D×H(mm)	充液 容积	电压	泵（流量）	输入功率	价格
MP-5H	RT+5 ~ 100℃	±0.1	200×335×400	150×305×150	150×160/150	6.7L	AC220V 50HZ	8L/min	1050W	RMB4800
MP-13H	RT+5 ~ 100℃	±0.1	280×340×400	150×305×150	240×170/150	10.9L		8L/min	1050W	RMB5800
MP-19H	RT+5 ~ 100℃	±0.1	340×540×400	500×300×150	330×300/150	22.5L		8L/min	1050W	RMB6600
MPG-13A	RT+5 ~ 100℃	±0.1	-	-	180×300/150	14.5L		8L/min	1050W	RMB5800
MPG-100H	RT+5 ~ 100℃	±0.2	310×430×500	240×300×200	240×170/200	14.5L		8L/min	1050W	RMB8500
MP-501A	RT+5 ~ 100℃	±0.2	310×430×500	240×300×200	240×170/200	14.5L		8L/min	1050W	RMB5190
CD-200F	-20~150℃	±0.03	-	-	230×390×650	3L		15L/min	2000W	

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、多段可编程液晶控制器 ￥1500元



CD-200F



MP-5H
恒温循环槽



MP-13H 恒温循环槽
MP-19H

注：试管架为选配件



MPG-100H
恒温循环槽

液晶控制器



MP-501A
超级恒温循环槽

加热循环槽

生化/霉菌培养箱 01 04	低温培养箱 05 多箱体生化/霉菌培养箱 06	生物安全恒温培养箱 07 半导体制冷恒温培养箱 08	生物安全培养箱 09 恒温培养箱 10	隔水式恒温培养箱 13 多箱体恒温/微生物培养箱 14	CO ₂ 培养箱 15 18	光照培养箱/人工气候箱 19 恒温恒湿箱 26	回旋振荡器 31 恒温培养摇床 33	恒温振荡器 35 大型恒温振荡器 36	落地振荡器 37 摇瓶机 38	叠加式-振荡培养箱 39 42	超低温冰箱 43 低温冷藏箱 45	液相液氮罐 46 干式运输液氮罐 48	生物安全柜 49 洁净工作台 50	干燥箱 52 真空干燥箱 59	加热循环槽 68 恒温振荡水槽 71	油浴锅 74 恒温水槽与水浴锅 76	药品稳定性试验箱 77 步入式药品试验室 83	老化试验箱 84 热空气消毒箱 84	高低温(交变)试验箱 85 高低温(交变)湿热试验箱 87	紫外耐气候试验箱 89 90	氙灯耐气候试验箱 91 盐雾腐蚀试验箱 92	电阻炉 93 96	旋转蒸发器 97 分液漏斗振荡器 100	耐腐蚀隔膜泵 101 循环冷却器 102	干式冷阱 103 磁力搅拌器 104	顶置电动搅拌器 108 氮吹仪 109	离心机 110 漩涡混匀仪 110	多管漩涡混匀仪 111 孵育器/金属浴 112	微孔板迷你离心机 114 均质分散机 115	粘度计 117 122
-------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------	--------------------	--------------------	----------------------	------------------------	----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------	---------------------------	--------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	----------------------------	---------------------------	----------------



实验室仪器的升级换代产品
理想的实验室伙伴

持之一恒

我们只制造放心

www.yihengchina.com

www.yihengyiqi.com



制冷和加热循环槽—多段液晶控制器

用途概述

新一代恒温水浴系统，集公司多年设计和生产经验，引进消化德国技术，主要零部件均采用进口产品，具有高质、可靠、稳定等特点，广泛地适用于石油、化工、医药、生命科学、计量、轻工和科研等领域。

产品特点

- 智能化微电脑温度液晶控制器，控温精度高，环保型制冷剂，压缩机、循环泵和加热器等关键零部件均采用进口产品；
- 超温、低温声光跟踪报警和液位保护功能,使样品得到可靠保护,不发生意外；
- 采用进口品牌压缩机，具有噪声低、降温快、效率高、能耗低等特点；
- 配有压力吸入泵，为外设槽提供恒温源；
- 配有外置浴槽相连接的连接口；

方便的数据处理（选配）

- 可连接打印机、485通讯接口或USB数据转移接口（U盘），用电脑和打印机记录温度和时间曲线，为试验过程中的数据储存与回放提供有力保证；

多段可编程液晶控制器（标配）

- 微电脑程序控制温度、时间及升温速率，以极快的速度进行恒温试验；
- 可预设7组63步可编程序，每组设置时间1-99小时59分，循环泵转速大小可调；

技术参数

技术指标 型号	温度范围	精度		外壳W×D×H	内胆W×D×H	浴槽开口/深度 W×D×H(mm)	充液 容积	电压	泵(流量)	输入功率	价格
		显示	控制								
MP-10C	-10 ~ 100℃	0.1	±0.2	285×510×710	150×305×150	150×160/150	4.5L	AC220V 50HZ	8L/min	2300W	RMB8900
MP-20C	-20 ~ 100℃									380×610×880	240×300×200
MP-30C	-30 ~ 100℃			2800W	RMB13800						
MP-40C	-40 ~ 100℃			3100W	RMB16800						
MP-50C	-50 ~ 100℃			3100W	RMB26800						
MPG-10C	-10 ~ 100℃			380×610×880	240×300×200	240×170/200	13L			2300W	RMB13800
MPG-20C	-20 ~ 100℃									2300W	RMB15800
MPG-40C	-40 ~ 100℃									3100W	RMB19800
MPG-50C	-50 ~ 100℃									3100W	RMB29800

1、多段可编程液晶控制器 ￥1500元

高精度制冷和加热循环槽

技术参数

型号	技术指标	温度范围	精度		浴槽开口/深度(mm) W×D×H	充液容积	电压	泵（流量）	输入功率	价格
			显示	控制						
MPE-10C		-10～100℃	0.01	±0.02	150×160/150	4.5L	AC220V 50HZ	8L/min	2300W	RMB11900
MPE-10CJ		-10～100℃							2300W	RMB34900
MPE-20C		-20～100℃							2300W	RMB13900
MPE-30C		-30～100℃							2800W	RMB16900
MPE-40C		-40～100℃							3100W	RMB19900
MPE-50C		-50～100℃							3100W	RMB29900
MPGE-10C		-10～100℃			240×170/200	13L			2300W	RMB16900
MPGE-10CJ		-10～100℃							2300W	RMB39900
MPGE-20C		-20～100℃							2300W	RMB18900
MPGE-40C		-40～100℃							3100W	RMB22900
MPGE-50C		-50～100℃							3100W	RMB32900

注：MPE-10CJ、MPGE-10CJ标配德国Julabo控制器



MP-10C
MP-20C
MP-30C
MP-40C
MP-50C
制冷和加热循环槽

MPG-10C
MPG-20C
MPG-40C
MPG-50C
制冷和加热循环槽



德国Julabo控制器

高精度制冷和加热循环槽

用途概述

新一代高精度制冷和加热循环槽产品，集公司多年设计和生产经验，引进消化德国技术，主要均采用进口品质，具有高质、可靠、稳定等特点，广泛适用于石油、化工、医药、生命科学、计量、轻工和科研等领域常规实验室所需要使用的加热制冷浴槽/循环器实验，也可以直接将样品放置在开口浴槽中恒温 and 小型外置测量单元的恒温以及发酵罐、旋光仪、电泳仪、光度计、色谱柱、粘度计、旋转蒸发仪、光度计、流变仪等产品的配套使用仪器；同时该设备可以配水浴式黑体模块（选配）可以用来做额温枪，红外测温仪，耳温计，医用体温计的校准；其次计量部门用于一、二级水银温度计，铂电阻等计量设备的检测校准。

产品特点

- 智能液晶显示控制器，PID控制技术，控温准确可靠；
- 多数据一屏显示，菜单式操作，界面，简单易懂，操作方便；
- 压力吸入泵，为外设槽提供恒温源且可内外循环切换；
- 加热器等关键零部件均采用进口SUS304不锈钢材质；
- 采用进口品牌压缩机，具有噪声低、降温快、效率高、能耗低等特点；
- 配有外置浴槽相连接的连接口；
- 外置浴液排空阀，方便客户需要时更换或排出槽内浴液；
- 容易拆卸的通风格栅，方便清洁制冷系统的冷凝器；
- 可容纳500ml烧杯配合粘度计直接插入水槽使用；

安全特点

- 超温切断加热源和干烧保护功能，使样品得到可靠保护，不发生意外；
- 压缩机延时启动功能，确保压缩机使用寿命；
- 整机具有漏电、过流、过压保护功能；

选配功能

- RS232可连接打印机进行数据打印；
- USB数据存储功能；
- 多段可编程液晶控制器，内置7段（每段程序9步）不同程序，方便用户随时调用；

注：RS232和USB二者只能选一，不可同时选择；

技术参数

技术指标	型号	BP-150（高精度制冷和加热循环槽）	BP-150J（高精度制冷和加热循环槽） 进口控制器
	型号	BP-150（高精度制冷和加热循环槽）	BP-150J（高精度制冷和加热循环槽） 进口控制器
浴槽最大容积		7L	
温度控制范围		-10℃~100℃（可定制最高温度为150℃）	
温度显示精度		0.01℃	
温度稳定度		±0.02℃	
制冷量-20℃时		150W	
降温速率（min）		37℃降至25℃≤20min	
升温速率（min）		25℃升至37℃≤6min	
制冷剂质量（g）		150	
控制器显示		LCD液晶屏	
循环泵最大流量		8L/min	
泵最大扬程		1.1m	
循环方式		内循环或者外循环	
液体进出管径		φ16mm	
载冷剂		10℃以上（纯净水）/10℃以下（50%乙二醇+50%纯净水）	
液槽开口/深度（mm）		150×150×150	
外形尺寸W×D×H（mm）		440×530×415(含控制头)	
整机功率		1200W	
电源规格		220V/50Hz	
价格		RMB12900	RMB35900

注：BP-150J标配德国Julabo控制器



生化/霉菌培养箱 01
04

低温培养箱 05
多箱体生化/霉菌培养箱 06

生物安全低温培养箱 07
半导体制冷低温培养箱 08

生物安全培养箱 09
恒温培养箱 10

隔水式恒温培养箱 13
多箱体恒温/微生物培养箱 14

CO₂培养箱 15
18

光照培养箱/人工气候箱 19
恒温恒湿箱 26

回旋振荡器 31
恒温培养摇床 33

恒温振荡器 35
大型恒温振荡器 36

落地振荡器 37
摇瓶机 38

叠加式-振荡培养箱 39
42

超低温冰箱 43
低温冷藏箱 45

液相液氮罐 46
干式运输液氮罐 48

生物安全柜 49
洁净工作台 50

干燥箱 52
真空干燥箱 59

加热循环箱 68
恒温振荡水槽 71

油浴锅 74
恒温水槽与水浴锅 76

药品稳定性试验箱 77
步入式药品试验室 83

老化试验箱 84
热空气消毒箱 84

高低温(交变)试验箱 85
高低温(交变)湿热试验箱 87

紫外气候试验箱 89
90

氙灯耐气候试验箱 91
盐雾腐蚀试验箱 92

电阻炉 93
96

旋转蒸发仪 97
分液漏斗振荡器 100

耐腐蚀隔膜泵 101
循环冷却器 102

干式冷阱 103
磁力搅拌器 104

顶置电动搅拌器 108
氮吹仪 109

离心机 110
漩涡混合仪 110

多管漩涡混合仪 111
孵育器/金属浴 112

微孔板迷你离心机 114
均质分散机 115

粘度计 117
122

高精度制冷和加热循环槽

制冷和加热循环槽



实验室仪器的升级换代产品
理想的实验室伙伴

持之一恒

我们只制造放心

www.yihengchina.com

www.yihengyiqi.com



精密恒温水槽

高档型

出口型

可选带电磁泵

突破现有国产水槽没有缺水防烧功能的缺陷，一次冲压成型不锈钢内胆，带有独立缺水防空烧功能和独立限温安全系统，保证安全运行不发生意外。

用途概述

适用于生物、化学、物理、植物、化工等科学上作精密恒温的直接加热和辅助加热之用；

产品特点

- 液晶显示屏，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，带定时功能，便于观察和操作；（可选配多段可编程液晶温度控制器）
- 一次性冲压成型不锈钢内胆，防腐蚀、易清洁；
- 不锈钢尖顶盖，可防止水分蒸发和水露进入试验样品造成污染；
- 具有缺水防空烧功能，出现缺水现象马上切断加热器，保证仪器安全运行，不发生意外；
- 可连接微型打印机、485通讯接口或USB数据接口；（选配）

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、多段可编程液晶温度控制器..... ￥1500元
- 2、RS485接口和通讯软件..... ￥600元
- 3、嵌入式打印机..... ￥2500元

注：RS485、打印机二选一

技术参数

技术指标 \ 型号	型号	BWS-12	BWS-12G (带电磁泵)	BWS-27	BWS-27G (带电磁泵)
电源电压	AC220V 50HZ				
输入功率	800W			1000W	
控温范围	RT+5 ~ 100℃		RT+5 ~ 80℃	RT+5 ~ 100℃	RT+5 ~ 80℃
恒温波动度	±0.2℃				
分辨率	0.1℃				
有效容积	11L			20L	
内胆尺寸	300×240×200			500×300×200	
外形尺寸	480×300×480			680×360×390	
定时范围	0 ~ 9999min				
价格	RMB2390		RMB3490	RMB3290	RMB4390

RS485通讯接口 ￥600元

通过连接电脑，显示、监控实验各项数据



多段可编程液晶温度控制器 ￥1500元



恒温水槽与水浴锅(两用)

新产品

专业型

新推出的BWS系列水槽/水浴锅两用槽，集公司多年在水槽与水浴锅领域研发与生产的成功经验，通过不断潜心研究，突破现有国产水槽与水浴锅没有缺水防烧功能的缺陷。BWS系列与一般水槽、水浴锅相比具有以下特点：集水槽与水浴锅为一体，一槽两用，一次冲压成型不锈钢内胆，并带有缺水防空烧功能和独立限温安全系统，保证安全运行不发生意外。可广泛使用与计量、生命科学、制药、医学、化工等领域。

产品特点

- 集水槽与水浴锅为一体，一槽两用；
- 一次冲压成型不锈钢内胆，便于内胆清洗工作；
- 液晶显示屏，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，带定时功能，简单易懂，便于观察和操作；（可选配多段程序控制器）
- 不锈钢网架搁板，可遮盖加热器和传感器等重要部件，避免使用中的碰坏；
- 烧杯孔大小可任意调节；
- 一次成型平板式不锈钢盖；
- 尖顶盖，可防止水分蒸发和水露进入试验样本造成污染；（选配）
- 透明塑料盖可选，可直观掌握样本状况；（选配）
- 可安放试管夹；（选配）
- 外壳为一体成型，ABS材料，耐酸碱腐蚀，外观新颖；
- 标配防干烧功能，5键控制，防干烧保护需要手动启停进行复位，避免自动重启带来的风险；
- 可选配独立限温保护，防止实验过程中的意外风险；

安全功能

- 具有缺水防空烧功能，出现缺水现象马上切断加热器，保证仪器安全运行；
- 独立限温报警系统，使样品得到可靠保护，不发生意外；
- 温度偏高和超温报警；



不锈钢网架隔板




BWS-0510

技术参数

技术指标 \ 型号	名称				
	BWS-5	BWS-10	BWS-20	BWS-0505	BWS-0510
电源电压	AC220V 50HZ				
消耗功率	400W	600W	1200W	1200W	1600W
控温范围	RT+5 ~ 99℃				
恒温波动度	±0.3℃				
跟踪报警	±2℃				
内胆尺寸 (mm) W×D×H	300×155×150	300×240×150	500×300×150	280×130×150	280×130×150 280×220×150
外形尺寸 (mm) W×D×H	345×210×280	345×295×280	550×360×280	450×395×260	526×395×260
定时范围	0 ~ 5999min				
备注	二孔	双列四孔	双列六孔	二孔 + 二孔	二孔 + 四孔
价格	RMB2390	RMB2890	RMB3590	RMB4090	RMB4790

注：每孔五圈规格尺寸:Φ32、Φ52、Φ72、Φ92、Φ112


多孔盖

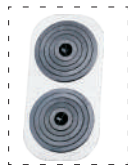

2孔



4孔

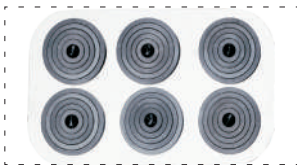

6孔



BWS-5



BWS-0505



BWS-20



BWS-0510

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、多段可编程液晶温度控制器 ￥1500元
- 2、RS485接口和通讯软件..... ￥600元
- 3、嵌入式打印机..... ￥2500元
- 4、尖顶盖 ￥350元

注：RS485、打印机二选一

生化/霉菌培养箱

01
04

低温培养箱

05
多箱体生化/霉菌培养箱

生物安全低温培养箱

07
半导体制冷低温培养箱

生物安全培养箱

09
恒温培养箱

10

隔水式恒温培养箱

13
多箱体恒温/微生物培养箱

18

CO₂培养箱

15
18

光照培养箱/人工气候箱

19
恒温恒湿箱

31
恒温培养摇床

33

恒温振荡器

35
大型恒温振荡器

36

落地振荡器

37
摇瓶机

38

叠加式-振荡培养箱

39
42

超低温冰箱

43
低温冷藏箱

45

液相液氮罐

46
干式运输液氮罐

48

生物安全柜

49
洁净工作台

50

干燥箱

52
真空干燥箱

59

加热循环槽

68
恒温振荡水槽

71

油浴锅

74
恒温水槽与水浴锅

76

药品稳定性试验箱

77
步入式药品试验室

83

老化试验箱

84
热空气消毒箱

84

高低温(交变)试验箱

85
高低温(交变)湿热试验箱

87

紫外耐候气候试验箱

89
90

氙灯耐候气候试验箱

91
盐雾腐蚀试验箱

92

电阻炉

93
96

旋转蒸发器

97
分液漏斗振荡器

100

耐腐蚀隔膜泵

101
循环冷却器

102

干式冷阱

103
磁力搅拌器

104

顶置电动搅拌器

108
氮吹仪

109

离心机

110
漩涡混合仪

110

多管漩涡混匀仪

111
孵育器/金属浴

112

微孔板迷你离心机

114
均质分散机

115

粘度计

117
122

122

恒温水槽与水浴锅

76

精密恒温水槽

75



药品稳定性试验箱

高低温(交变)试验箱

高低温（交变）试验箱，集公司多年在箱体设计方面成功经验，本着人性化设计理念，从客户的实际需求出发，在每一细节上尽力满足客户要求，为客户提供高品质的产品。

产品特点

人性化设计

- 全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前面；
- 进口温湿度控制器寿命长，高精度CFL20字×6行LCD显示器，键盘输入，操作简便；
- 箱体左侧有直径25mm或50mm测试孔，便于实验操作与测量温度；

品质保证

- 进口品牌压缩机和循环风机，使温度分布均匀。环保制冷剂效率高，能耗低，促进节能；
- 风道循环系统，保证工作室温湿度均匀；
- 采用进口304镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过度，搁板支架可以自由装卸，便于箱内的清洗工作；
- 多段可编程控制，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制和运行；

安全功能

- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断运行，并声光报警提示操作者。保证实验安全运行不发生意外；
- 温度偏高、偏低和超温报警；
- 压缩机过热、过流、过载保护，风机过热保护等；

方便的数据处理（选配）

- 可连接打印机或485通讯接口，具有USB数据转移接口（SD盘），用电脑显示，并打印温湿度和时间曲线，为试验过程数据储存与回放提供有力保证；

可程式触摸屏控制器 (BPHJ系列标配)

- 采用彩色液晶触摸式控制屏，菜单式操作界面，观察直观，易操作；
- 中英文操作界面可任意选择，屏幕可显示即时的温湿度运行曲线；
- 可设120组每组99段，999次循环，每段可设999小时59分钟，59秒；
- 具有屏幕锁定功能，避免人为触摸而更改试验数据或停机；
- 具有P.I.D自动演算功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定；
- 具有RS-232或RS-485通讯接口，可在电脑上设计程式，监视试验过程和执行开关机等功能；
- 在电脑上安装专业控制软件，可实现同时监测与控制30台设备；
- 在电脑上实时分析与存储数据，形成Excel文档或Word文档方便打印；

技术参数

型 号	BPH-高低温试验箱 BPHJ-高低温(交变)试验箱				
	BPH-060A(B、C) BPHJ-060A(B、C)	BPH-120A(B、C) BPHJ-120A(B、C)	BPH-250A(B、C) BPHJ-250A(B、C)	BPH-500A(B、C) BPHJ-500A(B、C)	BPH-1000A(B、C) BPHJ-1000A(B、C)
温度范围	A: -20℃~150℃; B: -40℃~150℃; C: -60℃~150℃				
温度波动度	±0.5℃				
温度均匀度	±2℃				
压缩机	原装进口压缩机、无氟环保制冷剂				
内胆/外形尺寸 (mm)(W×D×H)	400×380×450 650×1040×1650	500×400×600 700×1040×1750	600×600×700 800×1160×1850	800×700×900 1000×1204×1985	1000×1000×1000 1530×1500×1870
电源电压	A:AC220V 50Hz B:AC220V 50Hz C:AC220V 50Hz	A:AC220V 50Hz B:AC220V 50Hz C:AC380V 50Hz	A:AC220V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz	A:AC220V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz	A:AC380V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz
功率	2.7KW/3.0KW/4.2KW	3.3KW/4.9KW/7.1KW	3.9KW/5.5KW/7.7KW	4.8KW/6.7KW/6.7KW	8.4KW/9.9KW/11.4KW
价格	26900/32900/51900 31900/40900/61900	32900/43900/64900 39900/51900/72900	40900/53900/75900 48900/62900/84900	59900/74900/105000 69900/78900/108900	108000/119000/135000 110900/123000/138000

注：1、BPH系列配微电脑数显控制器，BPHJ系列配程式触摸屏控制器；
2、-40℃~150℃接到订单后，交货期为15个工作日，-60℃~150℃，接到订单后，交货期为30个工作日；



高低温试验箱



高低温（交变）试验箱

高低温(交变)试验箱

高温型

新产品

新一代高低温（交变）试验箱，集公司多年在箱体设计方面成功经验，本着人性化设计理念，从客户的实际需求出发，在每一细节上尽力满足客户要求，为客户提供高品质的产品。产品具有更宽的温度控制范围，温度控制更加精确，能耗更低，更加高效、节能、环保。

产品特点

人性化设计

- 全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前面；
- 采用多段可编程触摸屏控制器，菜单式界面，操作简便。可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制和运行；
- 箱体左侧有直径50mm或100mm测试孔，便于实验操作与测量温度；

品质保证

- 采用进口品牌压缩机、节能降耗的冷端输出控制技术，降低了40%以上的能耗，每小时低至1度电；
- 循环风机及风道循环系统，保证工作室温湿度分布均匀；
- 采用发泡技术，具有好的绝热效果，可节省能源消耗；
- 采用进口304镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，便于箱内的清洗工作；

安全功能

- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断运行，并声光报警提示操作者。保证实验安全运行不发生意外；
- 温度偏高、偏低和超温报警；
- 压缩机过热、过流、过载保护，风机过热保护，缺水保护等；

方便的数据处理（选配）

- 可连接打印机或232通讯接口，具有USB数据转移接口（SD盘），用电脑显示，并打印温湿度和时间曲线，为试验过程数据储存与回放提供有力保证；

自主研发触摸屏控制器

- 采用彩色触摸屏控制器，菜单式操作界面，观察直观，易操作；
- 中英文操作界面可任意选择，屏幕可显示即时的温湿度运行曲线；
- 可设100组每组100段，999次循环，每段可设999小时59分钟，59秒；
- 具有屏幕锁定功能，避免人为触摸而更改试验数据或停机；
- 具有PID自动演算功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定；
- 具有RS-232 通讯接口/以太网接口，可在电脑上设计程式，监视试验过程和执行开关机等功能；
- 具有USB接口，可实现资料数据备份，操作方便；
- 在电脑上实时分析与存储数据，形成Excel文档或Word文档方便打印；


技术参数

型 号	BPH-H高低温试验箱 BPHJ-H高低温(交变)试验箱				
	BPH-060A(B、C、D)H BPHJ-060A(B、C、D)H	BPH-120A(B、C、D)H BPHJ-120A(B、C、D)H	BPH-250A(B、C、D)H BPHJ-250A(B、C、D)H	BPH-500A(B、C、D)H BPHJ-500A(B、C、D)H	BPH-1000A(B、C、D)H BPHJ-1000A(B、C、D)H
温度范围	AH: -20~150℃、BH: -40~150℃、CH: -60~150℃、DH: -70~150℃ (最高可特制180℃)				
升温速率	≥2℃/min (+20~150℃)				
降温速率	≥1℃/min (+20~-70℃)				
温度均匀度	±1.5℃				
温度波动度	≤1℃				
温度分辨率	0.1℃				
样架规格	20kg/层 (2层)				
内胆/外形尺寸(mm) (W×D×H)	400×380×450 650×1285×1550	500×400×600 740×1255×1650	600×600×700 800×1295×1750	800×700×900 1000×1410×1925	1000×1000×1000 1530×1500×1870
电源	A:AC220V 50Hz B:AC220V 50Hz C:AC220V 50Hz D:AC220V 50Hz	A:AC220V 50Hz B:AC220V 50Hz C:AC380V 50Hz D:AC380V 50Hz	A:AC220V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz D:AC380V 50Hz	A:AC220V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz D:AC380V 50Hz	A:AC380V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz
安装功率/电流	2.7KW/3.0KW/4.2KW/4.2KW	3.3KW/4.8KW/7.1KW/7.1KW	3.9KW/5.5KW/7.7KW/7.7KW	4.8KW/6.7KW/6.7KW/6.7KW	8.4KW/9.9KW/11.4KW/11.4KW
价格	32300/41200/64800/69900 39800/51200/77300/83600	39800/54800/81200/87800 49800/64800/91200/98500	51200/67300/94800/102500 61200/78600/106200/114600	74800/93600/131200/141800 87500/98800/136200/147000	--

注：1、带“J”的型号具有编程功能；
2、-40℃~150℃接到订单后，交货期为15个工作日，-60℃~150℃、-70℃~150℃接到订单后，交货期为30个工作日；
3、如需定制180℃高低温（交变）试验箱，加收市场价15%费用；



生产/霉菌培养器	0
低温培养器	0
多罐体生化/霉菌培养器	0
生物安全低温培养器	0
半导体制冷低温培养器	0
生物安全培养器	0
恒温培养箱	1
隔水式恒温培养箱	1
多罐体恒温/微生物培养箱	1
CO ₂ 培养箱	1
光照培养箱/人工气候箱	1
恒温恒湿培养箱	1
回旋振荡器	3
恒温振荡培养床	3
恒温振荡器	3
大型恒温振荡器	3
落地振荡器	3
摇瓶机	3
叠加式-振荡培养箱	3
超低温冰箱	4
低温冷藏箱	4
液相液氮罐	4
干式运输液氮罐	4
生物安全柜	4
洁净工作台面	5
干燥箱	5
真空干燥箱	5
加热振荡培养箱	6
恒温振荡水浴	7
油浴锅	7
恒温水浴与水浴锅	7
药品稳定性试验箱	8
步入式药品试验箱	8
老化试验箱	8
热空气消毒箱	8
高低温(交变)试验箱	8
高低温(交变)湿热试验箱	8
紫外耐候试验箱	8
氙灯耐候试验箱	9
盐雾腐蚀试验箱	9
电阻炉	9
旋转蒸发器	9
分液漏斗振荡器	9
耐腐蚀隔膜泵	9
循环冷却器	9
干式冷却机	9
磁力搅拌机	9
顶置电动搅拌机	9
氢氟仪	9
离心机	9
漩涡混匀仪	9
多管漩涡混匀仪	9
孵育器/金库箱	9
微孔板振荡离心机	9
均质分散机	9
粘度计	9

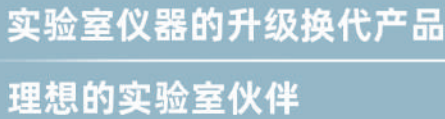

我们只制造放心

www.yihengchina.com

www.yihengyiqi.com



高档型

新一代箱式电阻炉，集公司多年在电阻炉研发和制造方面的成功经验，引进消化国外先进技术，以国外需求客户为导向，不断技术创新。具有可编程控制功能，可编制温度，时间及升温快慢速率等程序；硅酸铝陶瓷纤维炉膛，炉体采用双层结构设计，并配有冷却风扇，使用过程中炉体表面接近常温。

产品特点

人性化设计

- 硅酸铝陶瓷纤维炉膛电阻炉：具有重量轻，升温速度快，节能、省时等特点，能满足各种快速烧结要求；
- 箱体壁和炉膛体采用双层结构设计，并配有冷却风扇，使用过程中箱体表面温度接近于常温；
- 微电脑温度程序控制器，控温精确可靠；

多段可编程控制器

- 微电脑程序控制温度、时间及升温速度快慢等程序，以极快的速度进行各种烧结试验；
- 可编程控制器，可预设 7 组 63 步，每组 9 步，每组设置时间 0 ~ 5999 分；
- 多段可编程控制，真正实现自动控制和运行；

安全功能

- 具有过温保护器，门开关控制器，箱体表面冷却风扇和电阻炉异常报警功能（①加热器故障，②温度传感器故障，③内存内容异常，④超温异常），并声光报警提示操作者，保证电阻炉安全运行不发生意外；

节能设计

- 全面的安全性能设计防止高能耗情况发生，炉体采用双层结构，并配有冷却风扇，使用过程中炉体接近常温；

技术参数



可程式箱式电阻炉

型 号	BSX2-2.5-12TP	BSX2-5-12TP	BSX2-6-12TP
炉膛尺寸W×D×H(mm)	120×200×80	200×300×120	200×300×200
外形尺寸W×D×H(mm)	390×597×640	520×680×660	520×680×730
炉膛容积	2L	7.2L	12L
炉膛材料	陶瓷材料		
安全功能	过温保护器，门开关控制器，箱体表面冷却风扇，电阻炉异常报警功能 (① 加热器故障，② 温度传感器故障，③ 内存内容异常，④ 超温异常)		
最高温度	1200℃		
使用温度	≤1100℃		
控温仪表	程序PID控温仪		
控温精度	±1℃		
升/降温速率	≤45℃/min，1000-300℃≥5℃/min		
加热元件	铁铬铝电热合金丝（OCr21A16Nb）		
电源电压	AC220V 50HZ		
额定功率	2.5KW	3KW	4KW
工作电流	12A	14A	19A
炉体	冷轧钢板外壳/不锈钢内门、双层、带风扇		
价格	RMB24900	RMB29900	RMB39500

1300°C

1600°C

集公司多年设计和制造经验,专供工矿企业、大专院校、科研单位的实验室作为化学元素分析和小型钢件的淬火、退火、回火等高温热处理用;还可作金属、石器、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。

产品特点

- 炉门设计，使开门操作安全简便，确保炉内高温热气不外漏；
- 微电脑PID控制器，操作简便，控温精确、可靠、安全；
- 耐腐蚀轻质炉膛，确保经久耐用；（耐火砖炉膛或陶瓷纤维炉膛任意选择）
- 极好的门密封使得热量损失最小，增加了炉膛内温度的均匀性；
- 可编程控制器，10组程序，每组可设定升温或停留，并提供程序化的温度、时间、加热功率的循环；（可程式箱式电炉具有此功能）
- 多段可编程控制，可以简化复杂的试验过程真正实现自动控制和运行。炉门内胆和箱体面板均采用不锈钢材料制作，具有抗腐蚀、高温不变型等特点；（可程式箱式电炉具有此功能）

安全功能

- 操作时只需开启炉门，炉门安全开关会自动断开加热电源，确保操作者安全；
- 设有过流、过压、过热等多种安全保护措施，确保电炉安全使用；
- 选用陶瓷纤维板作为隔热保温材料，具有隔热效果好，箱壳表面温度低等特点；

炉膛选择(用户可根据自己需要选用)

- 耐火砖炉膛（N系列）选用传统耐火材料，应用范围广、寿命长，性价比高等特点；



可程式箱式电阻炉

技术参数

型号	SX2-4-13NP	SX2-8-13NP	SX2-8-16NP	SX2-12-16NP
炉膛尺寸W×D×H(mm)	150×250×100	200×500×180	150×300×120	200×400×160
外形尺寸W×D×H(mm)	570×670×710	940×885×850	1002×735×840	1055×840×910
容积	4L	18L	5L	13L
最高温度（℃）	1300	1300	1600	1600
电源	220V/50HZ	380V/50HZ	380V/50HZ	380V/50HZ
输入功率（W）	4KW	8KW	8KW	12KW
加热元件	硅碳棒、硅钼棒			
备注	“N”表示：耐火砖炉膛 “P”表示：可编程电阻炉 控温精度：±1℃ 温度均匀度：5℃（垂直方向）			
价格	RMB20900	RMB35900	RMB67900	RMB74900

注：可选配30段可编程控制器，每段时间设定最大值，99小时59分 另加RMB500元。外形尺寸(含风机罩，不含把手)/长×宽×高

生物/霉菌培养箱 0
 低温培养箱 0
 多箱体生化/霉菌培养箱 0
 生物安全低温培养箱 0
 半导体制冷低温培养箱 0
 生物安全培养箱 0
 恒温培养箱 1
 隔水式恒温培养箱 1
 多箱体恒温/微生物培养箱 1
 CO₂培养箱
 光照培养箱/人工气候箱 1
 恒温恒湿箱 2
 回旋振荡器 3
 恒温培养摇床 3
 恒温振荡器 3
 大型恒温振荡器 3
 落地振荡器 3
 摇瓶机 3
 叠加式—振荡培养箱 3
 超低温冰箱 4
 低温冷藏箱 4
 液相液氮罐 4
 干式运输液氮罐 4
 生物安全柜 4
 洁净工作台 5
 干燥箱 5
 真空干燥箱 5
 加热循环水 6
 恒温热泵水槽 6
 油浴锅 7
 恒温水槽与水浴锅 7
 药品稳定性试验箱 8
 步入式药品试验箱 8
 老化试验箱 8
 热冲击试验箱 8
 高低温(交变)试验箱 8
 高低温(交变)湿热试验箱 8
 紫外耐候气候试验箱 8
 氙灯耐候气候试验箱 9
 盐雾腐蚀试验箱 9
 电阻炉 9
 旋转蒸发仪 9
 分液振荡器 9
 耐腐蚀隔膜泵 10
 循环冷却器 10
 干式冷却 10
 磁力搅拌器 10
 顶置电动搅拌机 10
 氨气仪 11
 离心机 11
 漩清混匀仪 11
 多管漩涡混匀仪 11
 多管器/金属浴 11
 微孔板离心机 11
 均质分散机 11
 粘度计 11

96



实验室仪器的升级换代产品
理想的实验室伙伴

持之一恒

我们只制造放心

www.yihengchina.com
www.yihengyiqi.com



旋转蒸发仪

进口替代

全新设计

实验室仪器旋转蒸发仪主要用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂。尤其对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏。

产品特点

人性化设计

- 手动/自动升降，结构简单、稳定、可靠，单手可轻松操作；
- 液晶显示器，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，旋钮式设定，简单易懂，便于观察与操作；PID控制器，转速、温度设定简便快捷；
- 斜式双层蛇形盘管设计，冷却面积达到0.15m²,最大蒸发能力可达到Max.22ml/min；确保从少量到大量样品均能高效回收；
- 双层高效冷凝器，防止蒸发冷凝器倒流设计；并且冷凝器位置可调节；
- 专业的密封系统设计，高弹性PTFE材料密封圈，具有耐高温、耐腐蚀，并且经久耐用等特点，比国内厂家使用寿命增加三倍以上；
- 水浴/油浴双重加热模式，设有防干烧断电功能，锅体由耐高温阻燃材料制成，可防止意外发生；

安全功能

- 水浴锅安全等级设计，具有防干烧断电功能，锅体由耐高温阻燃材料制成，可防止意外发生；
- 锅内设有独立限温报警系统，超过限温温度后自动停止工作，保证试验安全运行不发生意外；
- 双层高效冷凝器，防止蒸发冷凝器倒流设计；
- 具有过压、超载保护装置；

技术参数

技术参数	型号	RV-211M	RV-211MO	RV-211A	RV-211AO
旋转速度		20~180rpm			
浴锅控温范围		RT+5~99℃	RT+5~180℃	RT+5~99℃	RT+5~180℃
蒸发能力		22ml/min			
转速设定		旋钮设定 + 液晶显示			
升降方式		手动		自动	
电动升降功能		无		直流无刷电机	
主电机		直流无刷			
冷凝器		蛇形冷凝管冷凝面积 0.15m ² 、1L 旋转瓶、1L 收集瓶、TS29/38 瓶夹、球磨口 S35/20			
真空密封圈		PTFE+ 特氟龙涂层			
浴锅材质		不锈钢耐腐蚀涂层			
加热功率		1000W			
工作环境温度		5~35℃			
浴锅尺寸 (内)φ×H (mm)		φ230×130			
电源输入		220V 50/60HZ			
价格		RMB9900	RMB11300	RMB12900	RMB14500


型号	升降方式		玻璃套装	恒温浴锅
	自动	手动	高硼硅玻璃	外置加热
普及型	RV-211A	√	-	√
	RV-211AO			
	RV-211M	-	√	√
	RV-211MO			

旋转蒸发仪

进口替代


全新设计

产品概述

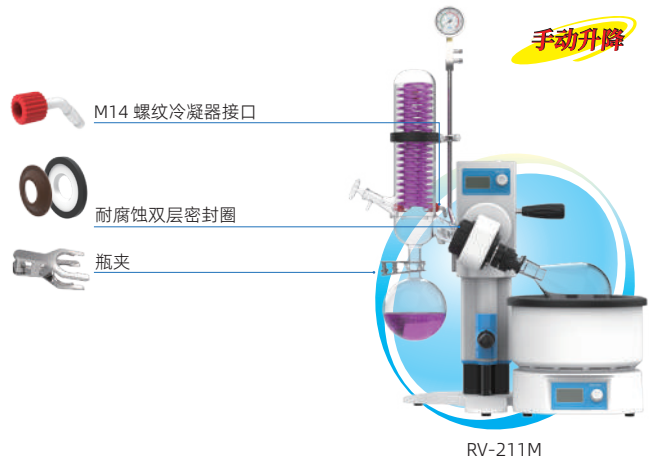


恒温浴锅(水/油两用)

普及型旋转蒸发仪标配外置加热浴锅，便于清洗。

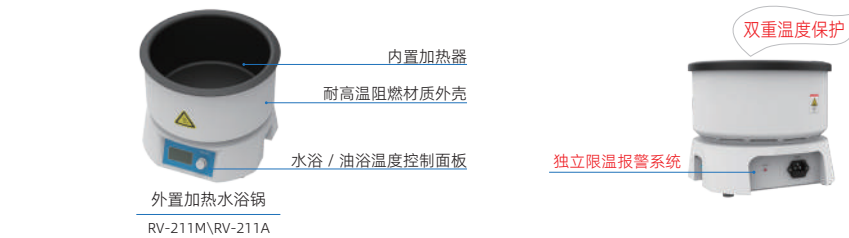

高效利用率，可同时给两台旋转蒸发仪循环使用

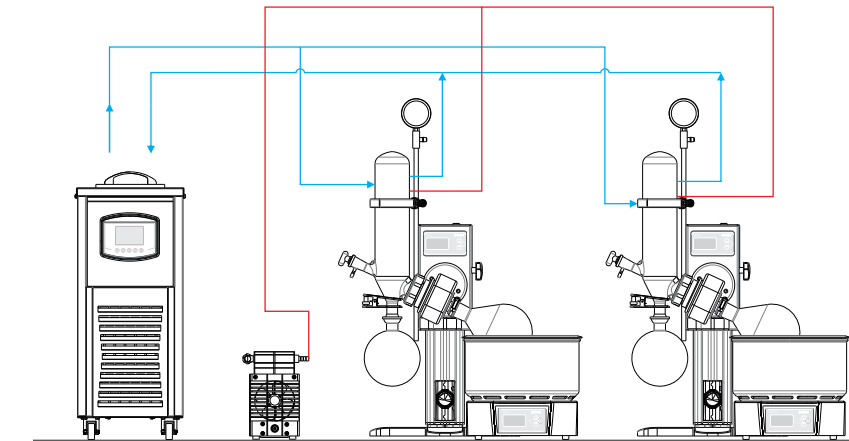

冷却 ————

减压 ————

条件：

- 室温 20℃ AC 220V 50HZ
- 1L 旋转瓶，水，分别是 500ml
- 水浴锅温度：设定 40℃
- 冷却液（酒精 / 水）：设定 10℃
- 旋转蒸发仪回转速：120rpm

生化/霉菌培养箱 01

04

低温培养箱 05

多箱体生化/霉菌培养箱 06

生物安全低温培养箱 07

半导体制冷低温培养箱 08

生物安全培养箱 09

恒温培养箱 10

隔水式恒温培养箱 13

多箱体恒温/微生物培养箱 14

CO₂培养箱 15

18

光照培养箱/人工气候箱 19

恒温恒湿箱 26

回旋振荡器 31

恒温培养摇床 33

恒温振荡器 35

大型恒温振荡器 36

落地振荡器 37

摇瓶机 38

叠加式-振荡培养箱 39

42

超低温冰箱 43

低温冷藏箱 45

液相液氮罐 46

干式运输液氮罐 48

生物安全柜 49

洁净工作台 50

干燥箱 52

真空干燥箱 59

加热循环槽 68

恒温振荡水槽 71

油浴锅 74

恒温水槽与水浴锅 76

药品稳定性试验箱 77

步入式药品试验室 83

老化试验箱 84

热空气消毒箱 84

高低温(交变)试验箱 85

高低温(交变)湿热试验箱 87

紫外耐候试验箱 89

90

氙灯耐候试验箱 91

盐雾腐蚀试验箱 92

电阻炉 93

96

旋转蒸发仪 97

分液漏斗振荡器 100

耐腐蚀隔膜泵 101

循环冷却器 102

干式冷阱 103

磁力搅拌器 104

顶置电动搅拌器 108

氮吹仪 109

离心机 110

漩涡混合仪 110

多管漩涡混合仪 111


孵化器/金属浴 112

微孔板迷你离心机 114

均质分散机 115

117

粘度计 122

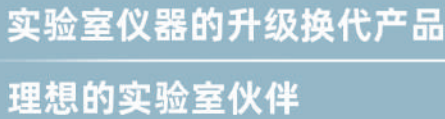

我们只制造放心

www.yihengchina.com

www.yihengyiqi.com



中试级旋转蒸发仪

产品概述

实验室仪器旋转蒸发仪主要用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂。尤其对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏，可以分离和纯化反应产物。旋转蒸发仪的基本原理就是减压蒸馏，也就是在减压情况下，当溶剂蒸馏时，蒸馏烧瓶在连续转动。

产品特点

人性化设计

- 大容量、大口径旋转瓶，蒸发面积大，置于水浴锅中，边旋转边加热，配有减压装置，使溶剂高效蒸发。可用于生物、医药、化工、食品等领域的中试。与隔膜真空泵、循环冷却器等组成配套装置；
- 液晶显示器，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，旋钮式设定，简单易懂，便于观察与操作，PID控制器，转速、温度、时间设定简便快捷；
- 浴锅自动升降装置，多极带传动振动小，升降平稳，结构简单、噪音低，易操作；
- 双层高效冷凝管，冷却面积大，蒸发能力强，确保从少量到大量样品均能高效回收；
- 专业的密封系统设计，高弹性 PTFE 材料密封圈，具有耐高温、耐腐蚀，经久耐用等特点，减少实验室操作人员频繁更换密封垫频率，比传统厂家密封圈使用寿命增加一倍以上；
- 设有自动切换阀，在不影响系统负压指标和溶剂蒸馏的情况下进行连续收集；
- 特氟龙放料阀，可方便快速放出回收瓶中收到的料，耐腐蚀，无污染；
- 箱体使用带地脚螺栓脚轮，设备运行时可固定在地上，使实验过程稳定、可靠不发生意外；
- 水浴 / 油浴双重加热模式，设有防干烧断电功能，锅体由耐高温阻燃材料制成，防止意外发生；（标配水浴）
- 自动化控制，可选配真空控制器，对样品的真空度进行控制，实现溶剂分离自动化；

安全功能

- 锅外壳与内胆采用特殊隔热结构设计，使锅外壳表面温度低，避免实验人员使用中不小心烫伤，防止意外发生；
- 浴锅内层由特氟龙涂层制成，可耐高温、耐腐蚀，易清洗，避免实验过程产生交叉污染；
- 双层高效冷凝器，防止蒸发冷凝器倒流设计；
- 水浴锅安全等级设计，具有防干烧断电功能，锅体由耐高温阻燃材料制成，防止意外发生；
- 锅内设有独立限温报警系统，超过限温温度后自动停止工作，保证试验安全运行不发生意外；
- 关键电气部件都装有过流、过温、过载等安全保护，可防止设备意外发生；
- 当设备出现故障时，显示屏会出现故障信息，保证故障信息一目了然；



技术参数

型 号		BRE-05	BRE-10	BRE-20	BRE-50
规 格		5L	10L	20L	50L
性能	旋转速度范围 (rpm)	20-140	20-130	20-130	20-110
	蒸发能力 (Max.L/h)	2	3.5	4	9
	浴锅控温范围	水: RT+5 ~ 99℃ 油: RT+5 ~ 180℃ (选配)			
	温度精度	±1℃			
真空抽气 接口	安全保护	电机过流保护, 液体膨胀式过温保护, 漏电保护, 感应式防干烧保护			
	显示方式	数码显示			
	水槽升降方式	电动升降			
	总功率	2300W	3300W	4300W	5300W
	冷凝面积 (M²)	0.28	0.49	1.29	1.75
	旋转瓶容积 / 试剂瓶容积	5L	10L	20L	50L
	收料瓶容积	3L	5L	10L	20L
	密封圈	PTFE 特氟龙涂层耐腐蚀密封垫			
	升降行程 (mm)	150	170	170	260
支架	无支架	有支架			
水浴锅	尺寸 (直径 × 深度 mm)	直径 280×175	直径 365×225	直径 445×250	直径 552×320
	材料	SUS304 不锈钢锅体 + 耐高温特氟龙涂层 (PTFE)			
接口尺寸	冷却循环口 (外径)	14mm	18mm		
外型尺寸 (含玻璃瓶)W×D×H(mm)		860×410×1120	1100×540×2060	1200×570×2060	1300×610×2150
使用电源 / 频率		220V 50Hz/60Hz			
价格		RMB15900	RMB25900	RMB37900	RMB49900

附件

名称	产品图片	描述	名称	产品图片	描述
蒸发瓶		蒸发瓶 容量 5L 蒸发瓶 容量 10L 蒸发瓶 容量 20L 蒸发瓶 容量 50L	主冷凝管		蒸发瓶 容量 5L 蒸发瓶 容量 10L 蒸发瓶 容量 20L 蒸发瓶 容量 50L
收集瓶TS35/20		收集瓶 容量 3L 收集瓶 容量 5L 收集瓶 容量 10L 收集瓶 容量 20L	副冷凝管		副冷凝管 旋蒸 10L 副冷凝管 旋蒸 20L 副冷凝管 旋蒸 50L
旋转玻璃轴		适用型号 旋蒸 5L 适用型号 旋蒸 10L 适用型号 旋蒸 20L 适用型号 旋蒸 50L	固定夹具		适用规格 40 瓶口夹套 适用规格 50 瓶口夹套 适用规格 60 瓶口夹套 适用规格 80 瓶口夹套
导气瓶		适用型号 旋蒸 5L 适用型号 旋蒸 10L 适用型号 旋蒸 20L 适用型号 旋蒸 50L	瓶口密封垫		适用规格 40 瓶密封垫 适用规格 50 瓶密封垫 适用规格 60 瓶密封垫 适用规格 80 瓶密封垫
放气阀		适用型号 旋蒸 5L 适用型号 旋蒸 10L 适用型号 旋蒸 20L 适用型号 旋蒸 50L	蒸发瓶托架		适用型号 旋蒸 5L 适用型号 旋蒸 10L 适用型号 旋蒸 20L 适用型号 旋蒸 50L

分液漏斗振荡器


BFS-6分液漏斗振荡器通过振荡频率、振荡幅度控制,实现对分液漏斗的分液混匀。具有振荡时间可调、振动幅度大、速度快、样品支架可适用多种规格的分液漏斗,最多可以同时处理6个样品,能大幅度提高工作效率,减轻工作强度。广泛应用于食品检验、化学萃取、混合提取等场合。如酯合成的实验,有机化合物的提取,水中油的提取,环境激素的提取,土壤中重金属的溶出实验,农作物中的杀虫剂和食品添加剂的测定等。

产品特点

- 体积小、低噪音、运行平稳可靠；
- 宽电压设计，适用范围更广；
- 样品托架可自由滑动，安放或取样简单方便；
- 适用于不同规格的分液漏斗，范围为250ml~500ml，2L需要定制；
- 人性化控制，数显定时功能，大大提高工作效率；
- 液晶触摸屏操作显示振荡速度和运行时间，数值一目了然；
- 振荡速度设有无级调速功能，启动和变速时都有缓冲功能，减少了样品对容器的冲击力；

技术参数


技术指标	型号	BFS-6
电源		200~240V/50-60Hz
功率（W）		650
振幅（mm） / 振荡方式		40 / 垂直
转速范围（rpm）		60~300
转速显示		4.3寸触摸屏
定时范围（min）		0~9999
适用分液漏斗规格		250ml~500ml， 2L需要定制
工作环境温度℃		5℃~40℃
工作环境湿度%		80%
尺寸（W×D×H） mm		560×440×520
重量（kg）		52

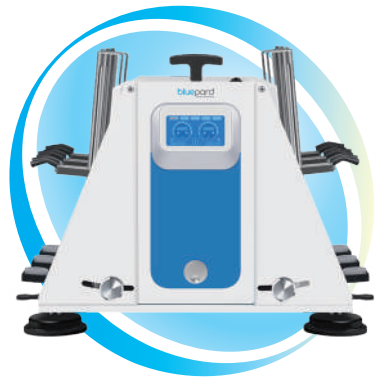

99

100

分液漏斗振荡器

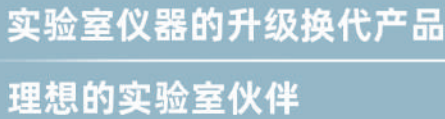

我们只制造放心

www.yihengchina.com

www.yihengyiqi.com



循环冷却器

进口替代

全新设计

产品概述

新一代小型循环冷却器，全新无氟设计，绿色环保，使您始终走在健康生活的前沿，引进消化国外技术，具有控温准确、容积小、品牌压缩机和循环泵噪声低、流量快、降温快、效率高、能耗低；不仅促进节能，而且使用寿命长，与传统设备相比，降温时间减少 35%。

产品特点


- 液晶显示控制器，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，控温准确可靠，随时确认仪器的运行情况；
- 压缩机过热、过载保护，浴槽溶液温度偏高，偏低及制冷系统过压时，显示闪烁蜂鸣报警等功能；
- 开放式浴槽可以作为预冻槽、低温槽使用，放入玻璃器皿，可应用于酸性溶液和有机溶液恒温实验；
- 开启浴槽盖，方便实验人员实时观测浴槽内的冷凝液状态；
- 换热器管采用 304 不锈钢，耐磨损，振动不易断裂，易清洗，方便实验人员维护；
- 前挡板采用磁性吸附设计，无需拆卸工具，即可快速打开盖板清洗冷凝器上的灰尘；
- 外形紧凑的结构设计，可满足空间狭小的实验室使用要求；
- 一台循环冷却器可同时冷却多台旋转蒸发仪，满足冷却效果。实现一机多用；
- 选配 R485 通讯接口，用于电脑显示，或导出实验数据，为实验过程数据储存与回放提供有力保证；



扬程 / 流量曲线

11

102

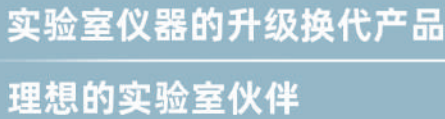

我们只制造放心

www.yihengchina.com

www.yihengyiqi.com



干式冷阱

产品概述

冷阱是在冷却的表面上以凝结方式捕集气体的阱，置于真空容器和泵之间，用于吸附气体或捕集油蒸汽的装置。干式冷阱区别于一般冷阱，无需冷冻介质，直接利用缸体冷却，具有冷却面积大，回收率高等特点，广泛应用于蒸馏浓缩过程中的尾气回收，配套真空干燥箱的有机溶剂提取和收集。

人性化设计

- 紧凑的结构设计可满足空间狭小的实验室使用要求;
- 采用钢化玻璃顶盖, 方便实验人员实时观测冷阱槽内的回收液状态;
- 冷阱槽前挡风板采用磁性盖板设计, 实验人员无需拆卸工具, 即可快速打开前盖板清洗冷凝器的吸附灰尘;
- 冷阱槽采用ANSI304不锈钢, 具有不生锈、耐腐蚀、易清洁的特点;
- 槽体配备排水阀及液体收集管, 便于收集槽内液体, 方便槽体清洁维护;

空气直冷式

- 干式冷阱采用直冷方式，无需使用其他冷却介质，采用缸体直接冷却，冷却接触面积更大，具有回收效率高，使用方便等优势；

提高真空效率

- 干式冷阱可配套真空干燥箱，真空干燥箱在干燥过程中，如果样品含水量大将会产生大量水汽，这些水汽如果仅靠真空泵来排除，真空泵的工作效率将会降的极低；

保护真空泵

- 抽真空过程中，经常会有腐蚀性试剂的存在，腐蚀性试剂会转化为气体分子通过管路流经真空泵排入大气。干式冷阱可以将腐蚀性气体在进入真空泵之前，被有效的冷凝收集，降低腐蚀性气体对真空泵的损伤，延长真空泵的使用寿命；

液晶显示控制系统

- 液晶显示控制器，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，控温精准可靠，可方便设置及显示冷阱槽内温度，随时确认仪器的运行情况；

节能环保

- 冷阱制冷系统采用国际先进无氟制冷技术，使用国际品牌压缩机和循环风机，环保制冷剂效率高，能耗低。且噪音低、体积小、降温快，使用寿命长，与传统设备相比，可减少降温时间30%以上，且长期运行性能始终保持稳定；

安全功能

方便的数据处理（选配）

- 压缩机过热、过流、过载保护；
- 温度偏高、偏低蜂鸣报警功能；
- 压缩机过压报警功能；
- 可选配打印机或485通讯接口、USB接口，用于电脑显示，或导出实验数据，为实验过程数据储存与回放提供有力保证；

技术参数

技术指标\型号	BCT-D02	BCT-D05	BCT-D09
收集方式	依靠槽体直接冷却		
除湿容量（H ₂ O）	max 0.5kg	max 2kg	max 4kg
空载最低温度	- 40℃		
制冷功率（hp）	0.45	1	1.25
制冷剂	R404A		
阱体材质	SUS 304		
阱体内尺寸（mm）	φ116×185	φ155×260	φ200×310
容积（L）	2	5	9
吸排气连接口径	KF16		
放水连接口径	DN10		
传感器种类	pt100*2		
显示精度（℃）	0.5℃		
整机功率（W）	400	550	800
电源规格	AC 220V/50HZ		
安全保护	压缩机延时启动、整机漏电、过流、过压保护		
整机重量（Kg）	28	36	42
外形尺寸（W×D×H）(mm)	300×500×578	340×532×700	390×542×738
环境温度范围	5 ~ 35℃		
环境相对湿度	≤ 65%RH		
价格	RMB13900	RMB16900	RMB21900

加热磁力搅拌器 (陶瓷型)

恒温磁力搅拌器(陶瓷型)

用途概述

磁力搅拌器是由微电机带动磁铁旋转产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子转动, 从而对容器内液体进行搅拌、混合或辅助加热, 以便溶液在设定温度进行充分混合, 可广泛应用于生物、医药、化学等领域。

产品特点

- 液晶显示屏，菜单式操作界面，温度、转速和倒计时等参数一屏显示，简单易懂，便于观察和操作；
- 具有微电脑控制技术，确保搅拌粘度不断变化的情况下转速保持恒定；
- 铝合金压铸外壳，有耐温和耐常规腐蚀易清洁等特点；
- 台面由陶瓷材料一体成型制作而成，既有良好的导热效果，又具有耐腐蚀性能，平滑的搅拌台面易清洁，无污染物停留；
- 输出扭力大，适合搅拌低粘度大容量或高粘度小容量的溶液；（不同机型不同容积）
- 控制面板上方设计有防腐蚀导液槽，即使搅拌过程中液体溢出也不会造成搅拌器内电子器件的损坏；
- 采用无刷直流电机，运转更平稳、寿命更长、控速更精准，能正、反转搅拌；
- 可设置个性化功能：延时启动、正反转、华氏温度、自整定、报警方式、上电模式、定时结束后恒温、恢复出厂值；

安全保护

- 温度偏差保护：A和B系列实测温度超过设定温度某个值时（3℃~30℃，默认6℃）会停止加热；
- 极限温度保护：对A和B系列加热盘温超过极限温度（330℃或某值）后会自我保护性暂停加热，冷却后恢复加热功能，不需用户干预；
- 防烫警示灯：A和B系列工作盘温度超过50℃指示灯闪烁，提醒用户工作盘及容器、溶液等高于50℃状态，不能触碰；
- 延时关机防烫警示：部分A和B机型关闭主机开关后，若盘温超45℃，显示屏仍显示盘温并闪烁，上排显示Hot，指示灯闪烁，提醒用户不能触碰盘面及容器，在盘温低于45℃才关闭显示屏和指示灯；
- A型机对外接温度传感器有升温缓慢的监测判断并显示报警代码提醒；
- 特殊保护：可选配防烫罩，盘面四周一定高度的围栏，对围栏高度四周区域有一定阻挡侧向意外触碰的作用；（选配）

陶瓷型搅拌器分类

- 恒温磁力搅拌器：A系列外接测温传感器，可直接测得并控制容器内的液体温度，包含B/C的功能；
- 加热磁力搅拌器：B系列仅控制盘面温度，可达400℃，包含C机型的功能；
- 磁力搅拌器：C系列无加热功能仅作搅拌；

技术参数

技术指标 \ 型号	BM-09A5T	BM-09A12T	BM-09B5T	BM-09B15T	BM-09C15T
盘面材料	陶瓷面板				
最大搅拌容量 (L,H ₂ O)	5	12	5	15	15
搅拌转速, 无极调速(rpm)	100~1600 (2000rpm定制)				
加热功率 (Max.,W)	1000W	1200W	1000W	1200W	—
输入功率 (Max.,W)	1050W	1250W	1050W	1250W	50W
溶液控温范围 (°C)	RT+5 ~ 200°C		—		—
工作盘控温范围 (°C)	—		RT+5 ~ 400°C		—
控制器	液晶屏显示、按键-旋钮独立控制加热和旋转				按键-旋钮控制
保护功能	有 (超温3~30°C或盘内达到极限温度就停止加热)				—
定时功能	1 ~ 99:59 (99 小时 59 分钟)				
安全设计	关键部位防水、隔热、散热设计				
温度控制精度	±0.3°C		±0.5°C		—
工作盘面尺寸 (mm)	190×190				
外型尺寸 (W×D×H) (mm)	210×330×130	210×330×130	210×330×130	210×330×130	210×330×130
单机重量(Kg)	5.0	5.0	4.5	4.5	4.0
价格	RMB3860	RMB4390	RMB3280	RMB3750	RMB3250

注：以H₂O作为标准来计量，液体粘度不同搅拌容量将有所差异



A系列恒温磁力搅拌器



B/C系列磁力搅拌器

生化/霉菌培养基	0
低温培养基	0
多相性生化/霉菌培养基	0
生物安全低温培养基	0
半导体制冷低温培养基	0
生物安全培养基	0
恒温培养基	0
隔水式恒温培养基	1
多相性恒温/微生物培养基	1
CO ₂ 培养基	1
光照培养基/人工气候箱	1
恒温恒湿箱	2
回旋振荡器	3
恒温培养振荡器	3
恒温振荡器	3
大型恒温振荡器	3
落地振荡器	3
摇瓶机	3
叠加一振荡培养基	3
超低温冰箱	4
低温冷藏箱	4
液相液氮罐	4
干式运输液氮罐	4
生物安全柜	4
工作平台	5
干燥箱	5
真空干燥箱	5
加热循环槽	6
恒温振荡水槽	7
油浴槽	7
恒温水槽与水箱浴	7
药品稳定性试验箱	7
步入式药品试验箱	8
老化试验箱	8
热空气消毒箱	8
高低温(交变)试验箱	8
高低温(交变)湿热试验箱	8
紫外耐候气候试验箱	8
氙灯耐候气候试验箱	9
盐雾腐蚀试验箱	9
电阻炉	9

磁力搅拌器(陶瓷型)

01	04	生化/霉菌培养箱
05	低温培养箱	
06	多箱体生化/霉菌培养箱	
07	生物安全低温培养箱	
08	多导体冷却低温培养箱	
09	生物安全培养箱	
10	恒温培养箱	
13	隔水式恒温培养箱	
14	多箱体恒温/低温培养箱	
15	CO ₂ 培养箱	
16	光照培养箱/人工气候	
29	恒温恒湿培养箱	
31	回旋振荡器	
33	恒温培养摇床	
35	恒温振荡器	
36	大型恒温振荡器	
37	落地振荡器	
38	摇瓶机	
39	叠式加一层振荡培养箱	
42		
43	超低温水箱	
45	低温冷藏箱	
46	液相液氮罐	
48	干式液氮液氮罐	
49	生物安全柜	
50	净工作台	
52	干燥箱	
59	真空干燥箱	
68	加热循环水槽	
71	恒温振荡水浴锅	
74	浴槽	
76	恒温水浴锅与水浴锅	
77	药品稳定性试验箱	
83	步入式药品试验箱	
84	老化试验箱	
84	恒温空气烤箱	
85	高低温(交变)试验箱	
87	高低温(交变)湿热试验箱	
89	紫外气候试验箱	
91	氙灯气候试验箱	
92	盐雾腐蚀试验箱	
93		
96	电阻炉	
97	旋转蒸发器	
102	药物振荡振荡器	
101	耐腐蚀隔膜泵	
104	循环冷却器	
103	干式冷阱	
104	磁力搅拌器	
108	顶置电动搅拌器	
109	真空泵	
110	离心机	
112	漩涡混合仪	
111	多管漩涡混合仪	
112	振荡器/金属浴	
114	微孔板迷你离心机	
115	药片分散机	
117		
122	粘度计	
127		
磁力搅拌器 圆盘式 振荡器		
105		

加热磁力搅拌器 (圆盘型)
恒温磁力搅拌器 (圆盘型)

用途概述

磁力搅拌器是由微电机带动磁铁旋转产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子转动,从而对容器内液体进行搅拌、混合或辅助加热,以便溶液在设定温度进行充分混合,可广泛应用于生物、医药、化学等领域。

产品特点

- 液晶显示屏，菜单式操作界面，温度、转速和倒计时等参数一屏显示，简单易懂，便于观察和操作；
- 具有微电脑控制技术，确保搅拌粘度不断变化的情况下转速保持恒定；
- 铝合金压铸外壳，有耐温和耐常规腐蚀易清洁等特点；
- 加热台面基材材质是铝合金，外部喷涂复合材料涂层，既有良好的导热效果，又具有耐腐蚀性能，平滑的搅拌台面易清洁，无污染物停留；
- 输出扭力大，适合搅拌低粘度大容量或高粘度小容量的溶液；（不同机型不同容积）
- 控制面板上方设计有防腐蚀导液槽，即使搅拌过程中液体溢出也不会造成搅拌器内电子器件的损坏；
- 加热台采用圆盘，热量集中，更适合圆形烧杯、锥形瓶的加热和搅拌，可配专用平行反应模块（见P89）
- 采用无刷直流电机，运转更平稳、寿命更长、控速更准确，能正、反转搅拌；
- 可设置个性化功能：延时启动、正反转、华氏温度、自整定、报警方式、上电模式、定时结束后恒温、恢复出厂值；

安全保护

- 温度偏差保护：A和B系列实测温度超过设定温度某个值时（3℃~30℃，默认6℃）会停止加热；
- 极限温度保护：对A和B系列加热盘温超过极限温度（330℃或某值）后会自我保护性暂停加热，冷却后恢复加热功能，不需用户干预；
- 防烫警示灯：A和B系列工作盘温度超过50℃指示灯闪烁，提醒用户工作盘及容器、溶液等高于50℃状态，不能触碰；
- 延时关机防烫警示：部分A和B机型关闭主机开关后，若盘温超45℃，显示屏仍显示盘温并闪烁，上排显示Hot，指示灯闪烁，提醒用户不能触碰盘面及容器，在盘温低于45℃才关闭显示屏和指示灯；
- A型机对外接温度传感器有升温缓慢的监测判断并显示报警代码提醒；
- 特殊保护：防烫罩（选配件：盘面四周一定高度的围栏，对围栏高度四周区域有一定阻挡侧向意外触碰的作用；）

圆盘型搅拌器分类

- 恒温磁力搅拌器：A系列外接测温传感器，可直接测得并控制容器内的液体温度，包含B和C型机功能；
- 加热磁力搅拌器：B系列是监测和控制加热台面的温度，包含C型机功能；
- 磁力搅拌器：C系列只有搅拌功能无加热功能；

技术参数

型 号	IT-08A3	IT-08B3	IT-08C5
盘面材料	铝质材料（复合材料涂层）		
大搅拌容量(H ₂ O,公升)	3		5
搅拌转速，无极调速(rpm)	100~1600（2000定制）		
加热功率(Max.,W)	550W		—
输入功率(Max.,W)	600W		50W
溶液控温范围(°C)	RT+5 ~ 200°C	—	—
工作盘控温范围(°C)	—	RT+5 ~ 320°C	—
温度控制精度	±1°C	±1°C	—
保护功能	有（超温 3~30°C或盘内达到极限温度就停止加热）		—
定时功能	1 ~ 99:59（99 小时 59 分钟）		
安全设计	关键部位防水、隔热、散热设计		
工作盘面尺寸(mm)	Φ145		
外型尺寸(W×D×H)(mm)	155×250×120		
单机重量(KG)	4.0	3.5	
价格	RMB2960	RMB2650	RMB2430



08A系列 恒温磁力搅拌器



08B/C系列 磁力搅拌器

选购件:(增加选购件交货期7天)

1、防烫罩 ￥600元

加热磁力搅拌器 (方盘型)
恒温磁力搅拌器 (方盘型)

用途概述

磁力搅拌器是由微电机带动磁铁旋转产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子转动，从而对容器内液体进行搅拌、混合或辅助加热，以便溶液在设定温度进行充分混合，可广泛应用于生物、医药、化学等领域。

产品特点

- 液晶显示屏，菜单式操作界面，温度、转速和倒计时等参数一屏显示，简单易懂，便于观察和操作；
- 具有微电脑控制技术，确保搅拌粘度不断变化的情况下转速保持恒定；
- 铝合金压铸外壳，有耐温和耐常规腐蚀易清洁等特点；
- 加热台面基材材质是铝合金，外部喷涂复合材料涂层，既有良好的导热效果，又具有耐腐蚀性能，平滑的搅拌台面易清洁，无污染物停留；
- 输出扭力大，适合搅拌低粘度大容量或高粘度小容量的溶液；（不同机型不同容积）
- 控制面板上方设计有防腐蚀导液槽，即使搅拌过程中液体溢出也不会造成搅拌器内电子器件的损坏；
- 采用无刷直流电机，运转更平稳、寿命更长、控速更准确，能正、反转搅拌；
- 可设置个性化功能：延时启动、正反转、华氏温度、自整定、报警方式、上电模式、定时结束后恒温、恢复出厂值；

安全保护

- 温度偏差保护：A和B系列实测温度超过设定温度某个值时（3℃~30℃，默认6℃）会停止加热；
- 极限温度保护：对A和B系列加热盘温超过极限温度（330℃或某值）后会自我保护性暂停加热，冷却后恢复加热功能，不需用户干预；
- 防烫警示灯：A和B系列工作盘温度超过50℃指示灯闪烁，提醒用户工作盘及容器、溶液等高于50℃状态，不能触碰；
- 延时关机防烫警示：部分A和B机型关闭主机开关后，若盘温超45℃，显示屏仍显示盘温并闪烁，上排显示Hot，指示灯闪烁，提醒用户不能触碰盘面及容器，在盘温低于45℃才关闭显示屏和指示灯；
- A型机对外接温度传感器有升温缓慢的监测判断并显示报警代码提醒；
- 特殊保护：防烫罩（选配件：盘面四周一定高度的围栏，对围栏高度四周区域有一定阻挡侧向意外触碰的作用；）

搅拌机分类

- 恒温磁力搅拌器：A系列外接测温传感器，可直接测得并控制容器内的液体温度，A型包含B型机功能；
 - 加热磁力搅拌器：B系列是监测和控制加热台面的温度；
 - 磁力搅拌器：C系列只有搅拌功能无加热功能；
- 选则

技术参数

型 号	IT-07A3	IT-09A5	IT-09A12	IT-07B3	IT-09B5	IT-09B15	IT-09C10	IT-09C15
盘面材料	铝质材料（复合材料涂层）							
最大搅拌容量(H ₂ O,公升)	3	5	12	3	5	15	10	15
搅拌转速，无极调速(rpm)	100~1600（2000定制）							
加热功率(Max.,W)	400W	600W	700W	400W	600W	700W	—	—
输入功率(Max.,W)	500W	650W	750W	500W	650W	750W	50W	50W
溶液控温范围(℃)	RT+5 ~ 200℃			—			—	
工作盘控温范围(℃)	—			RT+5 ~ 320℃			—	
保护功能	有（超温 3~30℃或盘内达到极限温度就停止加热）							
定时功能	1 ~ 99:59（99 小时 59 分钟）							
安全设计	关键部位防水、隔热、散热设计							
温度控制精度	±1℃			±1℃			—	
工作盘面尺寸(mm)	130×130	180×180	180×180	130×130	180×180	180×180	180×180	180×180
外形尺寸(W×D×H)(mm)	155×250×110	210×330×130	210×330×130	155×250×110	210×330×130	210×330×130	210×330×130	210×330×130
单机重量(KG)	4.0	5.0	5.0	3.5	4.5	4.5	4.0	4.0
价格	RMB2690	RMB3090	RMB3650	RMB2290	RMB2530	RMB2940	RMB2190	RMB2530



07A/09A系列 恒温磁力搅拌器



07B/09B/09C系列 加热磁力搅拌器

选购件:(增加选购件交货期7天)

1、防烫罩 ￥600元

加热磁力搅拌器 (平行反应模块套装)

产品特点

- 加热磁力搅拌器A3 组件（只与IT-08A3/B3主机配套使用），可选配1/4 圆合金加热模块，应用于多样品的平行反应。适配于4ml-16ml 试管。也可以选配圆底烧瓶合金加热模块，容积适配50ml-500ml；
- 加热模块采用铝合金材料精加工而成，产品设计利用了铝材料的耐高温、导热快、温度均匀、易清洁等材料特性，表面采用精细喷砂和多色氧化工艺，耐受化学腐蚀同时，也为您的实验室添加色彩；
- 产品采用热传导的设计原理，可以避免采用常规油槽带来的油泄露、飞溅、油污甚至火灾的安全风险；



技术参数

货号	描述（注：外观颜色仅作参考）			价格	
	颜色	孔径孔深	可放置反应管数量		
	A30000	蓝色，载物托盘与 1/4 圆合金加热模块配合使用		RMB628	
	A30001	金色 1/4 圆	φ:15.2mm H:20mm	4ml*11 支	RMB390
	A30002	金色 1/4 圆	φ:17.8mm H:26mm	8ml*6 支	RMB390
	A30003	金色 1/4 圆	φ:21.6mm H:31.7mm	16ml*4 支	RMB390
	A30004	黑色 1/4 圆	φ:28mm H:24mm	20ml*4 支	RMB390
	A30005	黑色 1/4 圆	φ:28mm H:30mm	30ml*4 支	RMB390
	A30006	黑色 1/4 圆	φ:28mm H:43mm	40ml*4 支	RMB390
	A31000	蓝色平行反应座	φ:16.5mm H:23.2mm	8ml*29 支	RMB680
	A32001~A32004	蓝色圆底烧瓶加热模块	50ml 100ml 250ml 500ml	单槽	RMB825

顶置电动搅拌器

前置电动搅拌机采用数控式无极调速器，高速方便，可数字显示运行转速，使机体更为安全可靠，工艺先进，低噪音机械减速结构，体积小，输出扭矩大，适用于科研，大专院校，化工，制药，医疗单位等多种用途。

产品特点

人性化设计

- 液晶显示器，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，旋钮式设定，简单易懂，便于观察与操作；搅拌速度快慢可调，在设备工作状态中也可以对设备进行转速及工作时间调整；
- 采用免维护无碳刷直流无刷电机，能长时间连续稳定运行，具有稳定、静音和搅拌器强劲有力的特点；
- 设有搅拌棒穿透孔，使搅拌棒更换方便，不用上下移动搅拌头，就能轻松调节搅拌桨；
- 转速范围：30-2200rpm，最低使用转速 30 rpm，满足较低转速的数字反馈系统。具有转速控制的数字反馈系统，即使在粘度变化条件下，数字反馈控制系统也能保证搅拌机的恒速和扭矩；

安全功能

- 封闭式外壳：封闭式外壳阻止液体溅入机器内部腐蚀电路，保障安全运行；
- 具有平稳启动设计，可有效防止样品溢出。标配夹头保护套、安全扣、防滑垫，保证操作者使用安全不发生意外；
- 设有过载、过流、过温等安全保护功能，当出现异常情况，设备自动切断电路并出现故障提示，保证设备安全运行不发生意外；
- 采用进口自锁式夹头，操作方便快捷，有锁定功能，防止搅拌棒松动。轴心度高；

方便的数据处理

- 可配 RS232 数据接口，可通过软件实现对设备的远程控制，实时监测设备运行并记录转速、扭矩等数据；



技术参数

技术参数	型号	BD50	BD100	BD150
最大搅拌量		20L	40L	60L
转速范围[rpm]		30-2200		
定时范围		1~9999min		
转速显示分辨率[rpm]		±1		
转速记忆		有		
调速方式		旋钮式调节		
最大扭矩 [N.cm]		60		
最大粘度 [mPas]		10000	50000	80000
搅拌桨固定方式		自锁式夹头		
钻夹头夹持直径范围 [mm]		0.5-10		
外形尺寸(DxWxH) [mm]		160×80×180		
电机功率[W]		60	120	160
电压 [VAC]		100-240 50/60HZ		
价格		RMB3990	RMB4690	RMB5190

选配件

配件编号	型号规格	配件编号	型号规格
BD-1	通用平板支架 尺寸：200x318x800mm 材质：316不锈钢	BD-6	一字式搅拌桨 杆长：400mm 搅拌桨直径：60mm 材质：316不锈钢
BD-2	四叶式搅拌桨 杆长：400mm 搅拌桨直径：50mm 材质：316不锈钢	BD-7	一字式搅拌桨 杆长：350mm 搅拌桨直径：70mm 材质：PTFE涂层
BD-3	四叶式搅拌桨 杆长：350mm 搅拌桨直径：65mm 材质：PTFE涂层	BD-8	离心式搅拌桨 杆长：400mm 搅拌桨直径：90mm 材质：316不锈钢
BD-4	扇片式搅拌桨 杆长：400mm 搅拌桨直径：68mm 材质：316不锈钢	BD-9	离心式搅拌桨 杆长：350mm 搅拌桨直径：85mm 材质：PTFE涂层
BD-5	扇片式搅拌桨 杆长：350mm 搅拌桨直径：68mm 材质：PTFE涂层		

注：未标注标配型号，则为选配。

生化/霉菌培养箱	0
低温培养箱	0
多参数生化/霉菌培养箱	0
生物安全低温培养箱	0
半导体制冷低温培养箱	0
生物安全培养箱	0
恒温培养箱	1
隔水式恒温培养箱	1
多参数恒温/微生物培养箱	1
CO ₂ 培养箱	1
光照培养箱/人工气候箱	1
恒温恒湿箱	2
回旋振荡器	3
恒温培养摇床	3
恒温振荡器	3
大型恒温振荡器	3
落地振荡器	3
摇瓶机	3
叠片式-振荡培养箱	3
超低温冰箱	4
低温冷藏箱	4
液相液氮罐	4
干式运输液氮罐	4
生物安全柜	5
洁净工作台	5
干燥箱	5
真空干燥箱	5
加热循环水	6
恒温振荡水浴	7
油浴锅	7
恒温水槽与水浴锅	7
药品稳定性试验箱	7
步入式药品试验箱	8
老化试验箱	8
热空气消毒箱	8
高低温(交变)试验箱	8
高低温(交变)湿热试验箱	8
紫外耐候气候试验箱	8
氙灯耐候气候试验箱	9
盐雾腐蚀试验箱	9
电阻炉	9
旋转蒸发器	9
分液漏斗/振荡器	9
耐腐蚀隔膜泵	10
循环冷却器	10
干式冷却	10
磁力搅拌器	10
顶置电动搅拌器	10
氮吹仪	10
离心机	11
漩涡混匀仪	11
多管震荡混匀仪	11
孵育器/金属浴	11
微孔板离心微孔机	11
均质分散机	11
粘度计	11

顶置电动搅拌器

BMD系列氮吹仪

产品概述

氮吹仪主要应用于大批量样品的浓缩制备，如药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。

产品特点

- 每条吹扫针可独立控制、吹扫、流量调节、不浪费气体；
- 气针位置可调，方便使用；
- 温度即时显示、时间递减显示；

选构件:(增加选构件交货期7天)

1、氮气流量调节阀 ￥1400元



技术参数

型号	BMD200-1	BMD200-2
温度控制范围	室温 +5℃ ~ 150℃	
控温精度 @40 ~ 100℃	±0.5℃	
控温精度 @100 ~ 150℃	±1℃	
同模块最大温差 @40℃	±0.3℃	
显示精度	0.1℃	
升温时间 (从 40-150℃)	≤ 30min	
标配模块数	1	2
气针长度	150mm	
氮气流量	0 ~ 15L/min	
尺寸 (mm)	280×240×500	
价格	RMB7800	RMB10900

适配模块

订货号	型号	模块描述	尺寸 (mm)
AS-01081-01	BK01	49×φ6mm	96×96×49
AS-01081-02	BK02	49×φ7mm	96×96×49
AS-01081-03	BK03	25×φ10mm	96×96×49
AS-01081-04	BK04	25×φ12mm	96×96×49
AS-01081-05	BK05	25×φ13mm	96×96×49
AS-01081-06	BK06	12×φ15mm	96×96×49
AS-01081-07	BK07	16×φ15mm	96×96×49
AS-01081-08	BK08	12×φ16mm	96×96×49
AS-01081-09	BK09	16×φ16mm	96×96×49
AS-01081-10	BK10	12×φ19mm	96×96×49
AS-01081-11	BK11	16×φ19mm	96×96×49
AS-01081-12	BK12	9×φ20mm	96×96×49
AS-01081-13	BK13	9×φ26mm	96×96×49
AS-01081-14	BK14	4×φ28mm	96×96×49
AS-01081-15	BK15	4×φ40mm	96×96×49
AS-01081-16	BK16	49×0.5ml 离心管	96×96×49
AS-01081-17	BK17	25×1.5ml 离心管	96×96×49
AS-01081-18	BK18	25×2.0ml 离心管	96×96×49

离心机 (小型)


离心机BLF系列采用先进的设计理念和制造技术，外形流畅美观，结构紧凑牢固，超静音，为科研实验不可多得的一款仪器精品。该款小离心机非常适用于微管过滤和快速离心，防止离心管中液体挂壁现象。

产品特点

- 静音：采用特种电机，动力强，超静音，运转稳定，噪音一般小于50dB，最高不超过54dB；
- 瞬间加速快：5秒钟内达到最高转速的90%；
- 震动小：精心设计的减震装置，运行震动极小；
- 小体积，大容量：比市场同等产品容量大，最多可装2ml×6；
- 更换转子方便：设计巧妙，不用任何工具即能方便更换转子；
- 停机快：设计有两种停机方式，自由停机不超过15秒钟，开盖刹车停机只需3秒钟；

技术参数

型 号	BLF-6K	BLF-7K	BLF-10K
标配转子	0.2ml/八联管×2排 1.5ml×6管 6K可增加一个载玻片转子	2×8×0.2ml PCR管角转子 6×1.5ml / 2.0ml角转子	6×1.5ml / 2.0ml角转子
速度	6000rpm	7000rpm	10,000rpm
相对离心力	2000g	2300g	5000g
最大容量	0.2ml×8管 0.2ml/八联管×2排	0.2ml×8管 0.2ml/八联管×2排	2.0ml×6管
电源	AC100 ~ 240V,1A,50/60Hz(CE)		
保险管(Fuse)	250V 0.5A		
外形尺寸(W×D×H)(mm)	175×148×118		
噪音	<50dB	<52dB	<54dB
加速时间	5秒钟内达到额定速度的90%		
减速时间	关盖：15秒钟内 开盖：3秒钟内		
价格	RMB1590	RMB1590	RMB1980

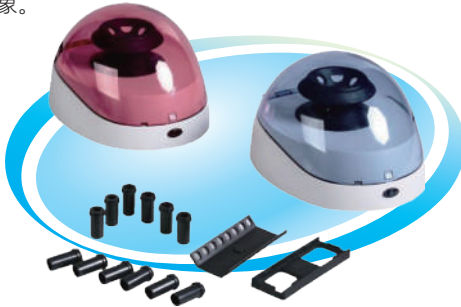

漩涡混匀仪

漩涡混匀仪具有结构简单可靠，仪器体积小，耗电省，噪音低等特点，广泛应用于生物化学，基因工程，医学等实验需求。对液液、液固、固固（粉末）混合，它能将所需混合的任何液体、粉末以高速旋涡式快速混合，混合速度快、均匀。

产品特点

- V1采用固定速度/V2采用无极调速，最大可达2800RPM；
- 偏心球轴设计，震动头安装方便。
- 柔软硅胶脚垫，防止仪器在高速震动时移动，外形小巧，防震，适合高速工作；
- 体积小，耗电省，噪音低；
- 机体均采用增强型工程塑料成型技术，机体无油漆喷涂，耐酸碱，耐碰撞；
- 工作台面全部为耐磨，耐磨，安全的TPU材料，改变原海绵台面易破损的特点；
- 仪器集成了连续，点震，连续，调速等功能，为实验提供了快速的操作平台；

技术参数

参数 \ 型号	V1	V2
转速范围	2800	0-2800rpm
转速显示	无显示	刻度
震荡方式	圆周	
运行模式	点动/连续运转	
振荡直径	4mm	
电机输入功率	60w	
功率	60w	
外观尺寸	170×120×140 (mm)	
标配	耐磨标准头	
电压	220V 50/60HZ	
价格	RMB890	RMB1090

适配试管规格

标准头	标准头，用于直径小于30mm的试管和小容器
φ100mm	通用圆头，100mm圆形平板支架，与试管适配器，垫片配合
手持撑杆	手持支撑杆，与试管适配器配合
48孔0.2ml试管适配器	与φ100mm通用圆头和手持撑杆连用，外径98.5、高32、孔径5mm，0.2ml试管
24孔0.5ml试管适配器	与φ100mm通用圆头和手持撑杆连用，外径98.5、高32、孔径6.5mm，0.5ml试管
12孔1.5或2ml试管适配器	与φ100mm通用圆头和手持撑杆连用，外径98.5、高32、孔径9mm，1.5或2ml试管
8孔5ml试管适配器	与φ100mm通用圆头和手持撑杆连用，外径98.5、高32、孔径11mm，5ml试管
8孔10ml或15ml试管适配器	与φ100mm通用圆头和手持撑杆连用，外径98.5、高52、孔径14mm，10或15ml试管
4孔50ml试管适配器	与φ100mm通用圆头和手持撑杆连用，外径98.5、高52、孔径27mm，50ml试管



- 01 生化/霉菌培养箱
- 05 低温培养箱
- 06 多箱体生化/霉菌培养箱
- 07 生物安全低温培养箱
- 08 半导体制冷低温培养箱
- 09 生物安全培养箱
- 10 恒温培养箱
- 13 隔水式恒温培养箱
- 14 多箱体隔水式恒温培养箱
- 15 CO₂培养箱
- 19 光照培养箱/人工气候箱
- 26 恒温恒湿箱
- 31 回旋振荡器
- 33 恒温培养摇床
- 35 恒温振荡器
- 36 大型恒温振荡器
- 37 落地振荡器
- 38 摇瓶机

BTV-200多管旋涡混合仪

BTV-200多管旋涡混合仪是新一代效率高的混匀仪，最高可使用110工位试管，最高转速可达2000rpm。结构紧凑，操作简单，满足了多样品同时操作的实验要求，广泛应用于生物制药，化工化学、食品卫生等不同领域。

产品特点

- 采用直流无刷电机，免维护，可长时间运行；
- 具有定时操作功能，可实现连续运行及定时操作两种操作模式；
- 最大载重量可达2kg；
- LCD液晶显示，可实时显示转速及运行时间；
- 最高转速可达2000rpm；
- 振幅可达3mm，很好的保证混匀效果；
- 可同时混匀多个0.2~100ml的样品；

技术参数

型号	BTV-200
电源	AC100~240V 50~60Hz
振幅	3mm
运行方式	回旋振荡
转速范围rpm	100~2000rpm
定时范围	1~9999mins
整机功率	75w
最大承重	≤2Kg
仪器尺寸mm	380×260×165
净重	10Kg
适配器	标配BTV-B22，多组适配器可选
价格	RMB18900

BTV-100多管漩渦混勻儀

BTV-100多管旋涡混合仪，一次可最多混合处理50个样品。可选配多种配件，满足不同规格试管旋涡混合的需要。

产品特点


- 可一次处理50个样品；
- 两种工作模式：持续工作或点动式；
- LCD显示速度、时间、微处理器控制速度和时间；
- 微处理控制；
- 多种泡沫试管支架选配；

技术参数

型号	调速范围	调速精度	定时范围	周转直径	最大承重	顶部面板尺寸mm	仪器尺寸	净重	电源	功率	价格
BTV-100	500-2500rpm	±50rpm (在2500rpm检测)	1min-100h	3.6mm	4.5kg	311x184	426x250x480	21.5kg	AC100 ~ 240V 50/60Hz	60W	RMB11800

选购件:(增加选购件交货期7天)

产品类型	描述	孔数	尺寸规格mm	价格
BTV-B01	Φ10mm泡沫试管架	50	245×132×45 mm	RMB230
BTV-B02	Φ12mm泡沫试管架	50	245×132×45 mm	RMB230
BTV-B03	Φ13mm泡沫试管架	50	245×132×45 mm	RMB230
BTV-B04	Φ16mm泡沫试管架(可放15ml离心管)	50	245×132×45 mm	RMB230
BTV-B05	Φ25mm泡沫试管架	15	245×132×45 mm	RMB230
BTV-B06	Φ29mm泡沫试管架(可放50ml离心管)	15	245×132×45 mm	RMB230
BTV-B00	可替换托盘垫(上&下)	/	305×178×25 mm	RMB200

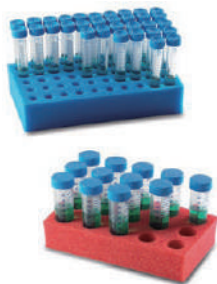

微孔板孵育器

BK100-4A微孔板恒温孵育器采用微处理技术结合PID控制方式而形成的微孔板恒温孵育器。它具有体积小、重量轻；温度、时间LCD显示，美观大方，操作简单等特点。主要用于酶板（96孔/384孔板）、细胞培养板（24孔板、48孔板、96孔板等）等溶液在适当温度下进行培养孵育，常用于微孔板培养昆虫和动植物细胞的孵育。

产品特点

- LCD液晶显示；
- 具有对微孔板进行上下加热功能，使微孔板的每个孔能够均匀地被加热；
- 微处理器控制温度、时间，温控线性好、波动小；
- 可同时显示设置和实际温度、时间参数；
- 可放4个标准酶标板和微孔板，程序运行结束后发出声音报警讯号；
- 多重安全保护功能，符合CE安全标准，安全可靠；

技术参数

型号	温度控制范围	定时设置	温控精度	显示精度	升温速度 (20℃至70℃)	容量	尺寸(mm)	重量	价格
BK100-4A	室温+5℃~70℃	1min~99h59min	±0.5℃	±0.1℃	≤20min	4块微孔板/深孔板	320×350×185	8kg	RMB8500



振荡恒温金属浴

TUS-200P (标配E模块)

产品特点

- 液晶显示屏，菜单式操作界面，多组数据一屏显示，操作简单；
- 具有断电恢复功能，当外电源断电又重新来电时，设备可按原设定程序自动恢复运行；
- 微处理器控制，温控线性好、振荡转速准确、波动小；
- 设有定时功能，0~100小时范围内任意设定培养时间，显示屏显示剩余时间，定时终点；发出声音报警讯号；
- 多种标准样品模块可供选择，更换方便。也可根据用户要求定做模块；
- 短振荡点动功能；
- 直流无刷电机驱动、长寿命、免保养；

技术参数

温度控制范围	RT+5 ~ 100°C
温度均匀性	≤±0.5°C
温度稳定性	±0.5°C
温度显示精度	0.1°C
升温速度	<12min (从20°Cto 100°C)
振荡转速范围	200-1500 rpm (步进1 rpm)
振荡幅度	2mm (水平回转)
定时范围	0 ~ 99h59min
标准模块	A模块: 96×0.2ml B模块: 54×0.5ml C模块: 35×1.5ml D模块: 35×2.0ml E模块: 15×0.5ml+20×1.5ml (标配)
电机	直流无刷电机,软启动
电源	AC220V 2.5A, 60/50HZ, 最大功率: 150VA
外形尺寸	300×220×170 mm
重量	7kg
价格	RMB8290

生化 / 霉菌培养箱 04
 低温培养箱 05
 多箱体生化 / 霉菌培养箱 06
 生物安全低温培养箱 07
 半导体制冷 / 低温培养箱 08
 生物安全恒温培养箱 09
 恒温培养箱 10
 隔水式恒温培养箱 13
 多箱体恒温 / 生化培养箱 14
 CO₂培养箱 15
 光照培养箱 / 人工气候箱 19
 恒温恒湿培养箱 26
 回旋振荡器 31
 恒温培养振荡床 33
 恒温振荡器 35
 大型恒温振荡器 36
 落地振荡器 37
 摇瓶机 38

叠加式—振荡培养箱 39
超低温冰箱 43
低温冷藏箱 45
液相液氮罐 46
干式低温液氮罐 48
生物安全柜 49
洁净工作台 50
干燥箱 52
真空干燥箱 59
加热循环箱 68
恒温振荡水浴 71
浴槽 74
恒温水浴槽+水锅 76
药品稳定性试验箱 77
步入式药品试验箱 83
老化试验箱 84
热空气消毒箱 84
高低压(交变)试验箱 85
高低压(交变)湿热试验箱 87

- 紫外耐候气候试验箱 89
- 氙灯耐候气候试验箱 91
- 盐雾腐蚀性试验箱 92
- 电阻炉 93
- 旋转蒸发器 96
- 分液漏斗振荡器 100
- 耐腐蚀隔膜泵 101
- 循环冷却器 102
- 干式冷却器 103
- 磁力搅拌器 104
- 顶置电动搅拌机 108
- 氮吹仪 109
- 离心机 110
- 漩涡混匀仪 110
- 多管漩涡混匀仪 111
- 破碎机/金磨 112
- 微孔板逐孔离心机 114
- 均质分散机 115
- 粘度计 117



实验室仪器的升级换代产品
理想的实验室伙伴

持之一恒

我们只制造放心

www.yihengchina.com
www.yihengyiqi.com



01 生化/霉菌培养箱
04

05 低温培养箱
06 多箱体生化/霉菌培养箱

07 生物安全低温培养箱
08 半导体制冷低温培养箱

09 生物安全培养箱
10 恒温培养箱

13 隔水式恒温培养箱
14 多箱体恒温/微生物培养箱

15 CO₂培养箱
18

19 光照培养箱/人工气候箱
26 恒温恒湿箱

31 回旋振荡器
33 恒温培养摇床

35 恒温振荡器
36 大型恒温振荡器

37 落地振荡器
38 摇瓶机

39 叠加式-振荡培养箱
42

43 超低温冰箱
45 低温冷藏箱

46 液相液氮罐
48 干式运输液氮罐

49 生物安全柜
50 洁净工作台

52 干燥箱
59 真空干燥箱

68 加热循环槽
71 恒温振荡水槽

74 油浴锅
76 恒温水槽与水浴锅

77 药品稳定性试验箱
83 步入式药品试验室

84 老化试验箱
84 热空气消毒箱

85 高低温(交变)试验箱
87 高低温(交变)湿热试验箱

89 紫外耐候气候试验箱
90

91 氙灯耐候气候试验箱
92 盐雾腐蚀试验箱

93 电阻炉
96

97 旋转蒸发器
100 分液漏斗振荡器

101 耐腐蚀隔膜泵
102 循环冷却器

103 干式冷阱
104 磁力搅拌器

108 顶置电动搅拌器
109 氮吹仪

110 离心机
110 漩涡混匀仪

111 多管漩涡混匀仪
112 孵育器/金属浴

114 微孔板迷你离心机
115 均质分散机

117 粘度计
122

117 粘度计
122

117 粘度计
122

117 粘度计
122

117 粘度计
122

117 粘度计
122

117 粘度计
122

TV-150B粘度计—永不磨损，经久耐用

产品特点

无驱轴功能（扭丝+磁性轴承）

- 采用非接触式的“扭丝和磁性轴承”结构，零部件无损耗.高精度和安心的测定，持续稳定的数据重复性；

彩色液晶触摸屏

- 搭载了3.5英寸彩页液晶触摸屏，测定参数一目了然，操作简便直观；

一键式的转子安装

- 采用可拆卸转子的简易棒插式方式；

温度表示

- 使用专用的温度传感器（选配）可显示测定中的温度；

数据输出

- 可与打印机或PC连接；

粘度测定范围

机型	满量程扭矩	粘度测定范围
TV-150BM	67.37 $\mu\text{N}\cdot\text{m}$	15 ~ 6,000,000 mPa·s
TV-150BH	718.7 $\mu\text{N}\cdot\text{m}$	100 ~ 40,000,000 mPa·s
TV-150BR	1437.4 $\mu\text{N}\cdot\text{m}$	100 ~ 80,000,000 mPa·s
TV-150BU	5749.6 $\mu\text{N}\cdot\text{m}$	400 ~ 320,000,000 mPa·s


技术参数

规格	型号	TV-150B 型
旋转速度、段数		0.1~100.0rpm(0.1rpm 步进)
精度		满刻度之 $\pm 1.0\%$ 以内
再现性		满刻度之 $\pm 0.2\%$ 以内
粘度表示		同时显示粘度值、% 转矩值、测定上限值 (SI 或 CGS 单位)
周围环境温度		0~40℃
周围环境湿度		相对湿度低于 90% (无结露)
接触液体部分的材料		不锈钢
电源		AC100~230V
消耗电流		20vA
主机尺寸 (W×D×H) mm		120×182×199
底座尺寸 (W×D×H) mm		300×310×436
重量		约 2.4kg

标准配置



TM型转子一套

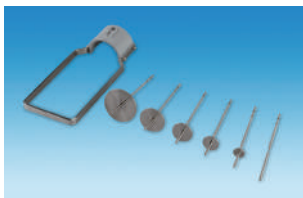

TH型转子一套




底座支架



收纳箱

日本原装进口

東機産業

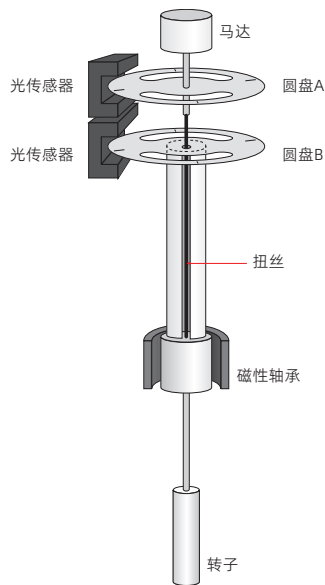

TVC-10粘度计—体积小，重量轻，测定方便

产品特点

便携式

- 仅仅使用4节碱性干电池，设计小巧玲珑；

数据显示一目了然

- 满量程指示器显示粘度测定的百分值；在测定中 $\odot$ 标记闪烁；

操作键简捷明了

- 单位选择键 UNIT·转子选择键 ROTOR·转速选择键 SPEED·起始停止键 START/STOP·电源键 $\odot$

可变转速

- 与旧型号相比，拓宽了转速的选择(5/10/20rpm)

分离型

- 操作单元和测量单元可以分离（使用专用连接线）

手柄位置可变

- 有四个设定位置角度 0°/ 45°/ 90°/ 135°

粘度测定范围

转子	旋转速度	20rpm	10rpm	5rpm
No.0		10 ~ 100 mPa·s	20 ~ 200 mPa·s	40 ~ 400 mPa·s
No.1		50 ~ 500 mPa·s	100 ~ 1000 mPa·s	200 ~ 2000 mPa·s
No.2		200 ~ 2000 mPa·s	400 ~ 4000 mPa·s	800 ~ 8000 mPa·s
No.3		1 ~ 10 Pa·s	2 ~ 20 Pa·s	4 ~ 40 Pa·s
No.4		5 ~ 50 Pa·s	10 ~ 100 Pa·s	20 ~ 200 Pa·s
No.5		20 ~ 200 Pa·s	40 ~ 400 Pa·s	80 ~ 800 Pa·s

技术参数

旋转速度	5rpm/10rpm/20rpm
精度	满量程 $\pm 3\%$ 以内（2号，3号，4号转子） 满量程 $\pm 4\%$ 以内（0号，1号，5号转子）
再现性	满量程 $\pm 2\%$ 以内
测定值显示(LCD)	粘度值 (mPa·s/Pa·s) / 百分值 (%), 旋转速度 (rpm), 转子编号 (No.) 测定状态（测定中、电量不足），满量程显示
测定值单位	SI 制 (mPa·s/Pa·s)、% 值
使用环境	5 ~ 40℃ 90%RH 以下（无结露）
电源	AA碱性干电池4节（可使用交流电源适配器）
连续运行时间	约20小时（环境温度25℃、使用新电池；）（运行时间根据实际使用情况而异。）
接触液体部分的材料	不锈钢
外壳材质	PBT树脂
重量	约880 g（含电池和保护手）

选配件



底座支架



各类转子



交流电源适配器



手提箱

日本原装进口

東機産業



标准配置：

主机.....1台
主机手提箱.....1个
NO.2转子.....1个
AC适配器.....1个
使用说明书.....1册
操作单元和测量单元连接线.....1m
AA碱性干电池.....4节

01 生化/霉菌培养箱
04

05 低温培养箱
06 多箱体生化/霉菌培养箱

07 生物安全低温培养箱
08 半导体制冷低温培养箱

09 生物安全培养箱
10 恒温培养箱

13 隔水式恒温培养箱
14 多箱体恒温/微生物培养箱

15 CO₂培养箱
18

19 光照培养箱/人工气候箱
26 恒温恒湿箱

31 回旋振荡器
33 恒温培养摇床

35 恒温振荡器
36 大型恒温振荡器

37 落地振荡器
38 摇瓶机

39 叠加式-振荡培养箱
42

43 超低温冰箱
45 低温冷藏箱

46 液相液氮罐
48 干式运输液氮罐

49 生物安全柜
50 洁净工作台

52 干燥箱
59 真空干燥箱

68 加热循环槽
71 恒温振荡水槽

74 油浴锅
76 恒温水槽与水浴锅

77 药品稳定性试验箱
83 步入式药品试验室

84 老化试验箱
84 热空气消毒箱

85 高低温(交变)试验箱
87 高低温(交变)湿热试验箱

89 紫外耐候气候试验箱
90

91 氙灯耐候气候试验箱
92 盐雾腐蚀试验箱

93 电阻炉
96

97 旋转蒸发器
100 分液漏斗振荡器

101 耐腐蚀隔膜泵
102 循环冷却器

103 干式冷阱
104 磁力搅拌器

108 顶置电动搅拌器
109 氮吹仪

110 离心机
110 漩涡混匀仪

111 多管漩涡混匀仪
112 孵育器/金属浴

114 微孔板迷你离心机
115 均质分散机

117 粘度计
122

117 粘度计
122

117 粘度计
122

117 粘度计
122

117 粘度计
122

117 粘度计
122



实验室仪器的升级换代产品
理想的实验室伙伴

持之一恒

我们只制造放心

www.yihengchina.com
www.yihengyiqi.com



01 生化/霉菌培养箱
04 低温培养箱
06 多箱体生化/霉菌培养箱

07 生物安全低温培养箱
08 半导体制冷低温培养箱

09 生物安全培养箱
10 恒温培养箱

13 隔水式恒温培养箱
14 多箱体恒温/微生物培养箱

15 CO₂培养箱

19 光照培养箱/人工气候箱
26 恒温恒湿箱

31 回旋振荡器
33 恒温培养摇床

35 恒温振荡器
36 大型恒温振荡器

37 落地振荡器
38 摇瓶机

39 叠加式-振荡培养箱
42 超低温冰箱
45 低温冷藏箱

46 液相液氮罐
48 干式运输液氮罐

49 生物安全柜
50 洁净工作台

52 干燥箱
59 真空干燥箱

68 加热循环水槽
71 恒温振荡水槽

74 油浴锅
76 恒温水槽与水浴锅

77 药品稳定性试验箱
83 步入式药品试验室

84 老化试验箱
84 热空气消毒箱

85 高低温(交变)试验箱
87 高低温(交变)湿热试验箱

89 紫外耐候试验箱

91 氙灯耐候试验箱
92 盐雾腐蚀试验箱

93 电阻炉

97 旋转蒸发仪
100 分液漏斗振荡器

101 耐腐蚀隔膜泵
102 循环冷却器

103 干式冷阱
104 磁力搅拌器

108 顶置电动搅拌器
109 氮吹仪

110 离心机
110 漩涡混匀仪

111 多管漩涡混匀仪
112 孵育器/金属浴

114 微孔板迷你离心机
115 均质分散机

117 粘度计
122

117 粘度计
122

117 粘度计
122

117 粘度计
122

117 粘度计
122

117 粘度计
122

117 粘度计
122

117 粘度计
122

117 粘度计
122

TV-100/200粘度计—拥有三挡量程触摸屏粘度计 日本原装进口

产品特点

彩色液晶屏幕

- 搭载了4.3英寸液晶彩色触摸屏。测定参数一目了然,操作简便直观;
- 多重测量范围**
- 宽广的动态量程,实现了多重量程测定;
- 测定量程最大可扩展至8倍,不需要更换转子,可以进行连续的测定;

自动量程切换

- 自动切换测定量程,实现了多重量程测定;

旋转速度

- 以0.1rpm的速度递升,可在0.1 ~ 100.0rpm的旋转速度之间设定任意转速;
- 结合程序测定功能,实现了粘度测定的高效性;

自动零点校正和偏离校正

- 借助此自动功能,可以很方便地进行仪器校正;

温度表示

- 使用专用的温度传感器(选配)可显示测定中的温度;

无枢轴结构

- 采用灵活的铰链系统取代了枢轴和宝石,实现了无枢轴结构;

数据收集和图表软件 Visco-chart

- 可以通过电脑控制粘度计;
- 输出的数据可用软件实时创建图表;
- 数据可利用CSV形式及文本形式保存,可用软件随时进行数据分析;

粘度测定范围

机型	测定范围	满量程扭矩	粘度测定范围
TV-100BL TV-200BL	M 2.5M 5M	67.37μN·m 168.4μN·m 336.9μN·m	15 ~ 6,000,000mPa·s (1~600,000)(*注1) 25 ~ 15,000,000mPa·s 50 ~ 30,000,000mPa·s
TV-100BH TV-200BH	H R U	718.7μN·m 1437.4μN·m 5749.6μN·m	100 ~ 40,000,000mPa·s(*注2) 100 ~ 80,000,000mPa·s(*注2) 400 ~ 320,000,000mPa·s(*注2)
TV-100EL TV-200EL	M 2.5M 5M	67.37μN·m 168.4μN·m 336.9μN·m	0.608 ~ 6,076mPa·s(*注3) 1.52 ~ 15,190mPa·s(*注3) 3.04 ~ 30,380mPa·s(*注3)
TV-100EH TV-200EH	H R U	718.7μN·m 1437.4μN·m 5749.6μN·m	6.48 ~ 64,820 mPa·s(*注3) 13.0 ~ 129,600mPa·s(*注3) 51.9 ~ 518,500mPa·s(*注3)

*注1)添加低粘度适配器时的测定范围 *注2)选配TH1转子时的测定范围。 *注3)使用标准转子时的测量范围。

※选配其它转子,可扩大测定范围。



彩色触摸屏

技术参数

规格	型号	TV-100 / TV-200
旋转速度		0.1~100RPM(递步增长0.1RPM,共1001段)
测定模式		手动、自动停止时间,自动粘度停止模式,编程模式(最大40段)(*注4)
测定模式储存		上述测定模式中各10种
测定单位		% / mPa·s / Pa·s / kPa·s/(可切换至cP/P)
精度		满量程之±1%以内
再现性		满量程之±0.2%以内
样品温度范围		10~60℃
输入输出信号		USB A端子(用于连接串行打印机)、USB B端子(用于连接PC) 用于连接温度传感器(选配件) 外部连接端子(测量开始/结束信号)
温度显示分辨率		0.1℃(*注5)
温度精度		±0.2℃(*注5)
零点设置		有
量程设置		有
周围环境温度		0~40℃
周围环境湿度		相对湿度低于90%(无结露)
电源输出		AC100~230v 50/60Hz(标配电源线的限额载荷为AC125V)
消耗电流		15VA
接触液体部分		不锈钢
主机尺寸		W300×D334×H436mm
重量		约6.5kg(包含底座支架),底座支架约2.4kg

*注4: 仅TV-200型有此功能

*注5: 选配温度计使用时

选配件



● 锥形转子

选配其它转子,可扩大测定范围;

● 打印机



打印方式	列式热敏
打印宽度	104mm
外形尺寸	145(W)×135(D)×58(H)
重量	约490g
热敏纸	TP-341L-1
纸幅·滚轴外径·长度	112mm φ48mm 28mm

● 温度传感器

连接到主机后,显示画面会显示温度。安装在样品杯上使用;



● 恒温槽

可控制样品温度,请和少量样品适配器、锥板粘度计配套使用;



TV-100E/200E型锥板粘度计

标准配置:

主机.....1台
标准锥形转子(1°34'×R24).....1个
电源线.....1根
主机收纳箱.....1个
支架.....1套



主机和转子收纳箱



标准锥形转子1°34'×R24

生化/霉菌培养箱 01
04

低温培养箱 05
多箱体生化/霉菌培养箱 06

生物安全低温培养箱 07
半导体制冷低温培养箱 08

生物安全培养箱 09
恒温培养箱 10

隔水式恒温培养箱 13
多箱体恒温/微生物培养箱 14

CO₂培养箱 15
18

光照培养箱/人工气候箱 19
恒温恒湿箱 26

回旋振荡器 31
恒温培养摇床 33

恒温振荡器 35
大型恒温振荡器 36

落地振荡器 37
摇瓶机 38

叠加式-振荡培养箱 39
42

超低温冰箱 43
低温冷藏箱 45

液相液氮罐 46
干式运输液氮罐 48

生物安全柜 49
洁净工作台 50

干燥箱 52
真空干燥箱 59

加热循环水槽 68
恒温振荡水槽 71

油浴锅 74
恒温水槽与水浴锅 76

药品稳定性试验箱 77
步入式药品试验室 83

老化试验箱 84
热空气消毒箱 84

高低温(交变)试验箱 85
高低温(交变)湿热试验箱 87

紫外耐候试验箱 89
90

氙灯耐候试验箱 91
盐雾腐蚀试验箱 92

电阻炉 93
96

旋转蒸发仪 97
分液漏斗振荡器 100

耐腐蚀隔膜泵 101
循环冷却器 102

干式冷阱 103
磁力搅拌器 104

顶置电动搅拌器 108
氮吹仪 109

离心机 110
漩涡混匀仪 110

多管漩涡混匀仪 111
孵育器/金属浴 112

微孔板迷你离心机 114
均质分散机 115

粘度计 117
122

粘度计 117
122

粘度计 117
122

粘度计 117
122

粘度计 117
122

粘度计 117
122

粘度计 117
122

粘度计 117
122

